


DERMLITE DL5

English	3
Bosanski	4
Čeština	5
Dansk	6
Deutsch	7
Eestlane	8
Español	9
Français	10
Gaeilge	11
Hrvatski	12
Italiano	13
Latvietis	14
Lietuvis	15
Magyar	16
Nederlands	17
Polskie	18
Português	19
Română	20
Slovenščina	21
Slovenský	22
Suomi	23
Svenska	24
Türk	25
Ελληνικά	26
български	27
русский	28
Український	29
한국어	30
日本語	31
简体中文	32

dermlite DL5

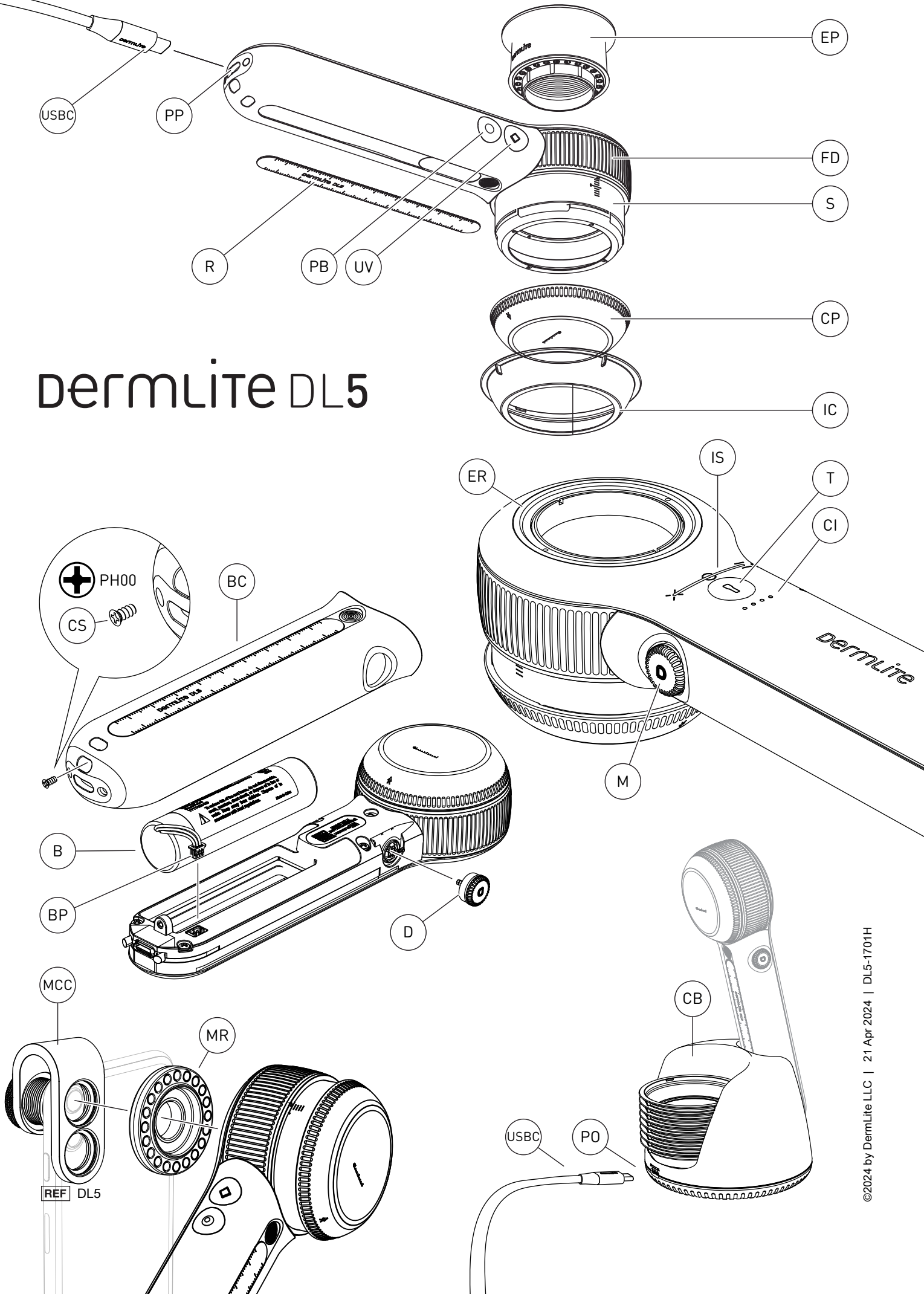

Instructions

Intended Use

This device is intended for medical purposes to illuminate body surfaces. It is used for non-invasive visual examination of intact skin.

This battery-operated product is designed for external examination only within professional healthcare facilities by medical professionals.

Check the correct operation of the device before use! Do not use the device if there are visible signs of damage, malfunction, or the device operates in a manner not consistent with what is described in this instructions for use.

CAUTION: Do not look directly into the LED light. Patients must close their eyes during examinations.

In case of a serious incident with the use of this device, notify DermLite immediately and, if required by local regulations, your national health authority.

CAUTION: Do not use the device in fire or explosive risk area (e.g. oxygen-rich environment).

CAUTION: UV Light. Do not look directly at light.

CAUTION: This product contains magnets. Do not use in proximity of pacemakers or other magnetically sensitive devices or items.

WARNING: This product can expose you to chemicals including methylene chloride and hexavalent chromium, which are known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Electromagnetic Compatibility

This device complies with the EMC Emissions and Immunity level requirements of the standard IEC 60601-1-2:2014. The emission characteristics of this equipment make it suitable for use in professional healthcare environment as well as residential environment (CISPR 11 Class B). This equipment offers adequate protection to radio communication service. In the rare event of interference to the radio communication service, the user might need to take mitigation measures, such as relocating or re-orienting equipment.

WARNING: Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.

WARNING: Use of accessories other than those provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.

WARNING: Portable RF transmitters should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the device. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.

Do not use this device during magnetic resonance imaging (MRI) or in an MRI environment.

IMPORTANT: Before initial use, please charge the internal lithium ion battery. See "Battery and Charging" for details.

DermLite DL5 is a smartphone-compatible pocket dermatoscope with 10x magnification for visualizing skin structures using variable polarized light and UV illumination.

Hold your DermLite DL5, with the LEDs aimed in the direction of the lesion to be examined, approximately 12 mm above the skin. Push the main button (M) to turn on the device in cross-polarized mode. Look through the lens and move the device closer or farther away from the skin to focus the image. For dermoscopy with skin contact, rotate the Focus Dial (FD) to extend the Spacer (S) and focus the image. Push and hold the main button (M) for about 1 second to turn off the device. To save power, the unit automatically turns off after 3 minutes.

Variable Polarization

Tap the main button (M) to toggle between cross-polarized and non-polarized illumination. Turn the main button to move through the range of 9 polarization settings, from cross-polarized via non-polarized to parallel-polarized light. The indicator strip (IS) reflects the current polarization status, whereas "X" marks cross-polarized, "0" represents

non-polarized, and "=" stands for parallel polarization.

PigmentBoost®

While white light is active, tap (PB) to activate the orange-colored PigmentBoost lighting in addition to white light. The indicator LED next to the PB button (PB) will illuminate. Tap again to deactivate.

UV Mode

To visualize fluorescing structures, tap the UV button (UV) to activate LEDs with a wavelength of 365 nm. The indicator LED next to the UV button (UV) will illuminate. Tap the button again to return to the previously selected white-light mode.

Torch

To illuminate larger skin areas or body cavities, tap the torch button (T) to activate an ultra-bright white non-polarized LED. Turn the main button (M) to adjust torch brightness.

Dermoscopic Brightness Adjustment

To adjust the brightness of the white dermoscopic LEDs, hold the torch button (T) and simultaneously turn the main button (M). While in UV or PigmentBoost mode, push & hold the UV (or PB) button and turn the main button to adjust the respective brightness. The indicator bar (IB) reflects the current brightness level during the adjustment.

Eyepiece

For optimal viewing affix the included eyepiece (EP) at the extension ring (ER).

Smartphone Dermoscopy

For dermoscopy using a smartphone or tablet, securely fasten the MagnetiConnect clamp adapter (MCC) to your mobile device, ensuring concentric alignment with its main camera. Attach your DL5 to the MCC ring. Prior to taking images, extend the spacer (S) to the "0" position, and wipe the glass contact plate (CP) clean.

Removing the Contact Plate

Turn the glass contact plate (CP) counterclockwise to detach, turn it clockwise to reattach.

Ruler

The ruler (R) is magnetically attached to the handle. Press down in the middle of the ruler and remove it to measure skin lesions.

IceCap®

To support your infection control measures, snap one of the included disposable IceCaps (IC) over the installed faceplate (CP). To remove and dispose, simply pull it off.

Battery and Charging

CAUTION: This device uses a special 3.7V 3000mAh lithium ion battery, which can only be purchased from DermLite or from an authorized DermLite dealer. Do not under any circumstances use another battery other than the one designed for this unit.

After hundreds of uses the battery will deteriorate, which may result in reduced capacity and/or lithium-ion cell expansion. Monitor signs of a deteriorated battery which may include reduced battery life, unexpected shutdowns, erratic behavior, or sudden power loss. If observed, stop use of the device and do not charge the battery. Replace the battery and dispose of the original in accordance with local regulations.

This device is equipped with a four-level Charge Indicator (CI). When the unit is turned on and fully charged, all four LEDs light up. When less than 75% of battery life remains, three LEDs are illuminated. If more than half the battery is drained, two LEDs are on, while a single LED indicates that less than 25% of battery capacity remains. To charge your device, connect the supplied USB-C to USB cable to the Charging Port (PP) and any IEC 60950-1 compliant (5V) USB port. The Charge Indicator (CI) pulses to indicate charging, with the number of pulsing LEDs corresponding with charge level. When charging is complete, all four indicator LEDs illuminate. After years of use, you may wish to re-place the battery, which is only available directly from DermLite or an authorized DermLite dealer.

After hundreds of uses the battery will deteriorate resulting in reduced capacity and/or lithium-ion cell expansion. Monitor for signs of a deteriorated battery such as reduced battery life, unexpected shutdowns, erratic behavior, or sudden power loss. If observed, stop use of the device and do not charge the battery. Replace the battery and dispose of the original in accordance with local regulations. To

change the battery (B), pull off the dial (D) by grabbing it at the fingernail notch, unscrew the battery cover screw (CS) using the tool supplied with each DL5 replacement battery, and remove the battery cover (BC) by sliding it back. Disconnect the small white battery plug (BP) and remove the battery (B). Insert a new battery, reconnect the battery plug, reattach the battery cover (BC), secure it with the cover screw (CS), and push the dial (D) in until it snaps into place.

Charging Base

To charge your DL5 using the charging base, attach the smaller (USBC) end of the supplied USB cable to the power port (PO) on the back of the charging base (CB), and the larger (USB) end to any IEC 60950-1 or IEC62368-1 compliant (5V) USB charger. Place your DL5 into the charging base, with the contact plate (CP) facing towards the charging base. The charging base may also be used for IceCap storage.

Troubleshooting

Please check www.dermite.com for the most current troubleshooting information. If your device requires servicing, visit www.dermite.com/service or contact your local DermLite dealer.

Care and Maintenance

CAUTION: No modification of this equipment is allowed. Your device is designed for trouble-free operation. Repairs shall be made only by qualified service personnel.

Cleaning

The exterior of your device, except the optical parts, may be wiped clean with isopropyl alcohol (70% vol.) prior to use on a patient. The lens should be treated as high-quality photographic equipment and should be cleaned with standard lens cleaning equipment and protected from harmful chemicals. Do not use abrasive material on any part of the equipment or immerse the device in liquid. Do not autoclave.

Warranty: 5 years for parts and labor. The battery is warranted for 1 year.

Disposal

This device contains electronics and a lithium-ion battery that must be separated for disposal and may not be disposed of with general household waste. Please observe local disposal regulations.

This set includes:

DermLite DL5 (16 white LEDs, 4 UV LEDs, 4 PigmentBoost LEDs, 1 white Torch LED, 32 mm lens system with 10x magnification, variable polarization system, retractable spacer, removable faceplate with 10 mm reticle, steel ruler), leather belt case, USB charging cable, charging base, eyepiece, MCC mobile device adapter, plastic belt holster (H), 5 IceCaps, microfiber cloth.

Technical Description

Visit www.dermite.com/technical or contact your local DermLite dealer.

ИНСТРУКЦИИ

Предназначение

Това устройство е предназначено за медицински цели за осветяване на телесни повърхности. Използва се за неинвазивно визуално изследване на непъкнатата кожа.

Този продукт, работещ с батерия, е предназначен за външен преглед само в рамките на професионални здравни заведения от медицински специалисти.

Проверете правилната работа на уреда преди употреба! Не използвайте устройството, ако има видими признаци на повреда, неизправност или устройството работи по начин, който не е в съответствие с описаното в тази инструкция за употреба.

ВНИМАНИЕ: Не гледайте директно в LED светлината. Пациентите трябва да затворят очите си по време на прегледи.

В случай на сериозен инцидент с използването на това устройство, незабавно уведомете DermLite и, ако това се изисква от местните разпоредби, вашият национален здравен орган.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте устройството в пожарна или взривоопасна зона (напр. Богата на кислород среда).

Внимание: Не гледайте директно на UV светлина.

ВНИМАНИЕ: Този продукт съдържа магнити. Не използвайте в близост до пейсмейкъри или други магнитно чувствителни устройства или елементи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт може да ви изложи на химикали, включително метилхлорид и шестовалентен хром, за които е известно, че в Калифорния причиняват рак или репродуктивна токсичност. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.

Електромагнитна съвместимост

Това устройство отговаря на изискванията за ниво на емисии и имунитет по ЕМС на стандарта IEC 60601-1-2: 2014.

Емисионните характеристики на това оборудване го правят подходящ за използване в професионална здравна среда, както и в жилищна среда (CISPR 11 клас Б). Това оборудване предлага адекватна защита на радиокомуникационната услуга, може да се наложи потребителят да предприеме мерки за смекчаване, като например преместване или преориентиране на оборудването. **ВНИМАНИЕ:** Използването на това оборудване, съседно или подредено с друго оборудване, трябва да се избягва, защото това може да доведе до неправилна работа. Ако е необходимо такова използване, това оборудване и другото оборудване трябва да се наблюдават, за да се провери дали работят нормално.

ВНИМАНИЕ: Използването на аксесоари, различни от тези, предоставени от производителя на това оборудване, може да доведе до повишени електромагнитни емисии или понижен електромагнитен имунитет на това оборудване и да доведе до неправилна работа.

ВНИМАНИЕ: Преносимите радиочестотни предаватели трябва да се използват не по-малко от 30 см (12 инча) към козата и да е част от устройството. В противен случай може да се влоши работата на това оборудване.

Не използвайте това устройство по време на магнитен резонанс (MRI) или в среда с MRI.

ВАЖНО: Преди първоначална употреба, моля, заредете вътрешната литиево-йонна батерия. Бижте "Батерия и зареждане" за подробности.

DermLite DL5 е съвместим със смартфон доквен дерматоскоп с 10-кратно увеличение за визуализиране на кожни структури с помощта на променлива поляризирана светлина и UV светлина.

Дръжте вашия DermLite DL5, като светодиодите са насочени по посока на лезията, която ще се изследва, на приблизително 12 mm над кожата. Натиснете главния превключвател (M), за да включите устройството в кръстосано поляризиран режим. Погледнете през обектива и преместете устройството по-близо или по-далеч от кожата, за да фокусирате изображението. За дермоскопия с контакт с кожата, завъртете диска за фокусиране (FD), за да удължите дистанционера (S) и да фокусирате изображението. Натиснете и задръжте главния превключвател (M) за около 1 секунда, за да изключите устройството. За да пести енергия, устройството автоматично се изключва след 3 минути.

Променлива поляризация

Докоснете главния бутон (M), за да превключите между кръстосано поляризирано и неполяризирано осветление. Завъртете главния бутон, за да преминете през диапазона от 9 поляризационни настройки, от кръстосано поляризирана през неполяризирана до паралелно поляризирана светлина. Индикаторната лента (IS) отразява текущото състояние на поляризация, докато "X" означава кръстосана поляризация, "0" представлява неполяризирана, а "=" означава паралелна поляризация.

PigmentBoost®

Докато бялата светлина е активна, докоснете (PB), за да активирате оранжевото осветление PigmentBoost в допълнение към бялата светлина. Индикаторният светодиод до бутона PB

(PB) ще светне. Докоснете отново, за да деактивирате.

UV режим

За да визуализирате флуоресциращи структури, докоснете бутон UV (UV), за да активирате светодиоди с дължина на вълната 365 nm. Индикаторният светодиод до UV бутон (UV) ще светне. Докоснете отново бутона, за да се върнете към предварително избрания режим на бяла светлина.

Фенерче

За да осветите по-големи кожни участъци или телесни кухини, докоснете бутона на фенерчето (T), за да активирате ултраярък бял неполяризиран светодиод. Завъртете главния ключ (M), за да регулирате яркостта на фенерчето.

Дермоскопска настройка на яркостта

За да регулирате яркостта на белите дермоскопични светодиоди, задръжте бутона на фенерчето (T) и едновременно с това завъртете главния ключ (M). Докато сте в режим UV или PigmentBoost, натиснете и задръжте бутона UV (или PB) и завъртете главния превключвател, за да регулирате съответната яркост. Индикаторната лента (IB) отразява текущото ниво на яркост по време на настройката.

Окуляр

За оптимално гледане прикрепете включения окуляр (EP) към пръстена за аксесоари (ER).

Дермоскопия на смартфон

За дермоскопия с помощта на смартфона или таблет, закрепете здраво адаптера за скоба MagnetConnect (MCC), концентрично подравнен върху основната камера на вашето мобилно устройство. Прикрепете вашия DL5 към MCC пръстена. Преди да правите изображения, разтегнете дистанционера (S) до позиция „0“ и избършете стъклената контактна пластина (CP) чиста.

Премахване на контактната пластина

Завъртете стъклената контактна пластина (CP) обратно на часовниковата стрелка, за да я отделите, завъртете я по посока на часовниковата стрелка, за да я поставите отново.

Владетел

Линийката (R) е магнитно прикрепена към дръжката. Натиснете надолу в средата на линейката и я отстранете, за да измерите кожните лезии.

IceSap®: За да подкрепите вашите мерки за контрол на инфекцията, щракнете едно от включените за еднократна употреба IceCaps (IC) върху инсталираната лъцева плоча (CP). За да го извадите и изхвърлите, просто го издърпайте.

Батерия и зареждане

ВНИМАНИЕ: Това устройство използва специална 3,7 V 670 mAh литиево-йонна батерия, която може да бъде закупена само от DermLite или от оторизиран дилър на DermLite. При никакви обстоятелства не използвайте друга батерия, различна от предназначенията за това устройство.

След стотици употреби батерията ще се влоши, което може да доведе до намален капацитет и/или разширяване на литиево-йонните клетки. Наблюдавайте признаци на влошена батерия, които могат да включват намален живот на батерията, неочаквани изключения, непостоянно поведение или внезапна загуба на зареждане. Ако се наблюдава, спрете да използвате устройството и не зареждайте батерията. Сменете батерията и изхвърлете оригинала в съответствие с местните разпоредби. Това устройство е оборудвано с четиристепенен индикатор за зареждане (CI). Когато устройството е включено и напълно заредено, всички четири светодиода светват. Когато остане по-малко от 75% от живота на батерията, три светодиода светват. Ако е изтощена повече от половината батерия, светват два светодиода, докато един светодиод показва, че остава по-малко от 25% от капацитета на батерията. За да зареждате устройството си, свържете предоставения USB-C към USB кабел към порта за зареждане (PP) и всеки USB порт, съвместим с IEC 60950-1 (5V). Индикаторът за зареждане (CI) импулсира, за да посочи зареждането, като броят на импулсите светодиоди съответства на нивото на зареждане. Когато зареждането приключи, всички четири индикаторни светодиода светят. След години употреба може да пожелаете да поставите отново батерията, която е достъпна директно от DermLite или от оторизиран дилър на DermLite.

След стотици употреби батерията ще се влоши, което ще доведе до намален капацитет и/или разширяване на литиево-йонните клетки. Наблюдавайте за признаци на влошена батерия, като намален живот на батерията, неочаквани изключения, непостоянно поведение или внезапна загуба на зареждане. Ако се наблюдава, спрете да използвате устройството и не зареждайте батерията. Сменете батерията и изхвърлете оригинала в съответствие с местните разпоредби. За да смените батерията (B), издърпайте диска (D), като го хванете в жлеба за нокътя, развийте винта на капака на батерията (CS) с помощта на инструмента, доставен с всяка резервна батерия DL5, и отстранете капака на батерията (BC). Изключете малкия бял щепсел на батерията (BP) и извадете батерията (B). Поставете нова батерия, свържете отново щепсела на батерията, поставете отново капака на батерията (BC), закрепете го с винта на капака (CS) и натиснете диска (D), докато щракне на място.

База за зареждане

За да заредите своя DL5 с помощта на зареждащата база,

прикрепете по-малкия (USBC) край на предоставения USB кабел към захранващия порт (PO) на гърба на зареждащата база (CB) и по-големия (USB) край към всеки IEC 60950-1 или Съвместимо с IEC62368-1 (5V) USB зарядно устройство. Поставете своя DL5 в основата за зареждане, като контактната пластина (CP) е обръната към основата за зареждане. Базата за зареждане може да се използва и за съхранение на IceSap.

Отстраняване на неизправности: Моля, проверете www.dermLite.com за най-актуална информация за отстраняване на проблеми. Ако вашето устройство изисква обслужване, посетете www.dermLite.com/service или се свържете с вашия местен DermLite дилър.

Грижи и поддръжка

ВНИМАНИЕ: Не се допускат модификации на това оборудване. Вашето устройство е проектирано за безпроблемна работа. Ремонтите трябва да се извършват само от квалифициран сервизен персонал.

Преди употреба върху пациент, външната част на вашето устройство (с изключение на оптичните части) може да се избърше чисто с изопропилов алкохол (70 обемни процента). Обективът трябва да се третира като висококачествено фотографско оборудване и да се почиства със стандартно оборудване за почистване на обектива и да се защитава от вредни химикали. Не използвайте абразивни почистващи препарати и не потапяйте устройството в течност. Не автоклавирайте.

Гаранция: 5 години за части и труд. Батерията е с гаранция за 1 година.

Изхвърляне: Това устройство съдържа електроника и литиево-йонна батерия, които трябва да бъдат отделени за изхвърляне и да не бъдат изхвърляни с битови отпадъци. Моля, спазвайте местните разпоредби за изхвърляне.

Този комплект включва:

DermLite DL5 (16 бели LED, 4 UV LED, 4 PigmentBoost LED, 1 бял Torch LED, 32 mm система от лещи с 10x увеличение, система с променлива поляризация, прибиращ се дистанционер, подвижна лъцева плоча с 10 mm мрежа, стоманена линейка), кожен калъф за колан, USB кабел за зареждане, база за зареждане, окуляр, MCC адаптер за мобилно устройство, пластмасов кобур за колан (H), 5 ледени качаки, микрофибърна кърпа.

Техническо описание: Посетете www.dermLite.com/technical или се свържете с местния дилър на DermLite.

Instrukcije

Namjeravanu upotrebu

Ovaj uređaj je namijenjen u medicinske svrhe za osvjetljavanje tjelesnih površina. Koristi se za neinvazivni vizuelni pregled netaknute kože.

Ovaj proizvod pogonjen na baterije dizajniran je za vanjski pregled samo u okviru zdravstvenih ustanova od strane medicinskih stručnjaka.

Prije upotrebe provjerite ispravan rad uređaja! Nemojte koristiti uređaj ako postoje vidljivi znakovi oštećenja, kvara ili ako uređaj radi na način koji nije u skladu s onim što je opisano u ovim uputama za upotrebu.

OPREZ: Ne gledajte direktno u LED lampicu. Pacijenti moraju zatvoriti oči tokom pregleda.

U slučaju ozbiljnog incidenta s korištenjem ovog uređaja, odmah obavijestite DermLite i, ako to zahtijevaju lokalni propisi, vaše nacionalno zdravstveno tijelo.

OPREZ: Ne koristite uređaj u zoni opasnosti od eksplozije (npr. Okoline bogate kisikom).

Opaz: Ne gledajte direktno u UV svjetlost.

UPOZORENJE: Ovaj proizvod sadrži magnete. Ne koristite u blizini pejsmejera ili drugih magnetno osjetljivih uređaja ili predmeta.

UPOZORENJE: Ovaj proizvod može vas izložiti hemikalijama, uključujući metilen hlorid i šestovalentni hrom, za koje je država Kalifornija poznato da uzrokuju rak ili reproduktivnu toksičnost. Za više informacija posjetite www.P65Warnings.ca.gov.

Elektromagnetska kompatibilnost

Ovaj uređaj udovoljava zahtjevima za EMC emisije i imunitet standarda IEC 60601-1-2: 2014. Emisijske karakteristike ove opreme čine je pogodnom za upotrebu u profesionalnom zdravstvenom okruženju i u stambenom okruženju (CISPR 11 Klasa B). Ova oprema nudi odgovarajuću zaštitu radio-komunikacijskim uslugama. U rijetkom slučaju ometanja radiokomunikacijske usluge, korisniku će možda trebati poduzeti mjere ublažavanja, poput premještanja ili preusmjerenja opreme. **UPOZORENJE:** Treba izbjegavati upotrebu ove opreme koja je u blizini ili složenu s drugom opremom, jer to može rezultirati nepravilnim radom. Ako je takva upotreba potrebna, tu opremu i drugu opremu treba promatrati kako bi se provjerilo da li normalno rade. **UPOZORENJE:** Upotreba dodatne opreme osim one koju je dao proizvođač ove opreme može rezultirati povećanom elektromagnetskom emisijom ili smanjenjem elektromagnetske otpornosti ove opreme i rezultirati nepravilnim radom.

UPOZORENJE: Prijenosni RF odašiljači ne smiju se koristiti na udaljenosti većoj od 30 cm od bilo kojeg dijela uređaja. U suprotnom, može doći do degradacije performansi ove opreme. Nemojte koristiti ovaj uređaj tokom snimanja magnetnom rezonancom (MRI) ili u MRI okruženju.

VAŽNO: Prije početne upotrebe, napunite unutarnju litijum-jonsku bateriju. Pogledajte "Baterija i punjenje" za detalje.

DermLite DL5 je džepni dermatoskop kompatibilan sa pametnim telefonima sa 10x uvećanjem za vizualizaciju struktura kože pomoću varijabilne polarizirane svjetlosti i UV osvjetljenja.

Držite svoj DermLite DL5, sa LED diodama usmjerenim u smjeru lezije koju treba pregledati, otprilike 12 mm iznad kože. Pritisnite glavni prekidač (M) da biste uključili uređaj u unakrsno polariziranom načinu rada. Pogledajte kroz objektiv i pomaknite uređaj bliže ili dalje od kože da biste fokusirali sliku. Za dermoskopiju sa kontaktom s kožom, rotirajte toččić za fokusiranje (FD) da proširite odstožnik (S) i fokusirate sliku. Pritisnite i držite glavni prekidač (M) oko 1 sekunde da isključite uređaj. Radi uštede energije, jedinica se automatski isključuje nakon 3 minute.

Varijabilna polarizacija

Dodirnite glavno dugme (M) za prebacivanje između unakrsno polarizovanog i nepolarizovanog osvjetljenja. Okrenite glavno dugme da biste se kretali kroz raspon od 9 postavki polarizacije, od unakrsno polariziranog preko nepolariziranog do paralelno polariziranog svjetla. Indikatorska traka (IS) odražava trenutni status polarizacije, dok "X" označava unakrsno polarizovano, "0" predstavlja

nepolarizovano, a "=" označava paralelnu polarizaciju.

PigmentBoost®

Dok je bijelo svjetlo aktivno, dodirnite (PB) da aktivirate PigmentBoost osvjetljenje narandžaste boje uz bijelo svjetlo. LED indikator pored dugmeta PB (PB) će zasvijetliti. Dodirnite ponovo da deaktivirate.

UV mod

Za vizualizaciju fluorescentnih struktura, dodirnite dugme UV (UV) da aktivirate LED diode s talasnom dužinom od 365 nm. LED indikator pored UV dugmeta (UV) će zasvijetliti. Ponovo dodirnite dugme da se vratite na prethodno izabrani režim belog svjetla.

Lampa

Za osvjetljavanje većih površina kože ili tjelesnih šupljina, dodirnite dugme svjetiljke (T) da aktivirate ultra-sjajnu bijelu nepolariziranu LED diodu. Okrenite glavni prekidač (M) za podešavanje svjetline svjetiljke.

Dermoskopsko podešavanje svjetline

Za podešavanje svjetline bijelih dermoskopskih LED dioda, držite tipku svjetiljke (T) i istovremeno okrenite glavni prekidač (M). Dok ste u UV ili PigmentBoost modu, pritisnite i držite dugme UV (ili PB) i okrenite glavni prekidač da podesite odgovarajuću svjetlinu. Traka indikatora (IB) odražava trenutni nivo svjetline tokom podešavanja.

Okular

Za optimalno gledanje pričvrstite uključeni okular (EP) na prsten za dodatnu opremu (ER).

Dermoskopija na pametnom telefonu

Za dermoskopiju pomoću pametnog telefona ili tableta, sigurno pričvrstite MagnetiConnect adapter za stezaljke (MCC) koncentrično postavljen preko glavne kamere vašeg mobilnog uređaja. Pričvrstite svoj DL5 na MCC prsten. Prije snimanja slika, proširite odstožnik (S) na poziciju "0" i obrišite staklenu kontaktnu ploču (CP).

Uklanjanje kontaktne ploče

Okrenite staklenu kontaktnu ploču (CP) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste je odvojili, okrenite je u smjeru kazaljke na satu da biste je ponovo pričvrstili.

Vladar

Lenjir (R) je magnetski pričvršćen za dršku. Pritisnite sredinu ravnala i uklonite ga kako biste izmjerili kožne lezije.

IceCap®: Da biste podržali svoje mjere kontrole infekcije, prebacite jedan od uključenih IceCaps za jednokratnu upotrebu (IC) preko instalirane prednje ploče (CP). Da biste je uklonili i odložili, jednostavno je izvucite.

Baterija i punjenje

OPREZ: Ovaj uređaj koristi posebnu litijum-jonsku bateriju od 3,7 V od 670 mAh, koja se može kupiti samo od DermLite-a ili od ovlaštenog DermLite distributera. Ni u kom slučaju nemojte koristiti drugu bateriju osim one dizajnirane za ovu jedinicu.

Nakon stotina upotreba baterija će se pokvariti, što može rezultirati smanjenim kapacitetom i/ili proširenjem litijum-jonske ćelije. Nadgledajte znakove dotrajale baterije koji mogu uključivati smanjen vijek trajanja baterije, neočekivana isključivanja, neredovno ponašanje ili iznenadni gubitak energije. Ako primetite, prestanite da koristite uređaj i ne punite bateriju. Zamijenite bateriju i zbrinite original u skladu s lokalnim propisima. Ovaj je uređaj opremljen indikatorom punjenja na četiri nivoa (CI). Kad je jedinica uključena i potpuno napunjena, zasvetle se sve četiri LED diode. Kad ostane manje od 75% trajanja baterije, osvjetljavaju se tri LED. Ako se isprazni više od polovine baterije, dvije su LED lampice, dok jedna LED indikator pokazuje da ostaje manje od 25% kapaciteta baterije. Da biste napunili svoj uređaj, priključite isporučeni USB-C na USB kabl na ulaz za punjenje (PP) ili bilo koji USB port koji je u skladu sa IEC 60950-1 (5 V). Indikator naboja (CI) pulsira da bi naznačio punjenje, pri čemu broj pulsirajućih LED dioda odgovara nivou napunjenosti. Kad je punjenje završeno, sve četiri LED indikatorske lampice svijetle. Nakon godina korištenja, možda želite ponovo postaviti bateriju, koja je dostupna samo direktno od DermLite ili od ovlaštenog distributera DermLite. Nakon stotina korištenja baterija će se pokvariti što će rezultirati smanjenim kapacitetom i/ili proširenjem litijum-jonske ćelije. Nadgledajte znakove dotrajalo

baterije kao što su smanjeni vijek trajanja baterije, neočekivana isključivanja, nepravilno ponašanje ili iznenadni gubitak energije. Ako primetite, prestanite da koristite uređaj i ne punite bateriju. Zamijenite bateriju i zbrinite original u skladu s lokalnim propisima. Da biste promijenili bateriju (B), povucite toččić (D) tako što ćete ga uhvatiti za ured za nokte, odvrnuti vijak poklopa baterije (CS) pomoću alata koji se isporučuje uz svaku zamjensku bateriju DL5 i skinite poklopac baterije (BC). Odvojite mali bijeli utikač baterije (BP) i uklonite bateriju (B). Umetnite novu bateriju, ponovo spojite utikač baterije, ponovo pričvrstite poklopac baterije (BC), pričvrstite ga vijkom poklopa (CS) i gurnite toččić (D) dok ne sklopcne na svoje mjesto.

Baza za punjenje

Za punjenje DL5 pomoću baze za punjenje, priključite mali (USBC) kraj isporučene USB kabela na priključak za napajanje (PO) na stražnjoj strani baze za punjenje (CB), a veći (USB) kraj na bilo koji IEC 60950-1 ili USB punjač (5V) usklađen sa IEC62368-1. Stavite svoj DL5 u bazu za punjenje, tako da je kontaktna ploča (CP) okrenuta prema bazi za punjenje. Baza za punjenje se takođe može koristiti za skladištenje IceCap-a.

Otklanjanje problema: Molimo provjerite www.derm-lite.com za najnovije informacije o rješavanju problema. Ako vam uređaj treba servisiranje, posjetite www.derm-lite.com/service ili se obratite lokalnom prodavaču DermLite.

Njega i održavanje

UPOZORENJE: Nije dopuštena nikakva izmjena ove opreme.

Vaš je uređaj dizajniran za nesmetan rad. Popravke smije izvršiti samo kvalificirano osoblje.

Prije upotrebe na pacijentu, vanjsku stranu vašeg uređaja (osim optičkih dijelova) može se obrisati izopropilnim alkoholom (70 vol.%). Objektiv treba tretirati kao visokokvalitetnu fotografsku opremu i treba ga očistiti standardnom opremom za čišćenje objektivna i zaštititi od štetnih kemikalija. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje i ne potapajte uređaj u tečnost. Ne autoklavirajte.

Garancija: 5 godina za dijelove i rad. Garancija na bateriju je 1 godina.

Odlaganje: Ovaj uređaj sadrži elektroniku i litijum-jonsku bateriju koji se moraju odvojiti za odlaganje i ne mogu se odlagati sa kućnim otpadom. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju.

Ovaj set uključuje:

DermLite DL5 (16 bijelih LED-a, 4 UV LED-a, 4 PigmentBoost LED-a, 1 bijeli Torch LED, 32 mm sistem sočiva sa povećanjem od 10x, sistem varijabilne polarizacije, odstožnik koji se može uvlačiti, prednja ploča koja se može ukloniti sa končanicom od 10 mm, čelični lenjir), kožna futrola za remen, USB kabl za punjenje, baza za punjenje, okular, MCC adapter za mobilni uređaj, plastična futrola za pojas (H), 5 IceCaps-a, krpa od mikrovlakana.

Tehnički opis: Posjetite www.derm-lite.com/technical ili kontaktirajte lokalnog DermLite prodavača.

Instrukce

Zamýšlené použití

Toto zařízení je určeno pro lékařské účely k osvětlování povrchů těla. Používá se pro neinvazivní vizuální vyšetření neporušené kůže.

Tento produkt napájený z baterie je určen k externímu vyšetření pouze v rámci zdravotnických zařízení profesionálních zdravotníků.

Před použitím zkontrolujte správnou funkci zařízení! Zařízení nepoužívejte, pokud jsou na něm viditelné známky poškození, závady nebo pokud zařízení funguje způsobem, který není v souladu s tím, co je popsáno v tomto návodu k použití.

UPOZORNĚNÍ: Nedívejte se přímo do LED světla. Během vyšetření musí pacienti zavřít oči.

V případě vážného incidentu s používáním tohoto zařízení neprodleně informujte DermLite a, pokud to vyžadují místní předpisy, váš národní zdravotní úřad.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte zařízení v ohni nebo v prostředí s bezpečným výbuchem (např. v prostředí bohatém na kyslík).

Upozornění: Nedívejte se přímo do UV světla.

VAROVÁNÍ: Tento produkt obsahuje magnety. Nepoužívejte v blízkosti kardiostimulátorů nebo jiných magneticky citlivých zařízení nebo předmětů.

VAROVÁNÍ: Tento výrobek vás může vystavit chemikáliím, včetně methylenchloridu a šestimocného chrómu, o nichž je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu nebo reprodukční toxicitu. Další informace najdete na www.P65Warnings.ca.gov.

Elektromagnetická kompatibilita

Toto zařízení splňuje požadavky na úroveň EMC emisí a odolnosti podle normy IEC 60601-1-2: 2014. Díky emisním charakteristikám je toto zařízení vhodné pro použití v profesionálním zdravotnickém prostředí i v rezidenčním prostředí (CISPR 11 třída B). Toto zařízení poskytuje odpovídající ochranu radiokomunikační službě. Ve vzácných případech rušení radiokomunikační služby může být nutné, aby uživatel přijal opatření ke zmírnění, například přemístění nebo přesměrování zařízení.

VAROVÁNÍ: Vyhnete se použití tohoto zařízení v sousedství nebo naložení s jinými zařízeními, protože by to mohlo mít za následek nesprávný provoz. Pokud je takové použití nezbytné, mělo by se toto zařízení a ostatní zařízení sledovat, aby se ověřilo, že fungují normálně.

VAROVÁNÍ: Použití jiného příslušenství, než jaké poskytuje výrobce tohoto zařízení, může vést ke zvýšeným elektromagnetickým emisím nebo ke snížení elektromagnetické imunity tohoto zařízení a ke špatnému fungování.

VAROVÁNÍ: Přenosné RF vysílání by se neměly používat blíže než 30 cm (12 palců) k žádné části zařízení. Jinak by to mohlo dojít ke snížení výkonu tohoto zařízení. Nepoužívejte toto zařízení během zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) nebo v prostředí MRI.

DŮLEŽITÉ: Před prvním použitím nabijte interní lithium-iontovou baterii. Podrobnosti najdete v části „Baterie a nabíjení“.

DermLite DL5 je kapesní dermatoskop kompatibilní s chytrým telefonem s 10násobným zvětšením pro vizualizaci kožních struktur pomocí proměnného polarizovaného světla a UV osvětlení.

Držte DermLite DL5 s LED diodami nasměrovanými ve směru vyšetřované léze, přibližně 12 mm nad kůží. Stisknutím hlavního vypínače (M) zapnete zařízení v režimu křížové polarizace. Dívajte se přes objektiv a přiblížte zařízení blíže nebo dále od pokožky, abyste zaostřili obraz. Pro dermatoskop s kontaktem s kůží otočte zaostřovací kolečkem (FD), abyste vysunuli distanční vložku (S) a zaostřili obraz. Stisknutím a podržením hlavního vypínače (M) po dobu asi 1 sekundy zařízení vypnete. Pro úsporu energie se jednotka po 3 minutách automaticky vypne.

Variabilní polarizace

Klepnutím na hlavní tlačítko (M) můžete přepínat mezi křížově polarizovaným a nepolarizovaným osvětlením. Otáčením hlavního tlačítka můžete procházet rozsahem 9 nastavení polarizace, od křížově polarizovaného přes nepolarizované až po paralelně polarizované světlo. Indikátorový proužek (IS) odráží aktuální stav polarizace,

zatímco „X“ znamená křížově polarizované, „0“ znamená nepolarizované a „=“ znamená paralelně polarizaci.

PigmentBoost®

Když je aktivní bílé světlo, klepnutím na (PB) aktivujete kromě bílého světla také oranžové osvětlení PigmentBoost. Kontrolka LED vedle tlačítka PB (PB) se rozsvítí. Dalším klepnutím deaktivujete.

UV režim

Chcete-li vizualizovat fluorescenční struktury, klepněte na tlačítko UV (UV) pro aktivaci LED se vlnovou délkou 365 nm. Kontrolka LED vedle tlačítka UV (UV) se rozsvítí. Dalším klepnutím na tlačítko se vrátíte do dříve zvoleného režimu bílého světla.

Svítilna

Chcete-li osvětlit větší oblasti pokožky nebo tělesné dutiny, klepněte na tlačítko svítilny (T) a aktivujte ultrazvukovou bílou nepolarizovanou LED. Otočte hlavním vypínačem (M) pro nastavení jasů svítilny.

Dermoskopické nastavení jasů

Pro nastavení jasů bílých dermatoskopických LED podržte tlačítko svítilny (T) a současně otočte hlavním vypínačem (M). V režimu UV nebo PigmentBoost stiskněte a podržte tlačítko UV (nebo PB) a otočením hlavního vypínače nastavte příslušný jas. Lišta indikátoru (IB) odráží aktuální úroveň jasů během nastavování.

Okulár

Pro optimální sledování připevněte přiložený okulár (EP) na kroužek příslušenství (ER).

Dermoskopie smartphonu

Pro dermatoskopii pomocí smartphonu nebo tabletu bezpečně upevněte upínací adaptér MagnetiConnect (MCC) soustředně zarovnaný na hlavní fotoaparát vašeho mobilního zařízení. Připojte svůj DL5 ke kroužku MCC. Před pořízením snímků vysuňte distanční vložku (S) do polohy „0“ a oťete skleněnou kontaktní desku (CP).

Demontáž kontaktní desky

Otočte skleněnou kontaktní desku (CP) proti směru hodinových ručiček pro odpojení, otočte ve směru hodinových ručiček pro opětovné připojení.

Pravítko

Pravítko (R) je magneticky připevněno k rukojeti. Zatlačte na střed pravítka a sejměte jej, abyste změnili kožní léze.

IceCap®

Chcete-li podpořit opatření ke kontrole infekce, nasadte jeden z přiložených jednorázových IceCaps (IC) na nainstalovaný čelní panel (CP). Chcete-li ji odstranit a zlikvidovat, jednoduše ji vytáhněte.

Baterie a nabíjení

UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení používá speciální 3,7V 670mAh lithium-iontovou baterii, kterou lze zakoupit pouze u DermLite nebo u autorizovaného prodejce DermLite. Za žádných okolností nepoužívejte jinou baterii než tu, která je určena pro tento přístroj.

Po stovkách použití se baterie zhorší, což může mít za následek snížení kapacity a/nebo rozšíření lithium-iontových článků. Sledujte známky poškození baterie, které může zahrnovat sníženou životnost baterie, neočekávané vypnutí, nevyzpytatelné chování nebo náhlý výpadek napájení. Pokud si to všimnete, přestaňte zařízení používat a nenabíjejte baterii. Vyměňte baterii a původní zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Toto zařízení je vybaveno čtyřúrovňovým indikátorem nabíjení (CI). Když je jednotka zapnutá a plně nabitá, rozsvítí se všechny čtyři LED diody. Pokud zbývá méně než 75% výdrže baterie, svítí tři LED diody. Pokud je vybitá více než polovina baterie, svítí dvě LED diody, zatímco jedna LED indikuje, že zbývá méně než 25% kapacity baterie. Chcete-li zařízení nabít, připojte dodaný kabel USB-C k USB k nabíjecímu portu (PP) a ke každému portu USB kompatibilnímu s normou IEC 60950-1 (5V). Indikátor nabíjení (CI) pulzuje, aby indikoval nabíjení, s počtem pulzujících LED odpovídající úrovni nabití. Po dokončení nabíjení se rozsvítí všechny čtyři kontrolky. Po letech používání můžete chtít znovu vložit baterii, která je k dispozici pouze přímo od DermLite nebo autorizovaného prodejce DermLite.

Po stovkách použití se baterie zhorší, což povede ke snížení kapacity a/nebo rozšíření lithium-iontových článků. Sledujte známky poškození baterie, jako je snížená životnost baterie, neočekávané vypnutí, nevyzpytatelné chování nebo náhlá ztráta energie. Pokud si to všimnete,

přestaňte zařízení používat a nenabíjejte baterii. Vyměňte baterii a původní zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Chcete-li vyměnit baterii (B), stáhněte volič (D) tak, že jej uchopíte za zářez pro neht, odšroubujete šroub krytu baterie (CS) pomocí nástroje dodávaného s každou náhradní baterií DL5 a sejměte kryt baterie (BC). Odpojte malou bílou zástrčku baterie (BP) a vyjměte baterii (B). Vložte novou baterii, znovu připojte zástrčku baterie, znovu nasadte kryt baterie (BC), zajistěte jej šroubem krytu (CS) a zatlačte na kolečko (D), dokud nezapadne na místo.

Nabíjecí základna

Chcete-li nabíjet DL5 pomocí nabíjecí základny, připojte menší (USB) konec dodaného USB kabelu k nabíjecímu portu (PO) na zadní straně nabíjecí základny (CB) a větší (USB) konec k libovolné IEC 60950-1 nebo USB nabíječka (5V) vyhovující IEC62368-1. Umístěte DL5 do nabíjecí základny tak, aby kontaktní deska (CP) směřovala k nabíjecí základně. Nabíjecí základnu lze také použít pro skladování IceCap.

Odstraňování potíží: Nejnovější informace o odstraňování problémů naleznete na adrese www.derm-lite.com. Pokud vaše zařízení vyžaduje servis, navštivte stránku www.derm-lite.com/service nebo se obraťte na místního prodejce DermLite.

Péče a údržba

VAROVÁNÍ: Není dovoleno provádět žádné úpravy tohoto zařízení.

Vaše zařízení je navrženo pro bezproblémový provoz. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.

Před použitím na pacientovi může být zevnějšek zařízení (kromě optických částí) ořten čistým izopropylalkoholem (70% obj.). Čočka by měla být považována za vysoce kvalitní fotografické vybavení a měla by být čistěna standardním zařízením na čištění čoček a chráněna před škodlivými chemikáliemi. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani nepoufujte zařízení do kapaliny. Nepoužívejte autokláv.

Záruka: 5 let na díly a práci. Na baterii se vztahuje záruka na 1 rok.

Likvidace: Tento přístroj obsahuje elektroniku a lithium-iontovou baterii, které musí být pro likvidaci odděleny a nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci.

Tato sada obsahuje:

DermLite DL5 (16 bílých LED, 4 UV LED, 4 PigmentBoost LED, 1 bílá baterka LED, 32mm systém čoček s 10x zvětšením, variabilní polarizační systém, zasuvací distanční vložka, odnímatelná čelní deska s 10mm záměrným křížem, ocelové pravítko), kožené pouzdro na opasek, USB nabíjecí kabel, nabíjecí základna, okulár, adaptér pro mobilní zařízení MCC, plastové pouzdro na opasek (H), 5 IceCaps, hadičky z mikrovláknna.

Technický popis: Navštivte www.derm-lite.com/technical nebo se obraťte na místního prodejce DermLite.

Instruktioner

Anvendelsesformål

Denne enhed er beregnet til medicinske formål til at belyse kropsoverflader. Det bruges til ikke-invasiv visuel undersøgelse af intakt hud.

Dette batteridrevne produkt er kun beregnet til ekstern undersøgelse inden for professionelle sundhedsfaciliteter af medicinske fagfolk.

Kontroller, at enheden fungerer korrekt før brug! Brug ikke enheden, hvis der er synlige tegn på beskadigelse, fejlfunktion, eller hvis enheden fungerer på en måde, der ikke er i overensstemmelse med, hvad der er beskrevet i denne brugsanvisning.

Se ikke direkte ind i det røde LED lys. Patienten skal lukke øjnene i løbet af undersøgelsen.

I tilfælde af en alvorlig hændelse med brugen af denne enhed skal du omgående underrette DermLite og, hvis det kræves af lokale forskrifter, din nationale sundhedsmyndighed.

FORSIGTIG: Brug ikke enheden i et område med risiko for brand eller eksplosion (f.eks. iltmættet miljø).

Forsigtig: Se ikke direkte på UV-lys.

ADVARSEL: Denne enhed indeholder magneter. Må ikke anvendes i nærheden af pacemakere eller andre magnetisk følsomme enheder eller genstande.

ADVARSEL: Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder methylenchlorid og hexavalent krom, som staten Californien kender til at forårsage kræft eller reproduktionstoksicitet. For mere information, gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Denne enhed overholder kravene til EMC-emissioner og immunitet i standarden IEC 60601-1-2: 2014. Emissionsgenskaberne for dette udstyr gør det velegnet til brug i professionelt sundhedsmiljø såvel som i boligmiljø (CISPR 11 klasse B). Dette udstyr tilbyder tilstrækkelig beskyttelse til radiokommunikationstjeneste. I den sjældne tilfælde af interferens med radiokommunikationstjenesten kan brugeren muligvis træffe afhjælpende foranstaltninger, f.eks. Omflytning eller omorientering af udstyr. **ADVARSEL:** Brug af dette udstyr ved siden af eller stablet sammen med andet udstyr bør undgås, fordi det kan resultere i forkert betjening. Hvis en sådan brug er nødvendig, skal dette udstyr og det andet udstyr overholdes for at verificere, at de fungerer normalt.

ADVARSEL: Brug af andet tilbehør end dem, der leveres af producenten af dette udstyr, kan resultere i øgede elektromagnetiske emissioner eller nedsat elektromagnetisk immunitet af dette udstyr og føre til forkert betjening. **ADVARSEL:** Bærbare RF-sendere skal ikke bruges tættere end 30 cm til nogen del af enheden. Ellers kan nedbrydning af udstyrets ydelse resultere. Brug ikke denne enhed under magnetisk resonansbilleddannelse (MRI) eller i et MR-miljø.

Vigtigt: Før første ibrugtagning skal det indvendige litium-ionbatteri oplades. Se "batteri og opladning" for yderligere oplysninger.

DermLite DL5 er et smartphone-kompatibelt lommedermatologisk produkt med 10x forstørrelse til visualisering af hudstruktur-er ved hjælp af variabelt polariseret lys og UV-belysning.

Hold din DermLite DL5, med LED'erne rettet mod den læsion, der skal undersøges, cirka 12 mm over huden. Tryk på hovedafbryderen (M) for at tænde enheden i krydspolariseret tilstand. Kig gennem linsen, og flyt enheden tættere på eller længere væk fra huden for at fokusere billedet. Til dermoskopi med hudkontakt drejes fokushjulet (FD) for at forlænge afstandsstykket (S) og fokusere billedet. Tryk og hold hovedafbryderen (M) nede i ca. 1 sekund for at slukke for enheden. For at spare strøm slukker enheden automatisk efter 3 minutter.

Variabel polarisering

Tryk på hovedknappen (M) for at skifte mellem krydspolariseret og ikke-polariseret belysning. Drej på hovedknappen for at bevæge dig gennem rækken af 9 polarisationsindstillinger, fra krydspolariseret via ikke-polariseret til parallelpolariseret lys. Indikatorstrimlen (IS) afspejler den aktuelle polariseringsstatus, hvorimod "X" markerer krydspolariseret, "O" repræsenterer ikke-polariseret, og "=" står for parallel polarisering.

PigmentBoost®

Mens hvidt lys er aktivt, skal du trykke på (PB) for at aktivere den orangefarvede PigmentBoost-belysning ud over hvidt lys. Indikator-LED'en ved siden af PB-knappen (PB) vil lyse. Tryk igen for at deaktivere.

UV-tilstand

For at visualisere fluorescerende strukturer skal du trykke på UV-knappen (UV) for at aktivere LED'er med en bølgelængde på 365 nm. Indikator-LED'en ved siden af UV-knappen (UV) vil lyse. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til den tidligere valgte tilstand for hvidt lys.

Lommeløgt

For at belyse større hudområder eller kropshuler skal du trykke på lommeløgtknappen (T) for at aktivere en ultralyksstærk hvid ikke-polariseret LED. Drej hovedafbryderen (M) for at justere lommeløgtens lysstyrke.

Dermoskopisk lysstyrkejustering

For at justere lysstyrken på de hvide dermoskopiske LED'er skal du holde lommeløgtknappen (T) nede og samtidig dreje hovedkontakten (M). Mens du er i UV- eller PigmentBoost-tilstand, skal du trykke på UV-knappen (eller PB) og holde den nede og dreje hovedkontakten for at justere den respektive lysstyrke. Indikatorbjælken (IB) afspejler det aktuelle lysstyrkeniveau under justeringen.

Okular

For optimal visning fastgør det medfølgende magnetiske okular (EP) på tilbehørsringen (ER).

Smartphone dermoskopi

Til dermoskopi ved hjælp af en smartphone eller tablet skal du fastgøre MagnetiConnect-klemmeadapteren (MCC) koncentrisk på linje over din mobile enheds hovedkamera. Fastgør din DL5 til MCC-ringen. Før du tager billeder, skal du forlænge afstandsstykket (S) til positionen "0", og glaskontaktpladen (CP) tørrer af.

Fjernelse af kontaktpladen

Drej glaskontaktpladen (CP) mod uret for at afmontere, drej den med uret for at fastgøre den igen.

Lineal

Linealen (R) er magnetisk fastgjort til håndtaget. Tryk ned i midten af linealen og fjern den for at måle hudlæsioner.

Iskappe®

For at forebygge infektioner kan en af de medfølgende engangsiskapper (IC) lægges over den installerede frontplade (CP).

Batteri og opladning

FORSIGTIG: Denne enhed bruger et specielt 3,7V 670mAh lithium-ion-batteri, som kun kan købes hos DermLite eller hos en autoriseret DermLite-forhandler. Brug under ingen omstændigheder et andet batteri end det, der er designet til denne enhed.

Efter hundredvis af brug vil batteriet blive forringet, hvilket kan resultere i reduceret kapacitet og/eller lithium-ion celleudvidelse. Overvåg tegn på et forringet batteri, som kan omfatte reduceret batterilevetid, uventede nedlukninger, uregelmæssig adfærd eller pludseligt strømtab. Hvis det observeres, skal du stoppe brugen af enheden og ikke oplade batteriet. Udskift batteriet og bortskaft originalen i overensstemmelse med lokale regler.

Denne enhed er udstyret med en firetrins ladeindikator (CI). Når der er tændt for enheden, og den er fuldt opladet, lyser alle fire LED-lamper. Når der er under 75 % af batterilevetiden tilbage, lyser tre LED'er. Hvis over halvdelen af batteriet er brugt, er to LED'er tændt, mens en enkelt LED angiver, at der er under 25 % af batterikapaciteten tilbage.

For at oplade din enhed tilsluttes det medfølgende USB-C til-USB-kablet til ladeporten (PP) og alle IEC 60950-1 overensstemmende (5V) USB-porte.

Ladeindikatoren (CI) pulserer for at angive opladning med antallet af pulserende LED'er svarende til ladevæuet. Når opladning er færdig, lyser alle fire indikator-LED'er. Efter fuld opladning vil enheden have strøm til cirka 3-8 timers drift, afhængigt af det anvendte lysniveau.

Efter nogle års brug vil du måske ønske at udskifte batteriet, som kun kan fås hos DermLite eller en autoriseret DermLite-forhandler.

Efter hundredvis af brug vil batteriet forringes, hvilket resulterer i reduceret kapacitet og/eller lithium-ion celleudvidelse. Overvåg for tegn på et forringet batteri såsom reduceret batterilevetid, uventede nedlukninger,

uregelmæssig adfærd eller pludseligt strømtab. Hvis det observeres, skal du stoppe brugen af enheden og ikke oplade batteriet. Udskift batteriet og bortskaft originalen i overensstemmelse med lokale regler. For at udskifte batteriet (B), skal du trække drejknappen (D) af ved at tage fat i fingerneglehakket, skrue batteridækslets skrue (CS) af ved hjælp af det værktøj, der følger med hvert DL5-erstatningsbatteri, og fjerne batteridækslet (BC). Frakobl det lille hvide batteristik (BP), og fjern batteriet (B). Indsæt et nyt batteri, sæt batteristikket i igen, sæt batteridækslet (BC) på igen, fastgør det med dækslet (CS), og skub drejknappen (D) ind, indtil det klikker på plads.

Opladningsbase

For at oplade din DL5 ved hjælp af opladningsbasen skal du tilslutte den mindre (USB) ende af det medfølgende USB-kabel til strømporten (PO) på bagsiden af opladningsbasen (CB), og den større (USB) ende til enhver IEC 60950-1 eller IEC62368-1 kompatibel (5V) USB-oplader. Placer din DL5 i opladningsbasen med kontaktpladen (CP) vendt mod opladningsbasen. Ladebasen kan også bruges til IceCap-opbevaring.

Fejlfinding

Se www.derm-lite.com for de mest aktuelle oplysninger om fejlfinding. Hvis enheden har brug for service, besøg www.derm-lite.com/service eller kontakt din lokale DermLite forhandler.

Pløje og vedligeholdelse

ADVARSEL: Ingen ændringer af dette udstyr er tilladt. Din enhed er designet til problemfri drift. Reparationer må kun udføres af kvalificeret servicepersonale.

Før det bruges på en patient, kan det ydre af din enhed (undtagen de optiske dele) aftørres med isopropylalkohol (70% vol.). Objektivet skal behandles som fotografisk udstyr i høj kvalitet og skal rengøres med standard linserengøringsudstyr og beskyttes mod skadelige kemikalier. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller nedsænk enheden i væske. Autoklaver ikke.

Garanti: 5 år for dele og arbejde. Batteriet garanteres i 1 år.

Bortskaffelse

Denne enhed indeholder elektronik og et litium-ionbatteri, som skal adskilles inden bortskaffelsen. Ingen af delene må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. De lokale retningslinjer for bortskaffelse skal overholdes.

Dette sæt inkluderer:

DermLite DL5 (16 hvide LED'er, 4 UV LED'er, 4 PigmentBoost LED'er, 1 hvid Torch LED, 32 mm linsesystem med 10x forstørrelse, variabelt polariseringsystem, udtrækkeligt afstandsstykke, aftagelig frontplade med 10 mm sigemiddel, stållineal), læderbælteui, USB-opladningskabel, opladerbase, okular, MCC mobilenhedsadapter, plastikbæltehylster (H), 5 IceCaps, mikrofiberklud.

Teknisk beskrivelse

Besøg www.derm-lite.com/technical/ eller kontakt din lokale DermLite forhandler.

Anleitung

Verwendungszweck

Dieses Gerät ist für medizinische Zwecke zur Beleuchtung von Körperoberflächen vorgesehen. Es wird zur nicht-invasiven visuellen Untersuchung intakter Haut verwendet.

Dieses batteriebetriebene Produkt ist nur für die externe Untersuchung in professionellen Gesundheitseinrichtungen durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen.

Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die ordnungsgemäße Funktion des Gerätes!

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sichtbare Anzeichen von Schäden oder Fehlfunktionen vorliegen oder das Gerät nicht in Übereinstimmung mit der Beschreibung in dieser Gebrauchsanweisung funktioniert.

ACHTUNG: Schauen Sie nicht direkt in die LED-Leuchte. Patienten müssen während der Untersuchungen die Augen schließen.

Im Falle eines schwerwiegenden Vorfalls bei der Verwendung dieses Geräts benachrichtigen Sie DermLite unverzüglich und, falls dies aufgrund der örtlichen Vorschriften erforderlich ist, Ihre nationale Gesundheitsbehörde.

ACHTUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen mit Brand- oder Explosionsgefahr (z. B. sauerstoffreiche Umgebung).

Achtung: UV-Licht nicht direkt betrachten.

WARNUNG: Dieses Gerät enthält Magnete. Nicht in der Nähe von Herzschrittmachern oder anderen magnetisch empfindlichen Geräten oder Gegenständen verwenden.

WARNUNG: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Methylchlorid und schwermetallhaltiges Chrom aussetzen, von denen bekannt ist, dass sie Krebs oder Reproduktionstoxizität verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen an die EMV-Emissionen und die Störfestigkeit der Norm IEC 60601-1-2: 2014. Aufgrund der Emissionsseigenschaften dieses Geräts eignet es sich sowohl für den Einsatz im professionellen Gesundheitswesen als auch im Wohnbereich (CISPR 11 Klasse B). Dieses Gerät bietet einen angemessenen Schutz für Funkkommunikationsdienste. In dem seltenen Fall einer Störung des Funkkommunikationsdienstes muss der Benutzer möglicherweise Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen, z. B. das Verschieben oder Neuausrichten von Geräten. **WARNUNG:** Die Verwendung dieses Geräts neben oder gestapelt mit anderen Geräten sollte vermieden werden, da dies zu Fehlfunktionen führen kann. Wenn eine solche Verwendung erforderlich ist, sollten dieses Gerät und die anderen Geräte beobachtet werden, um sicherzustellen, dass sie normal funktionieren.

WARNUNG: Die Verwendung von anderem Zubehör als dem vom Hersteller dieses Geräts bereitgestellten kann zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen oder einer verminderten elektromagnetischen Störfestigkeit dieses Geräts führen und zu einem fehlerhaften Betrieb führen.

WARNUNG: Tragbare HF-Sender sollten nicht näher als 30 cm (12 Zoll) an einem Teil des Geräts verwendet werden. Andernfalls kann es zu einer Verschlechterung der Leistung dieses Geräts kommen. Verwenden Sie dieses Gerät nicht während der Magnetresonanztomographie (MRT) oder in einer MRT-Umgebung.

WICHTIG: Laden Sie vor dem ersten Gebrauch den internen Lithium-Ionen-Akku auf. Weitere Informationen finden Sie unter „Batterien und Laden“.

DermLite DL5 ist ein Smartphone-kompatibles Taschendermatoskop mit 10-facher Vergrößerung zur Visualisierung von Hautstrukturen mit variablem polarisiertem Licht und UV-Beleuchtung.

Halten Sie Ihr DermLite DL5 mit den LEDs in Richtung der zu untersuchenden Läsion etwa 12 mm über der Haut. Drücken Sie den Hauptschalter (M), um das Gerät im Kreuzpolarisationsmodus einzuschalten. Schauen Sie durch die Linse und bewegen Sie das Gerät näher oder weiter von der Haut weg, um das Bild zu fokussieren. Drehen Sie für eine Dermatoskopie mit Hautkontakt das Fokussierrad (FD), um den Abstandshalter (S) auszufahren und das Bild zu fokussieren. Halten Sie den Hauptschalter (M) etwa 1 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Um Strom zu sparen, schaltet sich das Gerät nach 3 Minuten automatisch aus.

Variable Polarisation

Tippen Sie auf die Hauptschaltfläche (M), um zwischen kreuzpolarisierter und nicht-polarisierter Beleuchtung umzuschalten. Drehen Sie den Hauptknopf, um sich durch den Bereich von 9 Polarisationseinstellungen zu bewegen, von kreuzpolarisiertem über nicht-polarisiertes bis parallel-polarisiertes Licht. Der Indikatorstreifen (IS) spiegelt den aktuellen Polarisationsstatus wider, wobei „X“ für Kreuzpolarisation, „0“ für Nichtpolarisation und „=“ für Parallelpolarisation steht.

PigmentBoost®

Während weißes Licht aktiv ist, tippen Sie auf (PB), um zusätzlich zum weißen Licht die orangefarbene PigmentBoost-Beleuchtung zu aktivieren. Die Anzeige-LED neben der PB-Taste (PB) leuchtet auf. Zum Deaktivieren erneut tippen.

UV-Modus

Um fluoreszierende Strukturen sichtbar zu machen, tippen Sie auf die UV-Schaltfläche (UV), um LEDs mit einer Wellenlänge von 365 nm zu aktivieren. Die Anzeige-LED neben der UV-Taste (UV) leuchtet auf. Tippen Sie erneut auf die Schaltfläche, um zum zuvor ausgewählten Weißlichtmodus zurückzukehren.

Taschenlampe

Um größere Hautbereiche oder Körperhöhlen zu beleuchten, tippen Sie auf die Taschenlampentaste (T), um eine ultrahelle, weiße, nicht polarisierte LED zu aktivieren. Drehen Sie den Hauptschalter (M), um die Helligkeit der Taschenlampe einzustellen.

Dermoskopische Helligkeitseinstellung

Um die Helligkeit der weißen Dermatoskop-LEDs einzustellen, halten Sie die Taschenlampentaste (T) gedrückt und drehen Sie gleichzeitig den Hauptschalter (M). Halten Sie im UV- oder PigmentBoost-Modus die UV- (oder PB-) Taste gedrückt und drehen Sie den Hauptschalter, um die jeweilige Helligkeit einzustellen. Der Anzeigebalken (IB) spiegelt die aktuelle Helligkeitsstufe während der Einstellung wider.

Okular

Befestigen Sie für eine optimale Sicht das mitgelieferte Okular (EP) am Zubehörring (ER).

Smartphone-Dermatoskopie

Befestigen Sie für die Dermatoskopie mit einem Smartphone oder Tablet den MagnetConnect Klemmadapter (MCC) sicher und konzentrisch ausgerichtet über der Hauptkamera Ihres Mobilgeräts. Befestigen Sie Ihren DL5 am MCC-Ring. Ziehen Sie vor dem Aufnehmen von Bildern den Abstandshalter (S) in die Position „0“ und wischen Sie die Glaskontaktplatte (CP) sauber.

Entfernen der Kontaktplatte

Drehen Sie die Glaskontaktplatte (CP) gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie wieder anzubringen.

Lineal

Das Lineal (R) ist magnetisch am Griff befestigt. Drücken Sie in der Mitte des Lineals nach unten und entfernen Sie es, um Hautläsionen zu messen.

IceCap®

Um Ihre Maßnahmen zur Infektionsbekämpfung zu unterstützen, lassen Sie eine der mitgelieferten Einweg-IceCaps (IC) über dem installierten Deckglas (CP) einrasten.

Akku und Aufladen

ACHTUNG: Dieses Gerät verwendet einen speziellen 3,7-V-670-mAh-Lithium-Ionen-Akku, der nur bei DermLite oder einem autorisierten DermLite-Händler erworben werden kann. Verwenden Sie unter keinen Umständen einen anderen Akku als den für dieses Gerät vorgesehenen.

Nach Hunderten von Anwendungen wird sich der Akku verschlechtern, was zu einer verringerten Kapazität und/oder einer Erweiterung der Lithium-Ionen-Zellen führen kann. Achten Sie auf Anzeichen einer Verschlechterung der Batterie, zu denen verkürzte Batterielebensdauer, unerwartete Abschaltungen, unregelmäßiges Verhalten oder plötzlicher Stromausfall gehören können. Wenn dies beobachtet wird, stellen Sie die Verwendung des Geräts ein und laden Sie den Akku nicht auf. Ersetzen Sie die Batterie und entsorgen Sie die Originalbatterie gemäß den örtlichen Vorschriften. Dieses Gerät ist mit einer vierstufigen Ladestandanzeige (CI - Charge Indicator) ausgestattet. Wenn das Gerät eingeschaltet und voll aufgeladen ist, leuchten alle vier LEDs. Wenn weniger als 75% der Batterielebensdauer verbleiben, leuchten drei LEDs. Wenn mehr als die Hälfte der Batterie leer ist, leuchten zwei LEDs. Wenn nur eine einzelne LED leuchtet, bedeutet das, dass weniger als 25% der Batteriekapazität verbleiben.

Um das Gerät zu laden, das mitgelieferte USB-C zu USB-Kabel an den Ladeanschluss (PP - Charging Port) und einen beliebigen IEC 60950-1-kompatiblen (5 V) USB-Anschluss anschließen. Die Ladestandanzeige (CI) pulsiert, um den Ladevorgang anzuzeigen, wobei die Anzahl der pulsierenden LEDs dem Ladezustand entspricht.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchten alle vier LED-Anzeigen. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, kann es je nach verwendeter Helligkeitsstufe ca. 3 bis 5 Stunden betrieben werden.

Nach jahrelanger Nutzung soll man möglicherweise die Batterie austauschen. Diese ist nur bei DermLite oder einem autorisierten DermLite-Händler erhältlich.

Nach Hunderten von Anwendungen verschlechtert sich der Akku, was zu einer verringerten Kapazität und/oder einer Erweiterung der Lithium-Ionen-Zellen führt. Achten Sie auf Anzeichen einer Verschlechterung der Batterie, wie z. B. verkürzte Batterielebensdauer, unerwartete Abschaltungen, unregelmäßiges Verhalten oder plötzlichen Stromausfall. Wenn dies beobachtet wird, stellen Sie die Verwendung des Geräts ein und laden Sie den Akku nicht auf. Ersetzen Sie die Batterie und entsorgen Sie die Originalbatterie gemäß den örtlichen Vorschriften. Um die Batterie (B) zu wechseln, ziehen Sie das Einstellrad (D) ab, indem Sie es an der Fingernagelkerbe fassen, lösen Sie die Schraube der Batterieabdeckung (CS) mit dem Werkzeug, das jeder DL5-Ersatzbatterie beiliegt, und entfernen Sie die Batterieabdeckung (BC). Trennen Sie den kleinen weißen Batteriestecker (BP) und entnehmen Sie die Batterie (B). Setzen Sie eine neue Batterie ein, schließen Sie den Batteriestecker wieder an, bringen Sie die Batterieabdeckung (BC) wieder an, befestigen Sie sie mit der Abdeckungsschraube (CS) und drücken Sie den Drehknopf (D) hinein, bis er einrastet.

Ladestation

Um Ihren DL5 mit der Ladestation aufzuladen, schließen Sie das kleinere (USBC) Ende des mitgelieferten USB-Kabels an den Stromanschluss (PO) auf der Rückseite der Ladestation (CB) und das größere (USB) Ende an einen beliebigen IEC 60950 an -1 oder IEC62368-1-konformes (5V) USB-Ladegerät. Platzieren Sie Ihren DL5 so in der Ladestation, dass die Kontaktplatte (CP) zur Ladestation zeigt. Die Ladestation kann auch zur Aufbewahrung von IceCaps verwendet werden.

Fehlerbeseitigung

Die aktuellsten Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unter www.derm-lite.com. Wenn Ihr Gerät gewartet werden muss, besuchen Sie www.derm-lite.com/service oder wenden Sie sich an Ihren DermLite-Händler.

Pflege und Wartung

WARNUNG: Änderungen an diesem Gerät sind nicht zulässig. Ihr Gerät ist für einen störungsfreien Betrieb ausgelegt. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.

Vor der Anwendung bei einem Patienten kann das Äußere Ihres Geräts (mit Ausnahme der optischen Teile) mit Isopropylalkohol (70% vol.) Abgewischt werden. Das Objektiv sollte als hochwertiges Fotogerät behandelt und mit Standard-Objektivreinigungsgeräten gereinigt und vor schädlichen Chemikalien geschützt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeit. Nicht autoklavieren.

Garantie: 5 Jahre auf Teile und Arbeit. Die Garantie für den Akku beträgt 1 Jahr.

Entsorgung

Dieses Gerät enthält Elektronik und einen Lithium-Ionen-Akku, der zur Entsorgung getrennt werden muss und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften.

Dieses Set beinhaltet:

DermLite DL5 (16 weiße LEDs, 4 UV-LEDs, 4 PigmentBoost-LEDs, 1 weiße Torch-LED, 32-mm-Linsensystem mit 10-facher Vergrößerung, variables Polarisationsystem, einziehbarer Abstandshalter, abnehmbare Frontplatte mit 10-mm-Skala, Stahllineal), Ledergürteltasche, USB-Ladekabel, Ladestation, Okular, MCC-Mobilgeräteeadapter, Kunststoff-Gürtelholster (H), 5 IceCaps, Mikrofasertuch.

Technische Beschreibung

Besuchen Sie www.derm-lite.com/technical/ oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen DermLite-Händler.

Juhised

Mõeldud kasutamiseks

See seade on mõeldud meditsiinilistel eesmärkidel kehapiindade valgustamiseks. Seda kasutatakse terve naha mitteinvasiivseks visuaalseks uurimiseks.

See patareitoitega toode on mõeldud väliseks kontrollimiseks ainult meditsiinifeldite poolt professionaalsetes tervishoiuasutustes.

Enne kasutamist kontrollige seadme töökorras olekut! Ärge kasutage seadet, kui sellel on nähtavaid kahjustusi, rikkeid või kui seade ei tööta käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatuga kooskõlas.

ETTEVAATUST: Ärge vaadake otse LED-valgust. Patsiendid peavad uuringute ajal silmad sulgema.

Selle seadme kasutamiseiga seotud tõsise vahejuhtumi korral teatage sellest kohe DermLite'ile ja kui kohalikud eeskirjad seda nõuavad, siis oma riiklike tervishoiuasutusele.

ETTEVAATUST: Ärge kasutage seadet tule- või plahvatusohtlikus piirkonnas (nt hapnikurikas keskkond).

Ettevaatust: ärge vaadake otse ultravioletvalgust.

HOIATUS: see toode sisaldab magnetiteid. Ärge kasutage südamestimulaatori või muude magnetilisel tundlike seadmete või esemete läheduses.

HOIATUS: See toode võib kokku puutuda kemikaalidega, sealhulgas metüleenkloriid ja kuuvalentne kroom, mis California osarigi teadaolevalt põhjustavad vähki või reproduktiivtoksilisust. Lisateavet leiate veebisaidilt www.P65Warnings.ca.gov.

Elektromagnetiline ühilduvus

See seade vastab standardi IEC 60601-1-2: 2014 EMC emissiooni ja häirekindluse taseme nõuetele. Selle seadme heiteomadused muudavad selle kasutamiseks nii professionaalses tervishoiukeskkonnas kui ka elamukeskkonnas (CISPR 11 klass B). See seade pakub raadioside-teenusele piisavat kaitset. Raadioside-teenuse häirete harvadel juhtudel võib kasutaja vajada leevendusmeetmeid, näiteks seadme ümberpaigutamist või ümberorienteerimist. **HOIATUS:** Selle seadme kasutamist teiste seadmete läheduses või nendega koos viinastamisel tuleks vältida, kuna see võib põhjustada vale kasutamist. Kui selline kasutamine on vajalik, tuleks seda varustust ja muid seadmeid jälgida, et kontrollida, kas need töötavad normaalselt.

HOIATUS: Lisaseadmete, välja arvatud selle seadme tootja poolt pakutavate tarvikute kasutamine võib põhjustada selle seadme elektromagnetilise kiirguse suurenemist või selle elektromagnetilise häirekindluse vähenemist ja selle vale kasutamist.

HOIATUS: Portatiivseid raadiosaatjaid ei tohiks kasutada seadme mis tahes osale lähemal kui 30 cm (12 tolli). Vastasel korral võib selle seadme jõudlus halveneda. Ärge kasutage seda seadet magnetresonantsomograafia (MRI) ajal ega MRI keskkonnas.

TÄHTIS. Enne esmakordset kasutamist laadige sisemine liitiumioonaku. Üksikasju leiate peatükist "Aku ja laadimine".

DermLite DL5 on nutitelefoni ühilduv 10-kordse suurendusega taskudermatoskoop naha struktuuride visualiseerimiseks muutuva polariseeritud valguse ja UV-valguse abil.

Hoidke oma DermLite DL5, LED-id suunatud uuritava kahjustuse suunas, umbes 12 mm nahast kõrgemal. Vajutage pealülitiit (M), et lülitada seade sisse ristpolariseeritud režiimis. Vaadake läbi objektiiv ja liigutage seadet pildi teravustamiseks nahale lähemale või kaugemale. Nahaga kokkupuutuva dermoskoopia puhul pöörake fookusketast (FD), et pikendada vahekaugust (S) ja teravustada pilt. Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke pealülitiit (M) umbes 1 sekund all. Energia säästmiseks lülitub seade 3 minuti pärast automaatselt välja.

Muutuva polarisatsioon

Puudutage põhinuppu (M), et lülitada ristpolariseeritud ja polariseerimata valgustuse vahel. Pöörake põhinuppu, et liikuda 9 polarisatsioonisätete vahel, alates ristpolarisatsioonist kuni polariseerimata kuni paralleelpolarisatsioonini. Indikaatorriba (IS) peegeldab hetkepolarisatsiooni olekut, samas kui "X" tähistab ristpolarisatsiooni, "0" tähistab

mittepolarisatsiooni ja "-" tähistab paralleelpolarisatsiooni.

PigmentBoost®

Kui valge tuli on aktiivne, puudutage (PB), et aktiveerida lisaks valgele valgusele ka oranži värvi PigmentBoost valgustus. PB-nupu (PB) kõrval olev indikaator-LED süttib. Deaktiveerimiseks puudutage uuesti.

UV-režiim

Fluorestskeeruvate struktuuride visualiseerimiseks puudutage UV-nuppu (UV), et aktiveerida LED-id lainepikkusega 365 nm. UV-nupu (UV) kõrval olev indikaator-LED süttib. Eelnevalt valitud valguse režiimi naasmiseks puudutage nuppu uuesti.

Taskulamp

Suuremate nahapiirkondade või kehaõõnsuste valgustamiseks puudutage taskulambi nuppu (T), et aktiveerida ülireal valguse polariseerimata LED. Taskulambi heleduse reguleerimiseks keerake pealülitiit (M).

Dermoskoopiline heleduse reguleerimine

Valgete dermoskoopiliste LED-de heleduse reguleerimiseks hoidke taskulambi nuppu (T) all ja keerake samal ajal pealülitiit (M). UV- või PigmentBoost-režiimis olles vajutage ja hoidke all UV- (või PB-) nuppu ning keerake vastava heleduse reguleerimiseks pealülitiit. Indikaatorriba (IB) kajastab reguleerimise ajal praegust heleduse taset.

Okulaar

Optimaalse vaatamise tagamiseks kinnitage kaasas olev magnetokulaar (EP) tarvikurõnga (ER) külge.

Nutitelefoni dermoskoopia

Nutitelefoni või tahvelarvutiga dermoskoopia tegemiseks kinnitage MagnetiConnecti klambriadapter (MCC) kontsentriilselt oma mobiilseadme põhikaamera kohale. Kinnitage oma DL5 MCC rõnga külge. Enne pildistamist pikendage vahetükk (S) asendisse "0" ja pühkige klaasist kontaktplaat (CP) puhtaks.

Kontaktplaadi eemaldamine

Eemaldamiseks keerake klaasist kontaktplaati (CP) vastupäeva, uuesti kinnitamiseks keerake seda päripäeva.

Joonlaud

Joonlaud (R) on magnetiliselt käepideme külge kinnitatud. Vajutage joonlaua keskosa alla ja eemaldage see nahakahjustuste mõtmiseks.

IceCap®

nakkuste tõrjemeetmete toetamiseks libistage üks kaasasolev ühekordne IceCaps (IC) üle paigaldatud esipaneeli (CP). Eemaldamiseks ja utiliseerimiseks tõmmake see lihtsalt ära.

Aku ja laadimine

ETTEVAATUST. See seade kasutab spetsiaalset 3,7 V 670 mAh liitiumioonakut, mida saab osta ainult DermLite'iilt või volitatud DermLite'i edasimüüjalt. Ärge mingil juhul kasutage muud akut peale selle, mis on selle seadme jaoks ette nähtud.

Pärast sadu kasutusi aku rikneb, mis võib kaasa tuua vähenenud mahutavuse ja/või liitiumioonelemendi laienemise. Jälgige halvenenud aku märke, mille hulka võivad kuuluda aku lühenemine, ootamatud väljalülitused, ebahühtlane käitumine või äkiline toitekadu. Kui seda täheldatakse, lõpetage seadme kasutamine ja ärge laadige akut. Vahetage aku välja ja kõrvaldage originaal vastavalt kohalikele eeskirjadele.

See seade on varustatud neljatasandilise laadimisnäidiku (CI). Kui seade on sisse lülitatud ja täielikult laetud, süttivad kõik neli LED-i. Kui aku kestvusest jääb alla 75%, põleb kolm LED-i. Kui enam kui pool akut on tühi, põlevad kaks LED-i, samal ajal kui üks LED näitab, et aku mahust jääb alles vähem kui 25%. Seadme laadimiseks ühendage kaasasolev USB-C USB-kaabliga laadimisporti (PP) ja IEC 60950-1 ühilduva (5 V) USB-pordiga. Laadimise indikaator (CI) impulsib laadimise tähistamiseks, kusjuures vilkuvate LED-de arv vastab laadimistasele. Kui laadimine on lõppenud, süttivad kõik neli märgutuld. Pärast aastatepikkust kasutamist võiksite aku vahetada, see on saadaval ainult otse DermLite'ilt või volitatud DermLite'i edasimüüjalt.

Pärast sadu kasutusi aku rikneb, mille tulemuseks on vähenenud mahutavus ja/või liitiumioonelementide paisumine. Jälgige halvenenud aku märke, nagu aku lühenemine, ootamatud väljalülitused, ebahühtlane käitumine või äkiline toitekadu. Kui seda täheldatakse, lõpetage seadme kasutamine ja ärge laadige akut. Vahetage aku välja ja kõrvaldage originaal vastavalt kohalikele eeskirjadele. Paterei (B) vahetamiseks tõmmake

ketas (D) ära, haarates seda küünesälgust, keerake iga DL5 asenduspatareiga kaasasoleva tööriista abil lahti akukaane kruvi (CS) ja eemaldage aku kate (BC). Ühendage lahti väike valge aku pistik (BP) ja eemaldage aku (B). Sisestage uus aku, ühendage aku pistik uuesti, kinnitage aku kaas (BC), kinnitage see kaanekruviga (CS) ja lükake ketast (D) sisse, kuni see klõpsatusega fikseerub.

Laadimisalus

DL5 laadimiseks laadimisalusel abil ühendage kaasasoleva USB-kaabli väiksem (USB-C) ots laadimisalusel (CB) tagaküljel olevasse toiteporti (PO) ja suurem (USB) ots mis tahes IEC 60950 külge. -1 või IEC62368-1 ühilduv (5 V) USB-laadija. Asetage oma DL5 laadimisalusesse pooli, et kontaktplaat (CP) on suunatud laadimisalusel poole. Laadimisalusel saab kasutada ka IceCapi hoidmiseks.

Veotsing: värskeimat tõrkeotsingu teavet leiate veebisaidilt www.derm-lite.com. Kui teie seade vajab hooldust, külastage veebisaiti www.derm-lite.com/service või pöörduge kohaliku DermLite'i edasimüüja poole.

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS: Selle seadme muutmise pole lubatud. Teie seade on loodud probleemideta tööks. Remonti tohivad teha ainult kvalifitseeritud hooldustöötajad.

Enne patsiendil kasutamist võib teie seadme välispinna (välja arvatud optilised osad) puhtaks pesta isopropanoolalkoholiga (70 mahuprotsenti). Objektiivile tuleks käsitleda kvaliteetse fotoseadmena ning seda tuleks puhastada tavaliste läätsede puhastusseadmetega ja kaitsta kahjulike kemikaalide eest. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega kastke seadet vedelikku. Ärge autoklaavi.

Garantii: varuosadele ja tööle 5 aastat. Aku garantii on 1 aasta.

Utiliseerimine: see seade sisaldab elektroonikat ja liitium-ioonakut, mis tuleb utiliseerimiseks eraldada ja mida ei tohi visata koos olmeprüügiga. Järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju.

See komplekt sisaldab:

DermLite DL5 (16 valget LED-i, 4 UV LED-i, 4 PigmentBoost LED-i, 1 valge taskulamp LED, 32 mm objektiivisüsteem 10-kordse suurendusega, muutuva polarisatsiooniga süsteem, sissetõmmatav vahetükk, eemaldatav esiplaat 10 mm võreaga, terasest joonlaud), nahkrihma ümbris, USB laadimiskaabel, laadimisalus, okulaar, MCC mobiilseadme adapter, plastikust vööümbris (H), 5 IceCapi, mikrokiudlapp.

Tehniline kirjeldus: külastage veebisaiti www.derm-lite.com/technical või pöörduge kohaliku DermLite'i edasimüüja poole.

Instrucciones

Uso previsto

Este dispositivo está diseñado para fines médicos para iluminar superficies corporales. Se utiliza para el examen visual no invasivo de piel intacta.

Este producto que funciona con baterías está diseñado para un examen externo solo en centros de salud profesionales por profesionales médicos.

¡Compruebe el correcto funcionamiento del dispositivo antes de su uso!

No utilice el dispositivo si hay signos visibles de daño, mal funcionamiento o si el dispositivo funciona de una manera que no sea consistente con lo que se describe en estas instrucciones de uso.

PRECAUCIÓN: no mire directamente a la luz LED. Los pacientes deben cerrar los ojos durante los exámenes.

En caso de un incidente grave con el uso de este dispositivo, notifique a DermLite inmediatamente y, si así lo exige la normativa local, a su autoridad sanitaria nacional.

PRECAUCIÓN: no use el dispositivo en áreas de riesgo de incendio o explosiones (por ejemplo, en entornos ricos en oxígeno).

Precaución: No mire directamente a la luz UV.

ADVERTENCIA: este dispositivo contiene imanes. No lo utilice cerca de marcapasos u otros dispositivos u objetos magnéticamente sensibles.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cloruro de metileno y el cromo hexavalente, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer o toxicidad reproductiva. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Compatibilidad electromagnética

Este dispositivo cumple con los requisitos de nivel de emisiones e inmunidad EMC de la norma IEC 60601-1-2: 2014. Las características de emisión de este equipo lo hacen adecuado para su uso en entornos de atención médica profesional y residencial (CISPR 11 Clase B). Este equipo ofrece protección adecuada para el servicio de comunicación por radio. En el raro caso de interferencia en el servicio de comunicación por radio, el usuario podría necesitar tomar medidas de mitigación, como reubicar o reorientar el equipo. **ADVERTENCIA:** Debe evitarse el uso de este equipo adyacente o apilado con otro equipo, ya que podría provocar un funcionamiento incorrecto. Si dicho uso es necesario, este equipo y el otro equipo deben observarse para verificar que están funcionando normalmente.

ADVERTENCIA: El uso de accesorios distintos a los proporcionados por el fabricante de este equipo podría provocar un aumento de las emisiones electromagnéticas o una disminución de la inmunidad electromagnética de este equipo y un funcionamiento incorrecto.

ADVERTENCIA: Los transmisores de RF portátiles no deben usarse a menos de 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del dispositivo. De lo contrario, podría producirse una degradación del rendimiento de este equipo.

No utilice este dispositivo durante una resonancia magnética nuclear (RMN) o en un entorno de resonancia magnética.

IMPORTANTE: antes del uso inicial, por favor, cargue la batería interna de iones de litio. Consulte la sección "Batería y carga" para más detalles

DermLite DL5 es un dermatoscopio de bolsillo compatible con teléfonos inteligentes con un aumento de 10x para visualizar las estructuras de la piel utilizando luz polarizada variable e iluminación UV.

Sostenga su DermLite DL5, con los LED apuntando en la dirección de la lesión a examinar, aproximadamente 12 mm por encima de la piel. Presione el interruptor principal (M) para encender el dispositivo en modo de polarización cruzada. Mire a través de la lente y acerque o aleje el dispositivo de la piel para enfocar la imagen. Para dermatoscopia con contacto con la piel, gire el dial de enfoque (FD) para extender el espaciador (S) y enfocar la imagen. Mantenga pulsado el interruptor principal (M) durante aproximadamente 1 segundo para apagar el dispositivo. Para ahorrar energía, la unidad se apaga automáticamente después de 3 minutos.

polarización variable

Toque el botón principal (M) para alternar entre iluminación polarizada cruzada y no polarizada. Gire el botón principal para moverse a través del rango de 9 configuraciones de polarización, desde luz polarizada cruzada pasando por luz no polarizada hasta luz polarizada en paralelo. La tira indicadora (IS) refleja el estado de polarización actual, mientras que "X" indica polarización cruzada, "0" representa no polarizado y "=" representa polarización paralela.

PigmentBoost®

Mientras la luz blanca está activa, toque (PB) para activar la iluminación PigmentBoost de color naranja además de la luz blanca. El indicador LED junto al botón PB (PB) se iluminará. Toque de nuevo para desactivar.

Modo ultravioleta

Para visualizar estructuras fluorescentes, toque el botón UV (UV) para activar los LED con una longitud de onda de 365 nm. El indicador LED junto al botón UV (UV) se iluminará. Toque el botón nuevamente para volver al modo de luz blanca seleccionado anteriormente.

Linterna

Para iluminar áreas más grandes de la piel o cavidades corporales, toque el botón de la linterna (T) para activar un LED blanco no polarizado ultrabrillante. Gire el interruptor principal (M) para ajustar el brillo de la linterna.

Ajuste de brillo dermatoscópico

Para ajustar el brillo de los LED blancos dermatoscópicos, mantenga presionado el botón de la linterna (T) y simultáneamente gire el interruptor principal (M). Mientras está en el modo UV o PigmentBoost, presione y mantenga presionado el botón UV (o PB) y gire el interruptor principal para ajustar el brillo respectivo. La barra indicadora (IB) refleja el nivel de brillo actual durante el ajuste.

Ocular

Para una visualización óptima, coloque el ocular (EP) incluido en el anillo de accesorios (ER).

Dermatoscopia de teléfonos inteligentes

Para la dermatoscopia con un teléfono inteligente o una tableta, ajuste de forma segura el adaptador de abrazadera MagnetiConnect (MCC) alineado concéntricamente sobre la cámara principal de su dispositivo móvil. Conecte su DL5 al anillo MCC. Antes de tomar imágenes, extienda el espaciador (S) a la posición "0" y limpie la placa de contacto de vidrio (CP).

Extracción de la placa de contacto

Gire la placa de contacto de vidrio (CP) en el sentido contrario a las agujas del reloj para separarla y en el sentido de las agujas del reloj para volver a colocarla.

Gobernante

La regla (R) está unida magnéticamente al mango. Presione hacia abajo en el medio de la regla y retírela para medir las lesiones de la piel.

IceCap®

Para apoyar sus medidas de control de infecciones, coloque uno de los IceCaps (IC) desechables sobre la placa frontal (CP) instalada.

Batería y carga

PRECAUCIÓN: Este dispositivo utiliza una batería de iones de litio especial de 3,7 V y 670 mAh, que solo puede adquirirse en DermLite o en un distribuidor autorizado de DermLite. Bajo ninguna circunstancia utilice otra batería que no sea la diseñada para esta unidad.

Después de cientos de usos, la batería se deteriorará, lo que puede provocar una reducción de la capacidad y/o una expansión de la celda de iones de litio. Supervise los signos de una batería deteriorada, que pueden incluir una duración reducida de la batería, apagados inesperados, comportamiento errático o una pérdida repentina de energía. Si se observa, deje de usar el dispositivo y no cargue la batería. Reemplace la batería y deseche la original de acuerdo con las regulaciones locales. Este dispositivo está equipado con un indicador de carga (CI) de cuatro niveles. Cuando la unidad está encendida y completamente cargada, los cuatro LED se iluminan. Cuando queda menos del 75 % de la vida útil de la batería, se iluminan tres LED. Si se descarga más de la mitad de la batería, se mostrarán dos LED encendidos, mientras que un único LED indica que queda menos del 25 % de la capacidad de la batería.

Para cargar su dispositivo, conecte el cable USB-C a USB suministrado al puerto de carga (PP) y a cualquier puerto USB compatible con IEC 60950-1 (5 V).

El indicador de carga (CI) indica la misma a través del número de LED parpadeantes, los cuales corresponden al nivel de carga total.

Cuando la carga se haya completado, los cuatro indicadores LED se iluminarán. Una carga completa permitirá utilizar el dispositivo aproximadamente unas 3 a 8 horas, dependiendo del nivel de brillo utilizado. Tras unos años de uso, es posible que desee reemplazar la batería, la cual sólo estará disponible en DermLite o en un distribuidor autorizado de DermLite.

Después de cientos de usos, la batería se deteriorará, lo que provocará una reducción de la capacidad y/o la expansión de la celda de iones de litio. Esté atento a signos de batería deteriorada, como duración reducida de la batería, apagados inesperados, comportamiento errático o pérdida repentina de energía. Si se observa, deje de usar el dispositivo y no cargue la batería. Reemplace la batería y deseche la original de acuerdo con las regulaciones locales. Para cambiar la batería (B), retire el dial (D) agarrándolo por la muesca de la uña, desenrosque el tornillo de la tapa de la batería (CS) usando la herramienta suministrada con cada batería de reemplazo DL5 y retire la tapa de la batería (BC). Desconecte el pequeño enchufe blanco de la batería (BP) y retire la batería (B). Inserte una batería nueva, vuelva a conectar el enchufe de la batería, vuelva a colocar la tapa de la batería (BC), asegúrela con el tornillo de la tapa (CS) y presione el dial (D) hacia adentro hasta que encaje en su lugar.

Base de carga

Para cargar su DL5 usando la base de carga, conecte el extremo más pequeño (USB) del cable USB suministrado al puerto de alimentación (PO) en la parte posterior de la base de carga (CB) y el extremo más grande (USB) a cualquier IEC 60950. -1 o

Cargador USB compatible con IEC62368-1 (5 V). Coloque su DL5 en la base de carga, con la placa de contacto (CP) mirando hacia la base de carga. La base de carga también se puede utilizar para almacenar IceCap.

Solución de problemas

Por favor, consulte www.derm-lite.com para obtener la información más actualizada sobre resolución de problemas. Si su dispositivo requiere servicio técnico, visite www.derm-lite.com/service o contacte a su distribuidor local de DermLite.

Cuidado y mantenimiento

ADVERTENCIA: no se permite la modificación de este equipo.

Su dispositivo está diseñado para un funcionamiento sin problemas. Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal de servicio calificado.

Antes de usarlo en un paciente, el exterior de su dispositivo (excepto las partes ópticas) puede limpiarse con alcohol isopropílico (70% vol.). La lente debe tratarse como un equipo fotográfico de alta calidad y debe limpiarse con un equipo de limpieza de lentes estándar y protegerse de productos químicos nocivos. No utilice productos de limpieza abrasivos ni sumerja el dispositivo en líquido. No esterilizar en autoclave.

Garantía: 5 años para piezas y mano de obra. La batería tiene una garantía de 1 año.

Desecho

Este dispositivo contiene componentes electrónicos y una batería de iones de litio que deben ser desmontados para su desecho, así como podrían no ser desechados junto a la basura doméstica general. Por favor, consulte la normativa local asociada a la eliminación de residuos.

Este conjunto incluye:

DermLite DL5 (16 LED blancos, 4 LED UV, 4 LED PigmentBoost, 1 LED Torch blanco, sistema de lentes de 32 mm con aumento de 10x, sistema de polarización variable, espaciador retráctil, placa frontal extraíble con retícula de 10 mm, regla de acero), estuche de cuero para cinturón, Cable de carga USB, base de carga, ocular, adaptador de dispositivo móvil MCC, funda de cinturón de plástico (H), 5 IceCaps, paño de microfibra.

Descripción técnica

Visite www.derm-lite.com/technical/ o póngase en contacto con su distribuidor local de DermLite.

Instructions

Usage prévu

Cet appareil est destiné à des fins médicales pour éclairer les surfaces corporelles. Il est utilisé pour l'examen visuel non invasif de la peau intacte.

Ce produit à piles est conçu pour un examen externe uniquement dans des établissements de santé professionnels par des professionnels de la santé.

Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil avant utilisation ! N'utilisez pas l'appareil s'il présente des signes visibles de dommages, de dysfonctionnement ou si l'appareil fonctionne d'une manière non conforme à ce qui est décrit dans ce mode d'emploi.

AVERTISSEMENT : Ne regardez pas l'éclairage LED directement. Les patients doivent fermer les yeux lors des examens.

En cas d'incident grave avec l'utilisation de cet appareil, prévenez immédiatement DermLite et, si la réglementation locale l'exige, votre autorité sanitaire nationale.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'appareil dans des zones présentant un risque d'incendie ou d'explosion (comme par exemple, dans un environnement riche en oxygène).

Attention: ne regardez pas directement la lumière UV.

AVERTISSEMENT : Cet appareil contient des aimants. Ne l'utilisez pas à proximité de stimulateurs cardiaques ou d'autres appareils ou objets sensibles aux champs magnétiques.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chlorure de méthylène et le chrome hexavalent, qui sont connus dans l'État de Californie pour provoquer le cancer ou une toxicité pour la reproduction. Pour plus d'informations, visitez le site www.P65Warnings.ca.gov.

Compatibilité électromagnétique

Cet appareil est conforme aux exigences de niveau d'émissions et d'immunité CEM de la norme CEI 60601-1-2: 2014. Les caractéristiques d'émission de cet équipement le rendent approprié pour une utilisation dans un environnement de soins de santé professionnel ainsi que dans un environnement résidentiel (CISPR 11 Classe B). Cet équipement offre une protection adéquate au service de radiocommunication. Dans les rares cas d'interférence avec le service de radiocommunication, l'utilisateur peut avoir besoin de prendre des mesures d'atténuation, telles que déplacer ou réorienter l'équipement. **AVERTISSEMENT:** L'utilisation de cet équipement à côté ou emplié avec d'autres équipements doit être évitée car cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement. Si une telle utilisation est nécessaire, cet équipement et les autres équipements doivent être observés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement.

AVERTISSEMENT: L'utilisation d'accessoires autres que ceux fournis par le fabricant de cet équipement peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet équipement et entraîner un fonctionnement incorrect.

AVERTISSEMENT: les émetteurs RF portables ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm (12 pouces) de toute partie de l'appareil. Sinon, cela pourrait entraîner une dégradation des performances de cet équipement.

N'utilisez pas cet appareil pendant l'imagerie par résonance magnétique (IRM) ou dans un environnement IRM.

IMPORTANT : Avant la première utilisation, veuillez charger la batterie interne au lithium-ion. Voir « Batterie et charge » pour en savoir plus.

DermLite DL5 est un dermatoscope de poche compatible avec un smartphone avec un grossissement 10x pour visualiser les structures de la peau à l'aide d'une lumière polarisée variable et d'un éclairage UV.

Tenez votre DermLite DL5, les LED dirigées dans la direction de la lésion à examiner, à environ 12 mm au-dessus de la peau. Appuyez sur l'interrupteur principal (M) pour allumer l'appareil en mode de polarisation croisée. Regardez à travers l'objectif et rapprochez ou éloignez l'appareil de la peau pour faire la mise au point de l'image. Pour la dermatoscopie avec contact avec la peau, tournez la molette de mise au point (FD) pour étendre l'entretoise (S) et mettez au point l'image. Poussez et maintenez l'interrupteur principal (M) pendant environ 1 seconde pour éteindre l'appareil. Pour économiser de l'énergie, l'appareil s'éteint automatiquement après 3 minutes.

Polarisation variable

Appuyez sur le bouton principal (M) pour basculer entre l'éclairage polarisé croisé et non polarisé. Tournez le bouton principal pour parcourir la gamme de 9 paramètres de polarisation, de la polarisation croisée à la lumière non polarisée en polarisation parallèle. La bande indicatrice (IS) reflète l'état de polarisation actuel, tandis que "X" marque la polarisation croisée, "0" représente la non polarisation et "=" représente la polarisation parallèle.

PigmentBoost®

Lorsque la lumière blanche est active, appuyez sur (PB) pour activer l'éclairage PigmentBoost de couleur orange en plus de la lumière blanche. Le voyant LED à côté du bouton PB (PB) s'allume. Appuyez à nouveau pour désactiver.

Mode UV

Pour visualiser les structures fluorescentes, appuyez sur le bouton

UV (UV) pour activer les LED avec une longueur d'onde de 365 nm. L'indicateur LED à côté du bouton UV (UV) s'allume. Appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir au mode de lumière blanche précédemment sélectionné.

Lampe de poche

Pour éclairer de plus grandes zones de la peau ou des cavités corporelles, appuyez sur le bouton de la lampe de poche (T) pour activer une LED blanche non polarisée ultra-brillante. Tournez l'interrupteur principal (M) pour régler la luminosité de la lampe de poche.

Ajustement dermatoscopique de la luminosité

Pour régler la luminosité des LED blanches dermatoscopiques, maintenez le bouton de la lampe de poche (T) et tournez simultanément l'interrupteur principal (M). En mode UV ou PigmentBoost, appuyez et maintenez enfoncé le bouton UV (ou PB) et tournez l'interrupteur principal pour régler la luminosité respective. La barre indicatrice (IB) reflète le niveau de luminosité actuel pendant le réglage.

Oculaire

Pour une visualisation optimale, fixez l'oculaire magnétique inclus (EP) sur la bague d'accessoires (ER).

Dermoscopie Smartphone

Pour la dermatoscopie à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, fixez solidement l'adaptateur de pince MagnetiConnect (MCC) aligné concentriquement sur la caméra principale de votre appareil mobile. Attachez votre DL5 à l'anneau MCC. Avant de prendre des images, étendez l'entretoise (S) jusqu'à la position « 0 » et essuyez la plaque de contact en verre (CP).

Retrait de la plaque de contact

Tournez la plaque de contact en verre (CP) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la détacher, tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la rattacher.

Règle

La règle (R) est attachée magnétiquement à la poignée. Appuyez au milieu de la règle et retirez-la pour mesurer les lésions cutanées.

Caches IceCap®

Pour prévenir les infections, utilisez un cache jetable IceCap (IC) inclus, par-dessus la plaque frontale (CP).

Batterie et chargement

ATTENTION : Cet appareil utilise une batterie lithium-ion spéciale de 3,7 V 670 mAh, qui ne peut être achetée que auprès de DermLite ou auprès d'un revendeur DermLite agréé. N'utilisez en aucun cas une autre batterie que celle prévue pour cet appareil.

Après des centaines d'utilisations, la batterie se détériorera, ce qui peut entraîner une réduction de la capacité et/ou une expansion des cellules lithium-ion. Surveillez les signes d'une batterie détériorée, qui peuvent inclure une durée de vie réduite, des arrêts inattendus, un comportement irrégulier ou une perte de puissance soudaine. Si cela est observé, arrêtez d'utiliser l'appareil et ne chargez pas la batterie. Remplacez la batterie et jetez l'original conformément aux réglementations locales.

Cet appareil est équipé d'un indicateur de charge à quatre niveaux. Lorsque l'appareil est sous tension et complètement chargé, les quatre voyants s'allument. Lorsqu'il reste moins de 75% de la durée de vie de la batterie, trois voyants sont allumés. Si plus de la moitié de la batterie est épuisée, deux voyants sont allumés, tandis qu'un seul indique qu'il reste moins de 25% de la capacité de la batterie. Pour charger votre appareil, connectez le câble USB-C au câble USB puis au port de charge (PP) et à tout port USB conforme à la norme CEI 60950-1 (5 V).

L'indicateur de charge (CI) clignote pour indiquer la charge, le nombre de LED clignotantes correspondant au niveau de charge. Une fois le chargement terminé, les quatre voyants sont allumés. À partir d'une charge complète, l'appareil permet environ 3-8 heures de fonctionnement, en fonction du niveau de luminosité utilisé.

Au bout de plusieurs années d'utilisation, vous souhaitez peut-être remplacer la batterie, uniquement disponible auprès de DermLite ou d'un revendeur DermLite agréé.

Après des centaines d'utilisations, la batterie se détériorera, entraînant une capacité réduite et/ou une expansion des cellules lithium-ion. Surveillez les signes d'une batterie détériorée, tels qu'une durée de vie réduite, des arrêts inattendus, un comportement irrégulier ou une perte de puissance soudaine. Si cela est observé, arrêtez d'utiliser l'appareil et ne chargez pas la batterie. Remplacez la batterie et jetez l'original conformément aux réglementations locales. Pour changer la pile (B), retirez la molette (D) en la saisissant par l'encoche de l'ongle, dévissez la vis du couvercle de la batterie (CS) à l'aide de l'outil fourni avec chaque pile de remplacement DL5, et retirez le couvercle de la batterie (BC). Débranchez la petite fiche blanche de la batterie (BP) et retirez la batterie (B). Insérez une nouvelle batterie, rebranchez la fiche de la batterie, remettez le couvercle de la batterie (BC), fixez-le avec la vis du couvercle (CS) et poussez la molette (D) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Base de chargement

Pour charger votre DL5 à l'aide de la base de chargement, connectez la plus petite extrémité (USBC) du câble USB fourni au port d'alimentation (PO) à l'arrière de la base de chargement (CB) et la plus grande extrémité (USB) à n'importe quel connecteur IEC 60950.-1 ou Chargeur USB (5 V) conforme à la norme IEC62368-1. Placez votre DL5 dans la base de chargement, avec la plaque de contact (CP) tournée vers la base de chargement. La base de chargement peut

également être utilisée pour le stockage IceCap.

Dépannage

Veuillez consulter www.dermLite.com pour obtenir les informations de dépannage mises à jour. Dans l'éventualité que votre batterie nécessite une réparation, rendez-vous sur le site www.dermLite.com/service ou contactez votre revendeur DermLite local.

Entretien et maintenance

AVERTISSEMENT: Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.

Votre appareil est conçu pour un fonctionnement sans problème. Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.

Avant de l'utiliser sur un patient, l'extérieur de votre appareil (à l'exception des parties optiques) peut être nettoyé avec de l'alcool isopropylique (70% vol.). L'objectif doit être traité comme un équipement photographique de haute qualité et doit être nettoyé avec un équipement de nettoyage d'objectif standard et protégé contre les produits chimiques nocifs. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs et n'immergez pas l'appareil dans un liquide. Ne pas stériliser à l'autoclave.

Garantie: 5 ans pour les pièces et la main-d'œuvre. La batterie est garantie 1 an.

Mise au rebut

Cet appareil contient des composants électroniques et une batterie lithium-ion qui doivent être séparés pour être mise au rebut et ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez respecter les réglementations locales en matière de mis au rebut.

Cet ensemble comprend :

DermLite DL5 (16 LED blanches, 4 LED UV, 4 LED PigmentBoost, 1 LED Torch blanche, système de lentilles 32 mm avec grossissement 10x, système de polarisation variable, entretoise rétractable, plaque frontale amovible avec réticule 10 mm, règle en acier), étui ceinture en cuir, Câble de chargement USB, base de chargement, oculaire, adaptateur pour appareil mobile MCC, étui de ceinture en plastique (H), 5 IceCaps, chiffon en microfibre.

Description technique

Visitez www.dermLite.com/technical/ ou contactez votre revendeur DermLite local.

Treoracha

Úsáid Beartaithe

Tá an gléas seo beartaithe chun críocha leighis chun drom-chlaí coirp a shoilsiú. Úsáidtear é le haghaidh scrúdú amhairc neamh-ionrach ar chraiceann slán.

Tá an táirge seo a oibrítear le ceallraí deartha le haghaidh scrúdú seachtach amháin laistigh d'áiseanna cúram sláinte gairmiúla ag gairmithe míochaine.

Seiceáil oibriú ceart an fheiste roimh úsáid!

Ná húsáid an fheiste má tá comharthaí infheicthe damáiste, mífheidhmithe, nó má oibríonn an fheiste ar bhealach nach bhfuil ag teacht leis an méid a thairiscítear sna treoracha úsáide seo.

AIRE: Ná breathnaigh go díreach isteach sa solas LED. Ní mór d'othair a súile a dhúnadh le linn scrúduithe.

I gcás teagmhais thromchúisigh le húsáid na feiste seo, cuir in iúl do DermLite láithreach agus, má cheanglaítear sin le rialacháin áitiúla, d'údarás sláinte náisiúnta.

AIRE: Ná húsáid an gléas i réimse dóiteáin nó riosca pléascach (m.sh. timpeallacht atá saibhir ó thaobh ocsaigine de).

Rabhadh: Ná breathnaigh go díreach ar sholas UV.

RABHADH: Tá maighnéid sa táirge seo. Ná bain úsáid sa garraíodóirí ná gairis nó míreanna eile atá iogair go maighnéadach.

RABHADH: Is féidir leis an táirge seo tú a nochtadh do cheimiceáin lena n-áirítear clóiríd meitiléine agus cróimiam heicavalent, ar eol do Stát California a bheith ina gcúis le hailse nó le tocaineacht áitirgthe. Le haghaidh tuilleadh faisnéise téigh chuig www.P65Warnings.ca.gov.

Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach

Comhlíonann an gléas seo ceanglais leibhéal Astuithe agus Diólúine EMC de chaighdeán caighdeánach IEC 60601-1-2: 2014. De bharr tréithe astaíochtaí an trealamh seo tá sé oiriúnach le húsáid i dtimpeallacht ghairmiúil cúram sláinte chomh maith le timpeallacht chónaithe (CISPR 11 Aicme B). Tugann an trealamh seo cosaint leordhóthanach don tseirbhís cumarsáide raidió. Sa chás go gcuirtear isteach ar an tseirbhís cumarsáide raidió go hannamh, b'fhéidir go mbeadh ar an úsáideoir bearta maoilaithe a ghlacadh, mar shampla trealamh a athlonnú nó a atreorú. **RABHADH:** Ba cheart úsáid an trealamh seo agus in aice le trealamh eile nó atá cruachta le trealamh eile a sheachaint toisc go bhféadfadh sé oibriú go míchuí. Más gá úsáid den sórt sin, ba cheart an trealamh seo agus an trealamh eile a urramú chun a fhiorú go bhfuil siad ag feidhmiú de ghnáth.

RABHADH: D'fhéadfadh astuithe leictreamaighnéadacha méadaithe nó díolúine leictreamaighnéadach an trealamh seo a bheith mar thoradh ar úsáid gabhálas seachas iad siúd a sholáthraíonn déantúsóir an trealamh seo agus d'fhéadfadh oibriú míchuí a bheith mar thoradh air. **RABHADH:** Níor cheart tarchuradóirí RF iniompartha a úsáid níos gaire ná 30 cm (12 orlach) d'aon chuid den fheiste. Seachas sin, d'fhéadfadh feidhmíocht an trealamh seo a dhíghrádú.

Ná húsáid an gléas seo le linn íomháit athshondais mhaighnéadaigh (MRI) nó i dtimpeallacht MRI.

TÁBHACHTACH: Sula n-úsáidtear an chéad uair, muirear an ceallraí ian litiam inmheánach. Féach "Battery and Charging" le haghaidh sonraí.

DermLite DL5 is dermatoscope póca atá comhoiriúnach le smartphone le formhéadú 10x chun struchtúir craiceann a léirshamhlú ag baint úsáide as solas polaraithe athraitheach agus soilsiú UV.

Coinnigh do DermLite DL5, agus na soilse stiúir dírithe i dtreo an lesion le scrúdú, thart ar 12 mm os cionn an chraiceann. Brúigh an príomhlasc (M) chun an gléas a chur ar siúl i mód tras-polaraithe. Féach tríd an lionsa agus bog an gléas níos gaire nó níos faide ar shiúl ón gcráiceann chun an íomhá a dhírú. Le haghaidh dermatoscopy le teagmháil craiceann, rothlaigh an Dial Fócais (FD) chun an Spacer (S) a leathnú agus an íomhá a dhírú. Brúigh agus coinneáil an príomhlasc (M) ar feadh thart ar 1 soicind chun an gléas a mhúchadh. Chun cumhacht a shábháil, casfaidh an t-aonad go huathoibríoch tar éis 3 nóiméad.

Polarú Athróg

Tapáil an príomhchnaipe (M) chun an soilsiú traspholach agus an soilsiú neamhpholach a scoránaigh. Cas an

príomhchnaipe chun bogadh tríd an raon de 9 sócrú polaraithe, ó thraspholaraithe trí neamh-polaraithe go solas comhthreomhar-polaraithe. Léiríonn an stiall táscaire (IS) an stádas reatha polaraithe, ach léiríonn "X" marcanna tras-polaraithe, "0" neamh-polaraithe, agus seasann "=" do polarú comhthreomhar.

PigmentBoost®

Cé go bhfuil solas bán gníomhach, tapáil (PB) chun an soilsiú PigmentBoost dath oráiste a ghníomhachtú chomh maith le solas bán. Soilseoidh an táscaire LED in aice leis an gcnaipe PB (PB). Tapáil arís chun é a dhíghníomhachtú.

Mód UV

Chun struchtúir fhluaraisiúcháin a léirshamhlú, tapáil an cnaipe UV (UV) chun soilse a ghníomhachtú le tonnfhad 365 nm. Soilseoidh an táscaire LED in aice leis an gcnaipe UV (UV). Tapáil an cnaipe arís chun filleadh ar an modh solas bán a roghnaíodh roimhe seo.

Flashlight

Chun achair chraiceann níos mó nó cuais choirp a shoilsiú, tapáil an cnaipe splanchois (T) chun LED ultra-geal neamh-polaraithe a ghníomhachtú. Cas an príomh-lasc (M) chun gile an flashlight a choigeartú.

Coigeartú Gile Dermoscópach

Chun gile na soilse bán dermoscópacha a choigeartú, coinneáil an cnaipe flashlight (T) agus cas an príomh-lasc (M) ag an am céanna. Agus tú i mód UV nó PigmentBoost, brúigh & coinneáil an cnaipe UV (nó PB) agus cas an príomh-lasc chun an gile faoi seach a choigeartú. Léiríonn an barra táscaire (IB) an leibhéal gile reatha le linn an choigeartaíthe.

Píosa súl

Chun breathnú optamach a ghreamú an eyepiece san áireamh (EP) ag an fáinne cúlpháirtí (ER).

Déirmoscopy Smartphone

Le haghaidh dermascópachta ag baint úsáide as fón cliste nó táibléad, ceangail an t-oiriúntóir clamp MagnetiConnect (MCC) go comhlánach thar phríomhcheamara do ghléis shoghluaisite. Ceangail do DL5 le fáinne an MCC. Sula nglacfaidh tú íomhánna, leathnaigh an spásaire (S) go dtí an suiomh "0", agus wipe an pláta teagmhála gloine (CP) glan.

An Pláta Teagmhála á bhaint

Cas an pláta teagmhála gloine (CP) tuathalach lena dhícheangal, cas deiseal é chun é a athcheangal.

Rialóir

Tá an rialóir (R) ceangailte go maighnéadach leis an lámhseáil. Brúigh síos i lár an rialóir agus baint é chun loit chraicinn a thomhas.

IceCap®: Chun tacú le do bhearta rialaithe ionfhabhtaithe,

bain úsáid as ceann de na Cártaí Oighir (IC) indíscartha san áireamh thar an bpláta suiteáilte (CP). Chun é a bhaint agus a dhíúscairt, tarraing amach é.

Ceallraí agus Muirearú

AIRE: Úsáideann an gléas seo ceallraí ian litiam speisialta 3.7V 3000mAh, nach féidir a cheannach ach ó DermLite nó ó dhéileálai údaraithe DermLite. Ná húsáid ceallraí eile in imthosca ar bith seachas an ceann atá deartha don aonad seo.

Tar éis na céadta úsáidí tíofofaidh meath ar an gceallraí, rud a d'fhéadfadh acmhainn laghdaithe agus/nó leathnú cille litiam-ian a bheith mar thoradh air. Monatóireacht a dhéanamh ar chomharthaí ceallraí meathlaithe a d'fhéadfadh saol ceallraí laghdaithe, múchadh gan choinne, iompar corrach, nó cailteanas cumhachta tobann a áireamh. Má breathnaítear, stop úsáid na feiste agus ná muirear ar an gceallraí. Cuir an ceallraí in ionad agus díúscairt an bhunaidh de réir rialacháin áitiúla.

Tá Táscaire Muirearú ceithre leibhéal feistithe ar an bhfeiste seo. Nuair a dhéantar an t-aonad a chasadh air agus a ghearrtar go hiomlán, lasann na ceithre LED go léir. Nuair a fhanann níos lú ná 75% de shaol na ceallraí, soilseítear trí LED. Má dhraenáiltear níos mó ná leath na ceallraí, tá dhá LED ann, agus léiríonn LED amháin go bhfanann níos lú ná 25% de chumas na gceallraí. Chun do ghléas a mhuirearú, ceangail an USB-C a sholáthraítear le USB le cábla leis an Muirearú Port (PP) agus le haon phort USB comhlíontach IEC 60950-1 (5V). Pulsanna an Táscaire Muirearú (CI) chun muirear a léiriú, agus lion na soilse biogacha a fheagraíonn do leibhéal an mhuirir. Nuair a

bhíonn an muirear críochnaithe, lasann na ceithre táscaire LED go léir. Tar éis blianta úsáide, b'fhéidir gur mhaith leat an ceallra a athlonnú, nach bhfuil ar fáil ach go díreach ó DermLite nó ó dhéileálai údaraithe DermLite. Tar éis na céadta úsáidí tíofofaidh meath ar an gceallraí agus beidh toilleadh laghdaithe agus/nó leathnú cille litiam-ian mar thoradh air. Monatóireacht a dhéanamh le haghaidh comharthaí de cheallraí meathlaithe mar shaolré ceallraí laghdaithe, múchadh gan choinne, iompar corrach, nó cailteanas cumhachta tobann. Má breathnaítear, stop úsáid na feiste agus ná muirear ar an gceallraí. Cuir an ceallraí in ionad agus díúscairt an bhunaidh de réir rialacháin áitiúla. Chun an ceallraí (B) a athrú, tarraing an dhiailiú (D) amach trína grab a chur ar an notch méar, díscrúil an scríú clúdach ceallraí (CS) ag baint úsáide as an uirlis a chuirtear ar fáil le gach ceallraí athsholáthair DL5, agus bain an clúdach ceallraí (BC). Déan an breiseán ceallraí beag bán (BP) a dhícheangal agus bain an ceallraí (B). Cuir cadhnra nua isteach, athcheangail an plócóid ceallraí, ceangail an clúdach ceallraí arís (BC), daingnígh leis an scríú clúdaigh (CS) é, agus brúigh an dhiailiú (D) isteach go dtí go bpléann sé isteach ina áit.

Bonn Muirir

Chun do DL5 a mhuirearú ag baint úsáide as an mbonn luchtaithe, ceangail an deireadh níos lú (USB) den chábla USB soláthraithe leis an gcalafort cumhachta (PO) ar chúl an bhoinn luchtaithe (CB), agus an ceann is mó (USB) le haon IEC 60950 -1 nó Charger USB comhlíontach IEC62368-1 (5V). Cuir do DL5 isteach sa bhonn luchtaithe, agus an pláta teagmhála (CP) os comhair an bhoinn luchtaithe. Féadfar an bonn muirir a úsáid freisin le haghaidh stórála IceCap.

Fabhtcheartú: Seiceáil le do thoil www.dermlite.com chun an t-eolas reatha maidir le fabhtcheartú a fháil. Má theastaíonn seirbhísiú ar do ghléas, tabhair cuairt ar www.dermlite.com/service nó déan teagmháil le do dhéileálai áitiúil DermLite.

Cúram agus Cothabháil

RABHADH: Ní cheadaítear aon mhodhnú ar an trealamh seo.

Tá do ghléas deartha le haghaidh oibriú saor ó thrioblóid. Is iad pearsanra cáilithe seirbhíse amháin a dhéanfaidh deisiúcháin.

Sula n-úsáidtear é ar othar, féadfar taobh amuigh de do ghléas (seachas na codanna optúla) a ghlanadh go glan le halcól isopropyl (70% toirte). Ba chóir go ndéileálfar leis an lionsa mar threalamh grianghrafadóireachta ardchaighdeán agus ba chóir é a ghlanadh le trealamh caighdeánach glantacháin lionsa agus é a chosaint ó cheimiceáin dhíobhálacha. Ná húsáid gníomhairí glantacháin scríobacha nó ná biodh an leacht in leacht. Ná uath-ghreamú.

Barántas: 5 bliana le haghaidh páirteanna agus saothair. Tá gá leis an gcadhna ar feadh bliana.

Díúscairt: Tá leictreonaic agus ceallraí litiam-ian ar an ngléas seo nach mór a dheighilt le díúscairt agus ní féidir é a dhíúscairt le dramhaíl ghinearáta tí. Breathnaigh le do thoil ar rialacháin díúscairt áitiúla.

Áirítear leis an tacar seo:

DermLite DL5 (16 stiúir bán, 4 stiúir UV, 4 stiúir PigmentBoost, 1 stiúir bán Tóirse, córas lionsa 32 mm le formhéadú 10x, córas polaraithe athraitheach, spacer intarraingthe, faceplate inbhainte le 10 mm reticle, rialóir cruach), cás crios leathair, Cábla muirir USB, bonn luchtaithe, eyepiece, adapter gléas soghluaisite MCC, holster crios plaisteach (H), 5 IceCaps, éadach microfiber.

Cur Síos Teicniúil: Tabhair cuairt ar www.dermlite.com/technical nó déan teagmháil le do dhéileálai áitiúil DermLite.

Instrukcije

Namjena

Ovaj je uređaj namijenjen u medicinske svrhe za osvjetljavanje tjelesnih površina. Koristi se za neinvazivni vizualni pregled netaknute kože.

Ovaj je proizvod namijenjen za vanjske preglede samo u okviru zdravstvenih ustanova od strane medicinskih stručnjaka.

Prije uporabe provjerite ispravnost uređaja! Nemojte koristiti uređaj ako postoje vidljivi znakovi oštećenja, kvara ili ako uređaj radi na način koji nije u skladu s onim što je opisano u ovim uputama za uporabu.

OPREZ: Ne gledajte izravno u LED svjetlo. Tijekom pregleda pacijenti moraju zatvoriti oči.

U slučaju ozbiljnog incidenta s korištenjem ovog uređaja, odmah obavijestite DermLite i, ako to zahtijevaju lokalni propisi, vaše nacionalno zdravstveno tijelo.

OPREZ: Ne koristite uređaj u području požara ili eksplozije (npr. Okolina bogata kisikom).

Oprez: Ne gledajte izravno u UV svjetlo.

UPOZORENJE: Ovaj proizvod sadrži magnete. Ne koristite u blizini plesača ili drugih magnetski osjetljivih uređaja ili predmeta.

UPOZORENJE: Ovaj vas proizvod može izložiti kemikalijama, uključujući metilenklorid i šestovalentni krom, za koje je država Kalifornija poznato da uzrokuju rak ili reproduktivnu toksičnost. Za više informacija posjetite www.P65Warnings.ca.gov.

Elektromagnetska kompatibilnost

Ovaj uređaj udovoljava zahtjevima razine EMC za emisije i imunitet norme IEC 60601-1-2: 2014. Emisijske karakteristike ove opreme čine ga prikladnim za uporabu u profesionalnom zdravstvenom i stambenom okruženju (CISPR 11 Klasa B). Ova oprema nudi odgovarajuću zaštitu u radiokomunikacijske usluge. U rijetkom slučaju ometanja radiokomunikacijske usluge, korisniku će možda trebati poduzeti mjere ublažavanja, poput premještanja ili preusmjerenja opreme. **UPOZORENJE:** Treba izbjegavati uporabu ove opreme koja se nalazi uz ili složenu s drugom opremom jer to može rezultirati nepravilnim radom. A što je takva upotreba potrebna, treba promatrati ovu opremu i drugu opremu kako bi se provjerilo da li normalno rade.

UPOZORENJE: Upotreba dodatne opreme osim one koju je osigurao proizvođač ove opreme može rezultirati povećanom elektromagnetskom emisijom ili smanjenjem elektromagnetske otpornosti ove opreme i rezultirati nepravilnim radom.

UPOZORENJE: Prijenosni RF odašiljači ne smiju se koristiti na udaljenosti većoj od 30 cm od bilo kojeg dijela uređaja. U suprotnom, može doći do pogoršanja performansi ove opreme.

Nemojte koristiti ovaj uređaj tijekom snimanja magnetskom rezonancom (MRI) ili u okruženju MRI.

VAŽNO: Prije početne upotrebe, napunite unutarnju litij-ionsku bateriju. Pogledajte "Baterija i punjenje" za detalje.

DermLite DL5 je džepni dermatoskop kompatibilan s pametnim telefonom s povećanjem od 10x za vizualizaciju struktura kože pomoću varijabilne polarizirane svjetlosti i UV osvjetljenja.

Držite svoj DermLite DL5, s LED diodama usmjerenim u smjeru lezije koju želite pregledati, otprilike 12 mm iznad kože. Pritisnite glavni prekidač (M) da biste uključili uređaj u unakrsno polariziranom načinu rada. Gledajte kroz leću i pomaknite uređaj bliže ili dalje od kože kako biste fokusirali sliku. Za dermoskopiju s kontaktom s kožom, okrenite kotačić za fokusiranje (FD) da produžite razmaknicu (S) i fokusirate sliku. Pritisnite i držite glavni prekidač (M) oko 1 sekundu kako biste isključili uređaj. Radi uštede energije, jedinica se automatski isključuje nakon 3 minute.

Varijabilna polarizacija

Dodirnite glavni gumb (M) za prebacivanje između unakrsno polariziranog i nepolariziranog osvjetljenja. Okrenite glavni gumb za kretanje kroz raspon od 9 postavki polarizacije, od unakrsno polarizirane preko nepolarizirane do paralelno polarizirane svjetlosti. Indikatorska traka (IS) odražava trenutni status polarizacije, dok "X" označava unakrsnu polarizaciju, "0" predstavlja nepolariziranu, a "="

označava paralelnu polarizaciju.

PigmentBoost®

Dok je bijelo svjetlo aktivno, dodirnite (PB) za aktiviranje narančastog PigmentBoost osvjetljenja uz bijelo svjetlo. LED indikator pored tipke PB (PB) će zasvijetliti. Dodirnite ponovo za deaktivaciju.

UV način rada

Za vizualizaciju fluorescentnih struktura, dodirnite gumb UV (UV) za aktiviranje LED dioda s valnom duljinom od 365 nm. LED indikator pored gumba UV (UV) će zasvijetliti. Ponovno dodirnite gumb za povratak na prethodno odabrani način bijelog svjetla.

Svjetiljka

Za osvjetljavanje većih područja kože ili tjelesnih šupljina, dodirnite gumb svjetiljke (T) kako biste aktivirali ultra-svjetlu bijelu nepolariziranu LED diodu. Okrenite glavni prekidač (M) za podešavanje svjetline svjetiljke.

Dermoskopsko podešavanje svjetline

Za podešavanje svjetline bijelih dermoskopskih LED dioda, držite gumb svjetiljke (T) i istovremeno okrenite glavni prekidač (M). Dok ste u UV ili PigmentBoost modu, pritisnite i držite gumb UV (ili PB) i okrenite glavni prekidač za podešavanje odgovarajuće svjetline. Indikatorska traka (IB) odražava trenutnu razinu svjetline tijekom podešavanja.

Okular

Za optimalno gledanje pričvrstite priloženi magnetski okular (EP) na prsten za dodatke (ER).

Dermoskopija putem pametnog telefona

Za dermoskopiju pomoću pametnog telefona ili tableta, čvrsto pričvrstite adapter stezaljke MagnetiConnect (MCC) koncentrično poravnat preko glavne kamere vašeg mobilnog uređaja. Pričvrstite svoj DL5 na MCC prsten. Prije snimanja fotografija razvucite razmaknicu (S) u položaj "0" i obrišite staklenu kontaktnu ploču (CP).

Uklanjanje kontaktne ploče

Okrenite staklenu kontaktnu ploču (CP) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za odvajanje, okrenite je u smjeru kazaljke na satu za ponovno pričvršćivanje.

Vladar

Ravnalo (R) je magnetski pričvršćeno za ručku. Pritisnite sredinu ravnala i uklonite ga kako biste izmjerili lezije na koži.

IceCap®: Da biste podržali svoje mjere suzbijanja infekcije, prebacite jedan od uključenih IceCaps za jednokratnu upotrebu (IC) preko instalirane prednje ploče (CP). Za uklanjanje i odlaganje jednostavno ga izvucite.

Baterija i punjenje

OPREZ: Ovaj uređaj koristi posebnu litij-ionsku bateriju od 3,7 V i 670 mAH, koja se može kupiti samo kod DermLite ili kroz Dermlite distributera. Ni pod kojim okolnostima nemojte koristiti drugu bateriju osim one namijenjene za ovaj uređaj.

Nakon stotina korištenja baterija će se pokvariti, što može rezultirati smanjenim kapacitetom i/ili proširenjem litij-ionskih ćelija. Pratite znakove istrošene baterije koji mogu uključivati smanjeni vijek trajanja baterije, neočekivana gašenja, nepravilno ponašanje ili iznenadni gubitak struje. Ako se primijeti, prestanite koristiti uređaj i nemojte puniti bateriju. Zamijenite bateriju i odložite original u skladu s lokalnim propisima.

Ovaj je uređaj opremljen indikatorom punjenja na četiri razine (CI). Kad je jedinica uključena i potpuno napunjena, zasvetle se sve četiri LED diode. Kad ostane manje od 75% trajanja baterije, zasvijetlit će se tri LED-a. Ako je prazna više od polovice baterije, dvije su LED lampice, dok jedan LED pokazuje da ostaje manje od 25% kapaciteta baterije. Da biste napunili svoj uređaj, priključite isporučeni USB-C na USB kabel na ulaz za punjenje (PP) i bilo koji USB port koji je u skladu sa IEC 60950-1 (5 V). Indikator naboja (CI) pulsira da označi punjenje, s brojem pulsirajućih LED dioda koji odgovaraju razini napunjenosti. Kad je punjenje dovršeno, sve četiri LED indikatorske lampice svijetle. Nakon godina uporabe, možda želite ponovno postaviti bateriju, koja je dostupna samo izravno od DermLite ili od ovlaštenog prodavača DermLite. Nakon stotina korištenja baterija će se pokvariti što će rezultirati smanjenim kapacitetom i/ili proširenjem litij-ionskih ćelija. Pratite znakove istrošene baterije kao što je skraćeno trajanje baterije, neočekivana gašenja,

nepravilno ponašanje ili iznenadni gubitak struje. Ako se primijeti, prestanite koristiti uređaj i nemojte puniti bateriju. Zamijenite bateriju i odložite original u skladu s lokalnim propisima. Za promjenu baterije (B), povucite kotačić (D) tako da ga uhvatite za urez za nokat, odvrnite vijak poklopca baterije (CS) pomoću alata koji se isporučuje uz svaku zamjensku bateriju DL5 i uklonite poklopac baterije (BC). Odspojite mali bijeli utikač baterije (BP) i uklonite bateriju (B). Umestite novu bateriju, ponovno spojite utikač baterije, ponovno pričvrstite poklopac baterije (BC), pričvrstite ga vijkom poklopca (CS) i gurnite kotačić (D) dok ne sjedne na mjesto.

Baza za punjenje

Za punjenje DL5 pomoću baze za punjenje, spojite manji (USBC) kraj isporučene USB kabela na priključak za napajanje (PO) na stražnjoj strani baze za punjenje (CB), a veći (USB) kraj na bilo koji IEC 60950-1 ili IEC62368-1 kompatibilan (5V) USB punjač. Postavite svoj DL5 u bazu za punjenje, s kontaktnom pločom (CP) okrenutom prema bazi za punjenje. Baza za punjenje također se može koristiti za IceCap pohranu.

Rješavanje problema: Najnovije informacije o rješavanju problema potražite na www.dermlite.com. Ako je za vaš uređaj potreban servis, posjetite www.dermlite.com/service ili se obratite lokalnom prodavaču DermLite.

Njega i održavanje

UPOZORENJE: Nisu dopuštene izmjene ove opreme. Vaš je uređaj dizajniran za nesmetan rad. Popravke smije obaviti samo kvalificirano osoblje.

Prije upotrebe na pacijentu, vanjsku stranu vašeg uređaja (osim optičkih dijelova) može se obrisati izopropilnim alkoholom (70 vol.%). Objektiv treba tretirati kao visokokvalitetnu fotoagrafsku opremu i očistiti ga standardnom opremom za čišćenje leća i zaštititi od štetnih kemikalija. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje i ne uranjajte uređaj u tekućinu. Ne autoklavirajte.

Jamstvo: 5 godina za dijelove i rad. Za akumulator vrijedi 1 godina.

Odlaganje: Ovaj uređaj sadrži elektroniku i litij-ionsku bateriju koji se moraju odvojiti za odlaganje i ne mogu se zbrinjivati s kućnim otpadom. Pridržavajte se lokalnih propisa o zbrinjavanju.

Ovaj set uključuje: DermLite DL5 (16 bijelih LED dioda, 4 UV LED diode, 4 PigmentBoost LED diode, 1 bijela Torch LED dioda, sustav leća od 32 mm s povećanjem od 10x, sustav promjenjive polarizacije, uvlačivi odstožnik, uklonjiva prednja ploča s končanicom od 10 mm, čelično ravnalo), kožna torbica za remen, USB kabel za punjenje, baza za punjenje, okular, MCC adapter za mobilni uređaj, plastična futrola za remen (H), 5 IceCapa, krpa od mikrovlakana.

Tehnički opis: Posjetite www.dermlite.com/technical ili kontaktirajte lokalnog prodavača DermLite.

Istruzioni

Uso previsto

Questo dispositivo è destinato a scopi medici per illuminare le superfici del corpo. Viene utilizzato per l'esame visivo non invasivo della pelle intatta.

Questo prodotto a batteria è progettato per un esame esterno solo all'interno di strutture sanitarie professionali da parte di professionisti medici.

Controllare il corretto funzionamento del dispositivo prima dell'uso!

Non utilizzare il dispositivo se sono presenti segni visibili di danneggiamento, malfunzionamento o se il dispositivo funziona in modo non conforme a quanto descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE: non guardare direttamente la luce a LED. I pazienti devono chiudere gli occhi durante l'esame.

In caso di incidente grave con l'uso di questo dispositivo, informare immediatamente DermLite e, se richiesto dalle normative locali, l'autorità sanitaria nazionale.

ATTENZIONE: non usare il dispositivo in aree a rischio di incendio o di esplosione (es. ambienti ricchi di ossigeno).

Attenzione: non guardare direttamente la luce UV.

AVVISO: Questo dispositivo contiene dei magneti. Non utilizzare nelle vicinanze di pacemaker o di altri dispositivi o oggetti sensibili ai campi magnetici.

AVVERTENZA: questo prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche, inclusi cloruro di metilene e cromo esavalente, noti allo Stato della California come causa di cancro o tossicità riproduttiva. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.

Compatibilità elettromagnetica

Questo dispositivo è conforme ai requisiti di livello di emissioni e immunità EMC della norma IEC 60601-1-2: 2014. Le caratteristiche di emissione di questa apparecchiatura la rendono adatta all'uso in ambienti sanitari professionali e residenziali (CISPR 11 Classe B). Questa apparecchiatura offre una protezione adeguata al servizio di comunicazione radio. Nel raro caso di interferenza con il servizio di comunicazione radio, l'utente potrebbe dover adottare misure di mitigazione, come il trasferimento o il riorientamento delle apparecchiature. **AVVERTENZA:** l'uso di questa apparecchiatura adiacente o impiantata con altre apparecchiature deve essere evitato perché potrebbe causare un funzionamento improprio. Se tale uso è necessario, questa apparecchiatura e le altre apparecchiature devono essere osservate per verificare che funzionino normalmente.

AVVERTENZA: l'uso di accessori diversi da quelli forniti dal produttore di questa apparecchiatura può comportare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una riduzione dell'immunità elettromagnetica di questa apparecchiatura e un funzionamento improprio. **AVVERTENZA:** i trasmettitori RF portatili non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a 30 cm (12 pollici) da qualsiasi parte del dispositivo. In caso contrario, potrebbe verificarsi un degrado delle prestazioni di questa apparecchiatura.

Non utilizzare questo dispositivo durante la risonanza magnetica (MRI) o in un ambiente MRI.

IMPORTANTE: prima dell'uso iniziale, caricare la batteria interna agli ioni di litio. Vedere "Batteria e Carica" per i dettagli.

DermLite DL5 è un dermatoscopio tascabile compatibile con smartphone con ingrandimento 10x per la visualizzazione delle strutture cutanee utilizzando luce polarizzata variabile e illuminazione UV.

Tieni il tuo DermLite DL5, con i LED rivolti nella direzione della lesione da esaminare, a circa 12 mm sopra la pelle. Premere l'interruttore principale (M) per accendere il dispositivo in modalità a polarizzazione incrociata. Guarda attraverso l'obiettivo e avvicina o allontana il dispositivo dalla pelle per mettere a fuoco l'immagine. Per la dermatoscopia a contatto con la pelle, ruotare la ghiera di messa a fuoco (FD) per estendere lo spaziatore (S) e mettere a fuoco l'immagine. Tenere premuto l'interruttore principale (M) per circa 1 secondo per spegnere il dispositivo. Per risparmiare energia, l'unità si spegne automaticamente dopo 3 minuti.

Polarizzazione variabile

Toccare il pulsante principale (M) per alternare tra illuminazione a polarizzazione incrociata e non polarizzata. Ruota il pulsante principale per spostarti attraverso la gamma di 9 impostazioni di polarizzazione, da luce polarizzata incrociata a luce non polarizzata a polarizzata parallela. La striscia dell'indicatore (IS) riflette lo stato di polarizzazione corrente, mentre "X" indica la polarizzazione incrociata, "0" rappresenta non polarizzato e "=" sta per polarizzazione parallela.

PigmentBoost®

Mentre la luce bianca è attiva, tocca (PB) per attivare l'illuminazione PigmentBoost di colore arancione oltre alla luce bianca. Il LED indicatore accanto al pulsante PB (PB) si accende. Tocca di nuovo per disattivare.

Modalità UV

Per visualizzare le strutture fluorescenti, toccare il pulsante UV (UV) per attivare i LED con una lunghezza d'onda di 365 nm. Il LED indicatore accanto al pulsante UV (UV) si accende. Toccare nuovamente il pulsante per tornare alla modalità luce bianca precedentemente selezionata.

Torcia elettrica

Per illuminare aree cutanee più grandi o cavità corporee, tocca il pulsante della torcia (T) per attivare un LED non polarizzato bianco ultra brillante. Ruotare l'interruttore principale (M) per regolare la luminosità della torcia.

Regolazione dermoscopia della luminosità

Per regolare la luminosità dei led dermoscopici bianchi, tenere premuto il pulsante della torcia (T) e ruotare contemporaneamente l'interruttore generale (M). In modalità UV o PigmentBoost, tieni premuto il pulsante UV (o PB) e ruota l'interruttore principale per regolare la rispettiva luminosità. La barra dell'indicatore (IB) riflette il livello di luminosità attuale durante la regolazione.

Oculare

Per una visione ottimale, fissare l'oculare (EP) in dotazione sull'anello accessorio (ER).

Dermoscopia da smartphone

Per la dermatoscopia utilizzando uno smartphone o un tablet, fissare saldamente l'adattatore del morsetto MagnetiConnect (MCC) allineato concentricamente sulla fotocamera principale del dispositivo mobile. Collega il tuo DL5 all'anello MCC. Prima di scattare le immagini, estendere il distanziatore (S) alla posizione "0" e pulire la piastra di contatto in vetro (CP).

Rimozione della piastra di contatto

Ruotare la piastra di contatto in vetro (CP) in senso antiorario per staccarla, ruotarla in senso orario per riattaccarla.

Governate

Il righello (R) è fissato magneticamente al manico. Premere al centro del righello e rimuoverlo per misurare le lesioni cutanee.

IceCap®

Per evitare di incorrere in infezioni dannose, chiudere uno degli IceCaps (IC) in dotazione sul faceplate (CP) installato.

Batteria e ricarica

ATTENZIONE: questo dispositivo utilizza una speciale batteria agli ioni di litio da 3,7 V 670 mAh, che può essere acquistata solo da DermLite o da un rivenditore DermLite autorizzato. Non utilizzare in nessun caso una batteria diversa da quella progettata per questa unità.

Dopo centinaia di utilizzi la batteria si deteriorerà, il che potrebbe comportare una capacità ridotta e/o un'espansione delle celle agli ioni di litio. Monitorare i segni di una batteria deteriorata che potrebbero includere una durata ridotta della batteria, arresti imprevisti, comportamento irregolare o improvvisa perdita di potenza. Se osservato, interrompere l'uso del dispositivo e non caricare la batteria. Sostituire la batteria e smaltire l'originale in conformità con le normative locali.

Questo dispositivo è dotato di un Indicatore di carica a quattro livelli (CI).

Quando l'unità è accesa e completamente carica, tutti e quattro i LED sono accesi. Quando rimane meno del 75% di carica, sono illuminati tre LED. Se la batteria è scarica per oltre la metà, due LED sono accesi, mentre un solo LED indica che rimane meno del 25% della capacità della batteria.

Per caricare la batteria, collegare il cavo USB-C in

dotazione alla Porta di ricarica (PP) e a qualsiasi porta USB conforme alla normativa IEC 60950-1 (5 V).

L'indicatore di carica (CI) pulserà per indicare la ricarica, il numero dei LED che pulsano corrisponde al livello di carica.

Quando la ricarica è completa, tutti e quattro i LED sono illuminati.

Quando è totalmente carico, il dispositivo consente approssimativamente 3-8 ore di funzionamento, a seconda del livello di luminosità utilizzato.

Dopo anni di utilizzo, potrebbe essere necessario sostituire la batteria, che è disponibile esclusivamente presso DermLite o presso un rivenditore autorizzato DermLite. Dopo centinaia di utilizzi, la batteria si deteriorerà con conseguente capacità ridotta e/o espansione delle celle agli ioni di litio. Monitorare i segni di una batteria deteriorata, come durata ridotta della batteria, arresti imprevisti, comportamento irregolare o improvvisa perdita di potenza. Se osservato, interrompere l'uso del dispositivo e non caricare la batteria. Sostituire la batteria e smaltire l'originale in conformità con le normative locali. Per sostituire la batteria (B), estrarre il quadrante (D) afferrandolo per la tacca dell'unghia, svitare la vite del coperchio della batteria (CS) utilizzando lo strumento fornito con ciascuna batteria sostituita DL5 e rimuovere il coperchio della batteria (BC). Scollegare la piccola spina bianca della batteria (BP) e rimuovere la batteria (B). Inserire una nuova batteria, ricollegare la spina della batteria, riattaccare il coperchio della batteria (BC), fissarlo con la vite del coperchio (CS) e spingere il quadrante (D) finché non scatta in posizione.

Base di ricarica

Per caricare il tuo DL5 utilizzando la base di ricarica, collega l'estremità più piccola (USBC) del cavo USB in dotazione alla porta di alimentazione (PO) sul retro della base di ricarica (CB) e l'estremità più grande (USB) a qualsiasi IEC 60950 -1 o Caricatore USB conforme a IEC62368-1 (5 V). Posiziona il tuo DL5 nella base di ricarica, con la piastra di contatto (CP) rivolta verso la base di ricarica. La base di ricarica può essere utilizzata anche per lo stoccaggio di IceCap.

Risoluzione dei problemi

Visitare il sito www.dermilite.com per ottenere informazioni aggiornate sulla risoluzione dei problemi. Se il dispositivo necessita di manutenzione, visitare il sito www.dermilite.com/service o contattare il rivenditore locale DermLite.

Cura e manutenzione

ATTENZIONE: non è consentita alcuna modifica di questa apparecchiatura.

Il dispositivo è progettato per un funzionamento senza problemi. Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale di assistenza qualificato.

Prima dell'uso su un paziente, l'esterno del dispositivo (tranne le parti ottiche) può essere pulito con alcool isopropilico (70% vol.). L'obiettivo deve essere trattato come un'apparecchiatura fotografica di alta qualità e deve essere pulito con un'apparecchiatura standard per la pulizia dell'obiettivo e protetto da sostanze chimiche dannose. Non utilizzare detergenti abrasivi o immergere il dispositivo in liquidi. Non sterilizzare in autoclave.

Garanzia: 5 anni per parti e manodopera. La batteria è garantita per 1 anno.

Smaltimento

Questo dispositivo contiene parti elettroniche e una batteria al litio che devono essere separate per lo smaltimento e non possono essere smaltite con i rifiuti domestici. Si prega di osservare le locali norme per lo smaltimento.

Questo set include:

DermLite DL5 (16 LED bianchi, 4 LED UV, 4 LED PigmentBoost, 1 LED Torch bianco, sistema di lenti da 32 mm con ingrandimento 10x, sistema di polarizzazione variabile, distanziatore retrattile, frontalino rimovibile con reticolo da 10 mm, righello in acciaio), custodia da cintura in pelle, Cavo di ricarica USB, base di ricarica, oculare, adattatore per dispositivo mobile MCC, fondina da cintura in plastica (H), 5 IceCaps, panno in microfibra.

Descrizione tecnica

Visitare il sito www.dermilite.com/technical/ o contattare il rivenditore locale DermLite.

Instrukcijas

Paredzētais lietojums

Šī ierīce ir paredzēta medicīniskiem nolūkiem, lai apgaismotu ķermeņa virsmas. To lieto neskartas ādas neinvazīvai vizuālai pārbaudei.

Šīs ar akumulatoru darbināmais izstrādājums ir paredzēts ārsta veiktai ārējai pārbaudei tikai profesionālās veselības aprūpes iestādēs.

Pirms lietošanas pārbaudiet ierīces pareizu darbību! Neizmantojiet ierīci, ja ir redzamas bojājuma, nepareizas darbības pazīmes vai ierīce darbojas tādā veidā, kas neatbilst šajā lietošanas instrukcijā aprakstītajam.

UZMANĪBU: neskatieties tieši LED gaismā. Pārbaudu laikā pacientam jāaizver acis.

Ja rodas nopietns negadījums, izmantojot šo ierīci, nekavējoties informējiet DermLite un, ja to prasa vietējie noteikumi, savu valsts veselības iestādi.

UZMANĪBU: Nelietojiet ierīci ugunsgrēka vai sprādzienbīstamā vietā (piemēram, vidē, kas bagāta ar skābekli).

Uzmanību: neskatieties tieši uz UV gaismu.

BRĪDINĀJUMS: Šis produkts satur magnētus. Nelietojiet elektrokardiostimulatoru vai citu magnētiski jutīgu ierīci vai priekšmetu tuvumā.

BRĪDINĀJUMS: Šis produkts var pakļaut ķīmiskām vielām, ieskaitot metilēnholīdu un sešvērtīgo hromu, par kurām Kalifornijas štats zina vēzi vai reproduktīvo toksicitāti. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni www.P65Warnings.ca.gov.

Elektromagnētiskā saderība

Šī ierīce atbilst standartam IEC 60601-1-2: 2014 EMC emisijas un imunitātes līmeņa prasībām. Šī aprīkojuma emisijas raksturlielumi padara to piemērotu lietošanai profesionālās veselības aprūpes vidē, kā arī dzīvojamā vidē (CISPR 11 B klase). Šis aprīkojums piedāvā atbilstošu radiosakaru pakalpojumu aizsardzību. Retos gadījumos, kad rodas traucējumi radiosakaru pakalpojumā, lietotājam, iespējams, būs jāveic mazināšanas pasākumi, piemēram, jāpārvieto vai jāpārorientē aprīkojums. **BRĪDINĀJUMS:** Jāizvairās no šī aprīkojuma izmantošanas blakus citam aprīkojumam vai ar to sakrātam, jo tas var izraisīt nepareizu darbību. Ja šāda lietošana ir nepieciešama, šīs aprīkojums un pārējais aprīkojums ir jāievēro, lai pārļicinātos, ka tie darbojas normāli.

BRĪDINĀJUMS: Ja izmantojat citus piederumus, nevis tos, kurus piegādājis šis iekārtas ražotājs, tas var izraisīt palielinātu elektromagnētisko izstarojumu vai samazināt šīs ierīces elektromagnētisko imunitāti un izraisīt nepareizu darbību.

BRĪDINĀJUMS: Portatīvos RF raidītājus nedrīkst izmantot tuvāk par 30 cm (12 collām) pret jebkuru ierīces daļu. Pretējā gadījumā šīs iekārtas veikspēja var pasliktināties. Neizmantojiet šo ierīci magnētiskās rezonanses attēlveidošanas (MRI) laikā vai MRI vidē.

SVARĪGI: Pirms pirmās lietošanas, lūdzu, uzlādējiet iekšējo litiņu jonu akumulatoru. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā "Akumulators un uzlāde".

DermLite DL5 ir ar viērtāruni saderīgs kabatas dermatoskops ar 10x palielinājumu ādas struktūru vizualizācijai, izmantojot mainīgu polarizētu gaismu un UV apgaismojumu.

Turiet savu DermLite DL5 ar gaismas diodēm, kas vērsta izmeklējamā bojājuma virzienā, aptuveni 12 mm virs ādas. Nospiediet galveno slēdzi (M), lai ieslēgtu ierīci šķērspolarizētā režīmā. Skatieties caur objektīvu un pārvietojiet ierīci tuvāk vai tālāk no ādas, lai fokusētu attēlu. Lai veiktu dermoskopiju ar saskari ar ādu, pagrieziet fokusa ripu (FD), lai pagarinātu starpliku (S) un fokusētu attēlu. Nospiediet un turiet galveno slēdzi (M) apmēram 1 sekundi, lai izslēgtu ierīci. Lai taupītu enerģiju, ierīce automātiski izslēdzas pēc 3 minūtēm.

Mainīgā polarizācija

Pieskarities galvenajai pogai (M), lai pārslēgtos starp šķērspolarizētu un nepolarizētu apgaismojumu. Pagrieziet galveno pogu, lai pārvietotos pa 9 polarizācijas iestatījumu diapazonu, sākot no šķērspolarizētas un nepolarizētas gaismas līdz paralēli polarizētai gaismai. Indikatora josla (IS) atspoguļo pašreizējo polarizācijas statusu, turpretim "X" apzīmē šķērspolarizāciju, "0" apzīmē nepolarizāciju un "=" apzīmē paralēlo polarizāciju.

PigmentBoost®

Kamēr ir aktīva balta gaisma, pieskarities (PB), lai papildus baltajai gaismai aktivizētu oranžas krāsas PigmentBoost apgaismojumu. Iedegsies indikatora gaismas diode blakus pogai PB (PB). Pieskarities vēlreiz, lai deaktivizētu.

UV režīms

Lai vizualizētu fluorescējošās struktūras, pieskarities pogai UV (UV), lai aktivizētu gaismas diodes ar viļņa garumu 365 nm. Iedegsies indikatora gaismas diode blakus UV pogai (UV). Vēlreiz pieskarities pogai, lai atgrieztos iepriekš atlasītajā baltās gaismas režīmā.

Lukturis

Lai apgaismotu lielākas ādas zonas vai ķermeņa dobumus, pieskarities lukturīša pogai (T), lai aktivizētu īpaši spilgtu baltu nepolarizētu LED. Pagrieziet galveno slēdzi (M), lai pielāgotu lukturīša spilgtumu.

Dermoskopiskā spilgtuma regulēšana

Lai pielāgotu balto dermoskopisko gaismas diožu spilgtumu, turiet nospiestu lukturīša pogu (T) un vienlaikus pagrieziet galveno slēdzi (M). UV vai PigmentBoost režīmā nospiediet un turiet UV (vai PB) pogu un pagrieziet galveno slēdzi, lai pielāgotu attiecīgo spilgtumu. Indikatora josla (IB) atspoguļo pašreizējo spilgtuma līmeni regulēšanas laikā.

Okulārs

Optimālai skatīšanai piestipriniet komplektācijā iekļauto magnētisko okulāru (EP) pie piederumu gredzena (ER).

Viedtālruna dermoskopija

Lai veiktu dermoskopiju, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru, droši piestipriniet MagnetiConnect skavas adapteri (MCC), kas koncentriski novietots virs mobilās ierīces galvenās kameras. Pievienojiet savu DL5 pie KC gredzena. Pirms attēlu uzņemšanas pagariniet starpliku (S) pozīcijā "0" un noslaukiet stikla kontaktplāksni (CP) tīru.

Kontaktu plāksnes noņemšana

Pagrieziet stikla kontaktplāksni (CP) pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to atvienotu, vai pulksteņrādītāja virzienā, lai to atkal piestiprinātu.

Lineāls

Lineāls (R) ir magnētiski piestiprināts pie roktura.

Nospiediet lineāla vidū un noņemiet to, lai izmērītu ādas bojājumus.

IceCap®: lai atbalslītu jūsu infekcijas kontroles pasākumus, uzlieciet vienu no komplektā iekļautajiem vienreizējās lietošanas IceCaps (IC) virs uzstādītās priekšējās plāksnes (CP). Lai noņemtu un iznīcinātu, vienkārši noņemiet to.

Akumulators un uzlāde

UZMANĪBU! Šajā ierīcē tiek izmantots īpašs 3,7 V 670 mAh litiņa jonu akumulators, ko var iegādāties tikai no DermLite vai pilnvarota DermLite izplatītāja. Nekādā gadījumā neizmantojiet citu akumulatoru, izņemot to, kas paredzēts šai ierīcei.

Pēc simtiem lietojumu akumulators pasliktināsies, kā rezultātā var samazināties kapacitāte un/vai litiņa jonu elementu izplešanās. Pārtrauciet lietota akumulatora pazīmes, kas var ietvert samazinātu akumulatora darbības laiku, negaidītu izslēgšanos, nepareizu darbību vai pēkšņu strāvas zudumu. Ja novērojat, pārtrauciet ierīces lietošanu un neuzlādējiet akumulatoru. Nomainiet akumulatoru un atbrīvojieties no oriģināla saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Šī ierīce ir aprīkota ar četrām līmeņu uzlādes indikatoru (CI). Kad iekārta ir ieslēgta un pilnībā uzlādēta, iedegas visas četras gaismas diodes. Kad akumulatora darbības laiks ir mazāks par 75%, iedegas trīs gaismas diodes. Ja vairāk nekā puse akumulatora ir izlādējies, iedegas divas gaismas diodes, bet viena gaismas diode norāda, ka paliek mazāk nekā 25% no akumulatora jaudas. Lai uzlādētu ierīci, pievienojiet komplektācijā ietilpstošo USB-C ar USB kabeli lādēšanas portam (PP) un jebkuram IEC 60950-1 saderīgam (5 V) USB portam. Uzlādes indikators (CI) norāda, ka uzlāde tiek parādīta, un mirgojošo gaismas diožu skaits atbilst uzlādes līmenim. Kad uzlāde ir pabeigta, iedegas visas četras gaismas diodes. Pēc gadiem ilgas lietošanas, iespējams, vēlēšities novietot akumulatoru, kas ir pieejams tikai tieši no DermLite vai pilnvarota DermLite izplatītāja.

Po simtu lietojumu atveju akumulatorus suges, todėl sumažēta talpa ir (arba) išsiplēš ličio jonų elementai. Stebėkite, ar nėra nusidėvėjusios baterijos požymių, pvz.,

sutrumpējes akumulatorius veikimo laikus, netikėti išsijungimai, netinkamas elgesys ar staigus energijos praradimas. Jei pastebėsite, nebenaudokite prietaiso ir neįkraukite akumulatoriaus. Pakeiskite bateriją ir išmeskite originalą laikydami saugiai taisykliu. Norėdami pakeisti bateriją (B), nuimkite ratuką (D), suimdami jį už nago įpjovos, atsukite akumulatoriaus dangtelio varžtą (CS) naudodami įrankį, pateiktą su kiekvienu DL5 keičiamu akumulatoriumi, ir nuimkite akumulatoriaus dangtelį (BC). Atjunkite mažą baltą akumulatoriaus kištuką (BP) ir išimkite akumulatorių (B). Įdėkite naują akumulatorių, vėl prijunkite akumulatoriaus kištuką, vėl uždėkite akumulatoriaus dangtelį (BC), pritvirtinkite jį dangtelio varžtą (CS) ir stumkite ratuką (D), kol jis užsifiksuos.

Įkrovimo bazė

Norėdami įkrauti DL5 naudodami įkrovimo pagrindą, prijunkite mažesnį (USB) pateikto USB laido galą prie maitinimo prievado (PO), esančio įkrovimo pagrindo (CB) gale, o didesnį (USB) galą prijunkite prie bet kurio IEC 60950.-1 arba IEC62368-1 suderinamas (5 V) USB įkroviklis. Įdėkite DL5 į įkrovimo pagrindą taip, kad kontaktinė plokštė (CP) būtų nukreipta į įkrovimo pagrindą. Įkrovimo bazė taip pat gali būti naudojama „IceCap“ laikymui.

Traucėjumeklėšana: jaunāko problēmu novēršanas informāciju skatiet vietnē www.dermlite.com. Ja jūsu ierīcē nepieciešama apkope, apmeklējiet vietni www.dermlite.com/service vai sazinieties ar vietējo DermLite izplatītāju.

Kopšana un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS: Nav atļauts pārveidot šo aprīkojumu. Jūsu ierīce ir paredzēta darbam bez traucējumiem. Remontu drīkst veikt tikai kvalificēts servisa personāls.

Pirms lietošanas pacientam ierīces ārpusi (izņemot optiskās daļas) var notīrīt ar izopropilspirtu (70 tilp.%). Objektīvs jāuzskata par augstas kvalitātes fotoiekārtu, un tas jāfīra ar standarta objektīva tīrīšanas aprīkojumu un jāaizsargā no kaitīgām ķīmiskām vielām. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus un nemērciet ierīci šķidrumā. Neveiciet autoklāvu.

Garantija: 5 gadi detaļām un darbam. Akumulatoram ir garantija 1 gadu.

Likvidēšana: Šajā ierīcē ir elektronika un litiņa jonu akumulators, kas ir jānodala atkritumu iznīcināšanai, un to nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, ievērojiet vietējos atkritumu iznīcināšanas noteikumus.

Šajā komplektā ietilpst:

DermLite DL5 (16 baltas gaismas diodes, 4 UV gaismas diodes, 4 PigmentBoost gaismas diodes, 1 balts Torch LED, 32 mm lēcu sistēma ar 10x palielinājumu, mainīga polarizācijas sistēma, izvelkamais starplikas, noņemama priekšējā plāksne ar 10 mm fīklojumu, tērauda lineāls), ādas jostas futrālis, USB uzlādes kabelis, uzlādes pamatne, okulārs, MCC mobilās ierīces adapteris, plastmasas jostas maciņš (H), 5 IceCaps, mikrošķiedras audums.

Tehniskais apraksts: apmeklējiet vietni www.dermlite.com/technical vai sazinieties ar vietējo DermLite izplatītāju.

Instrukcijos

Paskirtis

Šis prietaisas skirtas medicinos tikslams apšviesti kūno paviršius. Jis naudojamas neinvaziamai nepažeistos odos vizualiniam tyrimui.

Šis baterijomis maitinamas gaminyje yra skirtas išoriniam gydytojų tikrinimui tik profesionaliose sveikatos priežiūros įstaigose.

Prieš naudodami patikrinkite, ar prietaisas veikia tinkamai! Nenaudokite prietaiso, jei yra matomų pažeidimų, gedimo požymių arba prietaisas veikia taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.

ATSARGIAI: nežiūrėkite tiesiai į LED lemputę. Tyrimų metu pacientai turi užmerkti akis.

Atsiradus rimtam šio prietaiso naudoimo incidentui, nedelsdami praneškite „DermLite“ ir, jei to reikalauja vietiniai įstatymai, savo šalies sveikatos priežiūros tarnybai.

ATSARGIAI: Nenaudokite prietaiso gaisro ar sprogiemo vietose (pvz., Aplinkoje, kurioje gausu deguonies).

Dėmesio: nežiūrėkite tiesiai į UV šviesą.

ĮSPĖJIMAS: Šiame gaminyje yra magnetai. Nenaudokite širdies stimuliatorių ar kitų magnetiškai jautrių prietaisų ar daiktų.

ĮSPĖJIMAS: Šis produktas gali paveikti chemikalus, įskaitant metileno chloridą ir šešiavalentį chromą, kurie, Kalifornijos valstijoje žinoma, gali sukelti vėžį ar toksikiškumą reprodukcijai. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.P65Warnings.ca.gov.

Elektromagnetinis suderinamumas

Šis prietaisas atitinka IEC 60601-1-2: 2014 standarto EMC emisijos ir atsparumo reikalavimus. Šios įrangos išmetamųjų teršalų charakteristikos leidžia ją naudoti profesinės sveikatos priežiūros aplinkoje, taip pat gyvenamojoje aplinkoje (CISPR 11 B klasė). Ši įranga suteikia tinkamą radijo ryšio paslaugų apsaugą. Retu atveju, kai trikdoma radijo ryšio tarnyba, vartotojui gali tekti imtis švelninimo priemonių, pavyzdžiui, perkelti ar perorientuoti įrangą. **ĮSPĖJIMAS:** Reikėtų vengti naudoti šią įrangą greta ar sukrauti su ja, nes ji gali netinkamai veikti. Jei toks naudojimas yra būtinas, reikia patikrinti šią įrangą ir kitą įrangą, kad patikrintumėte, ar jos veikia normaliai.

ĮSPĖJIMAS: Naudojant priedus, išskyrus tuos, kuriuos pateikia šios įrangos gamintojas, gali padidėti šios įrangos elektromagnetinis spinduliuavimas arba sumažėti elektromagnetinis atsparumas ir netinkamai veikti. **ĮSPĖJIMAS:** Nešiojamieji radijo siųstuvai turėtų būti naudojami ne arčiau kaip 30 cm (12 colių) nuo bet kurios prietaiso dalies. Priešingu atveju gali pablogėti šios įrangos veikimas.

Nenaudokite šio prietaiso magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) arba MRT aplinkoje.

SVARBU: prieš pirmąjį naudojimą įkelkite vidinę ličio jonų bateriją. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Akumulatorius ir įkrovimas“.

DermLite DL5 yra su išmaniuoju telefonu suderinamas kišeninis dermatoskopas su 10 kartų padidiniu, skirtas vizualizuoti odos struktūras naudojant kintamą polarizuotą šviesą ir UV apšvietimą.

Laikykite savo DermLite DL5, kurio šviesos diodai būtų nukreipti tiriamo pažeidimo kryptimi, maždaug 12 mm virš odos. Paspauskite pagrindinį jungiklį (M), kad įjungtumėte įrenginį kryžminiu polarizuotu režimu. Žiūrėkite pro objektyvą ir patraukite prietaisą arčiau arba toliau nuo odos, kad sufokusuotumėte vaizdą. Jei norite atlikti dermatoskopiją su sąlyčiu su oda, pasukite fokusavimo ratuką (FD), kad išplėstumėte tarpiklį (S) ir sufokusuotumėte vaizdą. Paspauskite ir palaikykite pagrindinį jungiklį (M) maždaug 1 sekundę, kad išjungtumėte įrenginį. Siekiant taupyti energiją, įrenginys automatiškai išsijungia po 3 minučių.

Kintamoji polarizacija

Bakstelėkite pagrindinį mygtuką (M), kad perjungtumėte tarp kryžminio polarizuoto ir nepolarizuoto apšvietimo. Pasukite pagrindinį mygtuką, kad pereitumėte per 9 polarizacijos nustatymų diapazoną, nuo kryžminės polarizacijos iki nepolarizuotos iki lygiagrečios polarizacijos. Indikatoriaus juostelė (IS) rodo esamą polarizaciją, o „X“ žymi kryžminę polarizaciją, „0“ reiškia

nepolarizaciją, o „=“ reiškia lygiagrečią polarizaciją.

PigmentBoost®

Kol įjungta balta šviesa, bakstelėkite (PB), kad suaktyvintumėte ne tik baltą, bet ir oranžinės spalvos „PigmentBoost“ apšvietimą. Šalia PB mygtuko (PB) užsideds indikatorius. Bakstelėkite dar kartą, kad išjungtumėte.

UV režimas

Norėdami vizualizuoti fluorescencines struktūras, bakstelėkite UV mygtuką (UV), kad suaktyvintumėte 365 nm bangos ilgio šviesos diodus. Šalia UV mygtuko (UV) užsideds indikatorius. Norėdami grįžti į anksčiau pasirinktą baltos šviesos režimą, bakstelėkite mygtuką dar kartą.

Žibintuvėlis

Norėdami apšviesti didesnes odos vietas ar kūno ertmes, bakstelėkite žibintuvėlio mygtuką (T), kad įjungtumėte itin ryškį baltą nepolarizuotą šviesos diodą. Pasukite pagrindinį jungiklį (M), kad sureguliuotumėte žibintuvėlio ryškumą.

Dermoskopinis ryškumo reguliavimas

Norėdami sureguliuoti baltų dermoskopinių šviesos diodų ryškumą, laikykite paspaudę žibintuvėlio mygtuką (T) ir tuo pačiu metu pasukite pagrindinį jungiklį (M). Kai veikia UV arba PigmentBoost režimas, paspauskite ir palaikykite UV (arba PB) mygtuką ir pasukite pagrindinį jungiklį, kad sureguliuotumėte atitinkamą ryškumą. Indikatoriaus juosta (IB) atspindi esamą ryškumo lygį reguliavimo metu.

Okuliaras

Kad žiūrėtumėte optimaliai, pritvirtinkite pridedamą okuliarą (EP) prie priedo žiedo (ER).

Išmaniojo telefono dermoskopija

Norėdami atlikti dermoskopiją išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu, tvirtai pritvirtinkite MagnetiConnect spaustuvo adapterį (MCC) koncentriškai išlygiuotą virš mobiliojo įrenginio pagrindinės kameros. Pritvirtinkite DL5 prie MCC žiedo. Prieš fotografuodami, ištraukite tarpiklį (S) iš „0“ padėti ir nuvalykite stiklinę kontaktinę plokštę (CP).

Kontaktinės plokštės nuėmimas

Pasukite stiklinę kontaktinę plokštę (CP) prieš laikrodžio rodyklę, kad atsijungtumėte, ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad vėl pritvirtintumėte.

Valdovas

Liniuotė (R) yra magnetiškai pritvirtinta prie rankenos. Paspauskite liniuotės vidurį ir nuimkite, kad išmatuotų odos pažeidimus.

„IceCap®“: norėdami palaikyti savo infekcijos kontrolės priemones, uždėkite vieną iš pridedamų vienkartinį „IceCaps“ (IC) virš įmontuoto priekinio skydelio (CP). Norėdami išimti ir išmesti, tiesiog ištraukite.

Baterija ir įkrovimas

ĮSPĖJIMAS: Šiame įrenginyje naudojama speciali 3,7 V 670 mAh ličio jonų baterija, kurią galima įsigyti tik iš „DermLite“ arba iš įgaliotojo „DermLite“ pardavėjo. Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite kitos baterijos, išskyrus skirtą šiam įrenginiui.

Po šimtų naudojimo atvejų akumulatorius suges, todėl gali sumažėti talpa ir (arba) išsiplėsti ličio jonų elementai. Stebėkite nusidėvėjusios baterijos požymius, įskaitant sutrumpėjusį akumulatoriaus veikimo laiką, netikėtus išjungimus, netinkamą elgesį arba staigų energijos praradimą. Jei pastebėsite, nebenaudokite prietaiso ir neįkraukite akumulatoriaus. Pakeiskite bateriją ir išmeskite originalią laikydami vietinių taisyklių. Šiame įrenginyje yra keturių lygių įkrovos indikatorius (CI). Kai įrenginys įjungtas ir visiškai įkraunamas, užsideda visi keturi šviesos diodai. Kai lieka mažiau nei 75% akumulatoriaus energijos, dega trys šviesos diodai. Jei išieikvojama daugiau nei pusė akumulatoriaus, dega du šviesos diodai, o vienas šviesos diodas rodo, kad liko mažiau nei 25% akumulatoriaus talpos. Norėdami įkrauti savo įrenginį, prijunkite pridedamą USB-C prie USB kabelio prie įkrovimo prievado (PP) ir bet kurio IEC 60950-1 suderinamo (5 V) USB prievado. „Charge Indicator“ (CI) impulsai rodo įkrovimą, o pulsuojančių šviesos diodų skaičius atitinka įkrovos lygį. Kai įkrovimas baigtas, užsideda visi keturi indikatoriai. Po ilgo naudojimo galite pakeisti akumulatorių, kurį galima įsigyti tiesiogiai iš „DermLite“ arba įgaliotojo „DermLite“ atstovo. Po šimtų naudojimo atvejų akumulatorius suges, todėl sumažės talpa ir (arba) išsiplėsti ličio jonų elementai.

Stebėkite, ar nėra nusidėvėjusios baterijos požymių, pvz., sutrumpėjęs akumulatoriaus veikimo laikas, netikėti išsijungimai, netinkamas elgesys ar staigus energijos praradimas. Jei pastebėsite, nebenaudokite prietaiso ir neįkraukite akumulatoriaus. Pakeiskite bateriją ir išmeskite originalią laikydami vietinių taisyklių. Norėdami pakeisti bateriją (B), nuimkite ratuką (D), suimdami jį už nago įpjovos, atsukite akumulatoriaus dangtelio varžtą (CS) naudodami įrankį, pateiktą su kiekvienu DL5 keičiamu akumulatoriumi, ir nuimkite akumulatoriaus dangtelį (BC). Atjunkite mažą baltą akumulatoriaus kištuką (BP) ir išimkite akumulatorių (B). Įdėkite naują akumulatorių, vėl prijunkite akumulatoriaus kištuką, vėl uždėkite akumulatoriaus dangtelį (BC), pritvirtinkite jį dangtelio varžtu (CS) ir stumkite ratuką (D), kol jis užsifiksuos.

Įkrovimo bazė

Norėdami įkrauti DL5 naudodami įkrovimo pagrindą, prijunkite mažesnę (USB) pateiktą USB laido galį prie maitinimo prievado (PO), esančio įkrovimo pagrindo (CB) gale, o didesnę (USB) galą prijunkite prie bet kurio IEC 60950.-1 arba IEC62368-1 suderinamos (5 V) USB įkroviklis. Įdėkite DL5 į įkrovimo pagrindą taip, kad kontaktinė plokštė (CP) būtų nukreipta į įkrovimo pagrindą. Įkrovimo bazė taip pat gali būti naudojama „IceCap“ laikymui.

Trikčių šalinimas: naujausios informacijos apie trikčių diagnostiką ieškokite svetainėje www.derm-lite.com. Jei jūsų prietaisą reikia prižiūrėti, apsilankykite www.derm-lite.com/service arba susisiekite su vietiniu DermLite atstovu.

Priežiūra ir priežiūra

ĮSPĖJIMAS: Šios įrangos modifikuoti neleidžiama. Jūsų prietaisas skirtas darbu be problemų. Remontas gali būti atliekamas tik kvalifikuoto aptarnavimo personalo.

Prieš naudojimą pacientui, jūsų prietaiso išorę (išskyrus optines dalis) galima švariai nušluostyti izopropilo alkoholiu (70 tūrio proc.). Lėšis turėtų būti traktuojamas kaip aukštos kokybės fotografijos įranga, ji reikia valyti standartinę lėšų valymo įrangą ir apsaugoti nuo kenksmingų cheminių medžiagų. Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių ir nemerkitė prietaiso į skystį. Negalima autoklavuoti.

Garantija: 5 metų atsarginėms dalims ir darbiui. Akumulatoriui suteikiama garantija 1 metus.

Šalinimas: Šiame prietaise yra elektronika ir ličio jonų akumulatorius, kurie turi būti atskirti utilizavimui ir negali būti išmesti kartu su buitineis atliekomis. Laikykitės vietinių atliekų tvarkymo taisyklių.

Į šį rinkinį įeina:

„DermLite DL5“ (16 baltų šviesos diodų, 4 UV šviesos diodai, 4 „PigmentBoost“ šviesos diodai, 1 baltas žibintuvėlis LED, 32 mm objektyvų sistema su 10 kartų padidiniu, kintamos polarizacijos sistema, ištraukiamas tarpiklis, nuimama priekinė plokštė su 10 mm tinkeliu, plieninė liniuotė), odinis diržo dėklas, USB įkrovimo laidas, įkrovimo bazė, okuliaras, MCC mobiliojo įrenginio adapteris, plastikinis diržo dėklas (H), 5 ledukai, mikroplošto šluostė.

Techninis aprašymas: Apsilankykite www.derm-lite.com/technical arba susisiekite su vietiniu DermLite atstovu.

Utasítás

Rendeltetés szerű használat

Ez az eszköz orvosi célokra szolgál a testfelületek megvilágítására. Az ép bőr nem invazív vizuális vizsgálatára használják.

Ezt az akkumulátorral működtetett terméket kizárólag az egészségügyi szakemberek által végzett, professzionális egészségügyi intézményekben történő külső ellenőrzésre tervezték.

Használat előtt ellenőrizze a készülék megfelelő működését!

Ne használja a készüléket, ha sérülésre, meghibásodásra utaló jelek láthatók, vagy ha a készülék a jelen használati útmutatóban leírtaknak nem megfelelő módon működik.

VIGYÁZAT: Ne nézzen közvetlenül a LED-lámpába. A betegeknek kell csukniuk a szemüket a vizsgálatok során.

A készülék használatával kapcsolatos súlyos esemény esetén azonnal értesítse a DermLite készüléket, és ha a helyi előírások megkövetelik, a nemzeti egészségügyi hatóságot.

VIGYÁZAT: Ne használja a készüléket tűz vagy robbanásveszélyes környezetben (például oxigénben gazdag környezetben).

Vigyázat: Ne nézzen közvetlenül az UV-fényre.

VIGYÁZAT: Ez a termék mágneseket tartalmaz. Ne használja a szívritmus-szabályozók vagy más mágneses érzékeny eszközök vagy tárgyak közelében.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék olyan vegyi anyagokhoz tehető ki, beleértve a metilén-kloridot és a hat vegyértékű krómot, amelyekről Kalifornia állam szerint rákot vagy reprodukció toxicitást okozhat. További információ a www.P65Warnings.ca.gov oldalon található.

Elektromágneses kompatibilitás

Ez a készülék megfelel az IEC 60601-1-2: 2014 szabvány EMC-kibocsátási és immunitási szintjének követelményeinek. Ennek a berendezésnek a kibocsátási tulajdonságai alkalmassá teszik a felhasználást professzionális egészségügyi környezetben, valamint lakókörnyezetben (CISPR 11 B osztály). Ez a berendezés megfelelő védelmet nyújt a rádiókommunikációs szolgáltatások számára. A rádiókommunikációs szolgáltatások zavarása esetén a felhasználónak enyhítő intézkedéseket kell hoznia, például át kell helyezni vagy át kell irányítani a berendezéseket. **VIGYÁZAT:** Kerülje el a berendezés használatát más berendezés mellett vagy egymásra rakva, mert az nem megfelelő működést eredményezhet. Ha ilyen felhasználásra van szükség, akkor ezt a felszerelést és a többi berendezést be kell tartani, hogy ellenőrizhessük, működnek-e rendesen.

FIGYELMEZTETÉS: A berendezés gyártójától eltérő kiegészítők használata megnöveli az elektromágneses sugárzást vagy csökkentheti a készülék elektromágneses immunitását, és nem megfelelő működést eredményezhet. **VIGYÁZAT:** A hordozható RF adókat legfeljebb 30 cm-re (12 hüvelyk) szabad használni a készülék bármely részéhez. Ellenkező esetben a berendezés teljesítménye romlik.

Ne használja ezt a készüléket mágneses rezonancia képalkotás (MRI) vagy MRI környezetben.

FONTOS: Az első használat előtt tölts fel a belső lítium-ion akkumulátort. További részletek: „Akkumulátor és töltés”.

A DermLite DL5 egy okostelefonnal kompatibilis zsebdermatoszkóp 10-szeres nagyítással a bőrszerkezetek megjelenítéséhez változó polarizált fény és UV megvilágítás segítségével.

Tartsa a DermLite DL5-öt úgy, hogy a LED-ek a vizsgálóoldali lézió irányába nézzenek, körülbelül 12 mm-rel a bőr felett. Nyomja meg a főkapcsolót (M), hogy bekapcsolja a készüléket keresztpolarizált módban. Nézzon át a lencsén, és vigye közelebb vagy távolabb a készüléket a bőrtől a kép fókuszálásához. Bőrrrel érintkező dermoszkópiához forgassa el a fókuszlámpát (FD) a távtartó (S) meghosszabbításához és a kép fókuszálásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsolót (M) körülbelül 1 másodpercig a készülék kikapcsolásához. Az energiatakarékosság érdekében a készülék 3 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Változó polarizáció

Érintse meg a fő gombot (M) a keresztpolarizált és a nem polarizált megvilágítás közötti váltáshoz. Forgassa el a fő gombot, hogy a 9 polarizációs beállítás között mozogjon, a keresztpolarizációtól a nem polarizáltól át a párhuzamos polarizációig. A jelzőcsík (IS) az aktuális polarizáció állapotát tükrözi, míg az „X” keresztpolarizációt, a „0” a nem polarizáltat, a „=” pedig a párhuzamos polarizációt jelöli.

PigmentBoost®

Amíg a fehér fény aktív, érintse meg a (PB) gombot a fehér fény mellett a narancssárga színű PigmentBoost világitás aktiválásához. A PB gomb (PB) melletti jelző LED kigyullad. Érintse meg újra a kikapcsoláshoz.

UV mód

A fluoreszkáló struktúrák megjelenítéséhez érintse meg az UV gombot (UV) a 365 nm hullámhosszú LED-ek aktiválásához. Az UV gomb (UV) melletti jelző LED kigyullad. Érintse meg ismét a gombot, hogy visszatérjen az előzőleg kiválasztott fehér fény módba.

Zseblámpa

Nagyobb bőrtürelmek vagy testüreg megvilágításához érintse meg a zseblámpa gombot (T) az ultrafényes fehér, nem polarizált LED aktiválásához. Forgassa el a főkapcsolót (M) a zseblámpa fényerejének beállításához.

Dermoszkópos fényerő beállítás

A fehér dermoszkópos LED-ek fényerejének beállításához tartsa lenyomva a zseblámpa gombot (T), és egyidejűleg forgassa el a főkapcsolót (M). UV vagy PigmentBoost módban nyomja meg és tartsa lenyomva az UV (vagy PB) gombot, és fordítsa el a főkapcsolót a megfelelő fényerő beállításához. A jelzősáv (IB) tükrözi az aktuális fényerőszintet a beállítás során.

Szemlencse

Az optimális látás érdekében rögzítse a mellékelt mágneses szemlencsét (EP) a tartozékgyűrűhöz (ER).

Okostelefon dermoszkópia

Okostelefonnal vagy táblagéppel végzett dermoszkópiához rögzítse biztonságosan a MagnetiConnect bilincs adaptert (MCC) koncentrikusan a mobilkészítők fő kamerája fölé. Csatlakoztassa a DL5-öt az MCC gyűrűhöz. A képek készítése előtt húzza ki a távtartót (S) a „0” helyzetbe, és törölje tisztára az üveg érintkezőlemezt (CP).

Az érintkezőlemez eltávolítása

Forgassa el az üveg érintkezőlemezt (CP) az óramutató járásával ellentétes irányba a leválasztáshoz, az óramutató járásával megegyező irányba az újbóli rögzítéshez.

Vonalzó

A vonalzó (R) mágnesesen van rögzítve a fogantyúhoz. Nyomja le a vonalzó közepét, és távolítsa el a bőrváltozások méréséhez.

IceCap®: A fertőzés elleni küzdelem érdekében támogassa a mellékelt eldobható IceCaps (IC) egyikét a telepített előlapra (CP). Az eltávolításhoz és a hulladékkezeléshez egyszerűen húzza le.

Akkumulátor és töltés

VIGYÁZAT: Ez az eszköz speciális 3,7 V-os 670 mAh-s lítium-ion akkumulátort használ, amely csak a DermLite-től vagy egy hivatalos DermLite-kereskedőtől vásárolható meg. Semmilyen körülmények között ne használjon az ehhez a készülékhez tervezettől eltérő akkumulátort.

Több száz használat után az akkumulátor tönkremegy, ami a kapacitás csökkenéséhez és/vagy a lítium-ion cella kitérítéséhez vezet. Figyelje meg az akkumulátor leromlott állapotára utaló jeleket, mint például az akkumulátor élettartamának csökkenése, váratlan leállások, szabálytalan viselkedés vagy hirtelen áramkimaradás. Ha ezt észleli, hagyja abba a készülék használatát, és ne tölts fel az akkumulátort. Cserélje ki az akkumulátort, és a helyi előírásoknak megfelelően dobja ki az eredetit.

Ez a készülék négy szintű töltéjelzővel (CI) van felszerelve. Amikor az egységet bekapcsolják és teljesen feltöltik, mind a négy LED kigyullad. Ha az akkumulátor élettartamának kevesebb, mint 75% -a marad, három LED világít. Ha az akkumulátor több mint fele lemerül, két LED világít, míg egyetlen LED azt jelzi, hogy az akkumulátor kapacitásának kevesebb mint 25% -a marad meg. A készülék feltöltéséhez csatlakoztassa a mellékelt USB-C USB-kábelt a töltőporthoz (PP) és az IEC 60950-1

kompatibilis (5 V) USB porthoz. A töltéjelző (CI) impulzusokkal jelzi a töltést, és a töltési szintnek megfelelő impulzusos LED-ek száma. A töltés befejezésekor mind a négy jelzőfény világít. Évekig tartó használat után érdemes újratelepíteni az akkumulátort, amely csak közvetlenül a DermLite-től vagy egy hivatalos DermLite-kereskedőtől szerezhető be.

Több száz használat után az akkumulátor elhasználódik, ami csökkenti a kapacitást és/vagy a lítium-ion cella kitérülését. Figyelje meg az akkumulátor meghibásodására utaló jeleket, mint például az akkumulátor élettartamának csökkenése, váratlan leállások, szabálytalan viselkedés vagy hirtelen áramkimaradás. Ha ezt észleli, hagyja abba a készülék használatát, és ne tölts fel az akkumulátort. Cserélje ki az akkumulátort, és a helyi előírásoknak megfelelően dobja ki az eredetit. Az elem cseréjéhez (B) a körmenél fogva húzza le a tárcsát (D), csavarja ki az akkumulátorfedél csavarját (CS) az egyes DL5 csereakkumulátorokhoz mellékelt szerszámmal, és vegye le az elemfedelét (BC). Húzza ki a kis fehér akkumulátordugót (BP), és vegye ki az akkumulátort (B). Helyezzen be egy új akkumulátort, dugja vissza az akkumulátordugót, helyezze vissza az akkumulátorfedelét (BC), rögzítse a fedél csavarjával (CS), és nyomja be a tárcsát (D), amíg a helyére nem pattan.

Töltőbázis

A DL5 töltőtálpal használatával történő töltéséhez csatlakoztassa a mellékelt USB-kábel kisebbik (USBC) végét a töltőtálpal (CB) hátulján lévő tápcsatlakozóhoz (PO), a nagyobbik (USB) végét pedig bármely IEC 60950-hez. -1 ill. IEC62368-1 kompatibilis (5V) USB-töltő. Helyezze a DL5-öt a töltőtálpalba úgy, hogy az érintkezőlemez (CP) a töltőtálpal felé nézzen. A töltőbázis IceCap tárolására is használható.

Hibaelhárítás: Kérjük, ellenőrizze a www.dermlite.com webhelyen a legfrissebb hibaelhárítási információkat. Ha az eszköz javítását igényli, keresse fel a www.dermlite.com/service webhelyet, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi DermLite kereskedővel.

Ápolás és karbantartás

VIGYÁZAT: A berendezés módosítása nem megengedett. A készüléket problémamentes működésre tervezték. Javítást csak szakképzett szerelő végezhet.

A páciensnél történő használat előtt a készülék külsejét (az optikai alkatrészeket kivéve) megtisztíthatjuk izopropil-alkohollal (70% főtartalom). A lencsét minőségi fényképezési berendezésként kell kezelni, a lencsét tisztító szokásos berendezésekkel meg kell tisztítani, és védeni kell a káros vegyi anyagoktól. Ne használjon súrolószert és ne merítse a készüléket folyadékba. Ne autoklávozzon.

Garancia: 5 év alkatrészekre és munkára. Az akkumulátor 1 évre érvényes.

Ártalmatlanítás: Ez a készülék elektronikát és lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amelyeket el kell különíteni a megsemmisítésre, és nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérjük, vegye figyelembe a helyi hulladékkezelési előírásokat.

Ez a készlet a következőket tartalmazza: DermLite DL5 (16 fehér LED, 4 UV LED, 4 PigmentBoost LED, 1 fehér Torch LED, 32 mm-es lencserendszer 10-szeres nagyítással, változtatható polarizációs rendszer, visszahúzható távtartó, eltávolítható előlap 10 mm-es irányzékkal, acél vonalzó), bőr övtök, USB töltőkábel, töltőtálpal, szemlencse, MCC mobilkészítő adapter, műanyag övtök (H), 5 db IceCap, mikroszálas kendő.

Műszaki leírás: Látogasson el a www.dermlite.com/technical webhelyre, vagy lépjen kapcsolatba a helyi DermLite kereskedővel.

Instructies

Beoogd gebruik

Dit apparaat is bedoeld voor medische doeleinden om lichaamsoppervlakken te verlichten. Het wordt gebruikt voor niet-invasief visueel onderzoek van intacte huid.

Dit op batterijen werkende product is uitsluitend ontworpen voor uitwendig onderzoek binnen professionele gezondheidszorg door medische professionals.

Controleer vóór gebruik de juiste werking van het apparaat! Gebruik het apparaat niet als er zichtbare tekenen van schade of storing zijn, of als het apparaat werkt op een manier die niet overeenkomt met wat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven.

LET OP: Kijk niet rechtstreeks in het LED-licht. Patiënten moeten hun ogen sluiten tijdens de onderzoeken.

In geval van een ernstig incident met het gebruik van dit apparaat, dient u DermLite onmiddellijk op de hoogte te stellen en, indien vereist door de lokale regelgeving, uw nationale gezondheidsinstantie.

OPGELET: Gebruik dit apparaat niet in brand- of explosiesicogebieden (bijv. zuurstofrijke omgeving).

Let op: Kijk niet rechtstreeks naar UV-licht.

WAARSCHUWING: Dit apparaat bevat magneten. Niet gebruiken in de nabijheid van pacemakers of magnetisch gevoelige apparaten of voorwerpen.

WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën, waaronder methyleenchloride en zeswaardig chroom, waarvan in de staat Californië bekend is dat ze kanker of reproductietoxiciteit veroorzaken. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.

Elektromagnetische compatibiliteit

Dit apparaat voldoet aan de EMC-emissie- en immuniteitsnormen van de norm IEC 60601-1-2: 2014. De emissiekenmerken van deze apparatuur maken het geschikt voor gebruik in zowel professionele gezondheidszorg als in woonomgevingen (CISPR 11 Klasse B). Deze apparatuur biedt voldoende bescherming voor radiocommunicatiediensten. In het zeldzame geval van interferentie met de radiocommunicatiedienst, moet de gebruiker mogelijk mitigerende maatregelen nemen, zoals het verplaatsen of heroriënteren van apparatuur.

WAARSCHUWING: Gebruik van deze apparatuur naast of gestapeld op andere apparatuur moet worden vermeden, omdat dit kan leiden tot onjuist gebruik. Als een dergelijk gebruik noodzakelijk is, moeten deze apparatuur en de andere apparatuur worden gecontroleerd om te controleren of ze normaal werken.

WAARSCHUWING: Het gebruik van andere accessoires dan de accessoires die door de fabrikant van deze apparatuur zijn geleverd, kan leiden tot verhoogde elektromagnetische emissies of verminderde elektromagnetische immuniteit van deze apparatuur en kan leiden tot onjuist gebruik.

WAARSCHUWING: draagbare RF-zenders mogen niet dichterbij dan 30 cm (12 inch) bij enig onderdeel van het apparaat worden gebruikt. Anders kunnen de prestaties van deze apparatuur achteruitgaan.

Gebruik dit apparaat niet tijdens magnetische resonantie beeldvorming (MRI) of in een MRI-omgeving.

BELANGRIJK: Laad voor het eerste gebruik de interne lithium-ionbatterij op. Zie "Batterij en opladen" voor meer informatie.

DermLite DL5 is een smartphone-compatibele pocketdermatoscoop met 10x vergroting voor het visualiseren van huidstructuren met behulp van variabel gepolariseerd licht en UV-verlichting.

Houd uw DermLite DL5, met de LED's gericht in de richting van de te onderzoeken laesie, ongeveer 12 mm boven de huid. Druk op de hoofdschakelaar (M) om het apparaat in kruisgepolariseerde modus in te schakelen. Kijk door de lens en beweeg het apparaat dichterbij of verder weg van de huid om het beeld scherp te stellen. Draai voor dermatoscopie met huidcontact aan de focusschijf (FD) om de afstandhouder (S) uit te schuiven en het beeld scherp te stellen. Houd de hoofdschakelaar (M) ongeveer 1 seconde ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Om stroom te besparen, wordt het apparaat na 3 minuten automatisch uitgeschakeld.

Variabele polarisatie

Tik op de hoofdknop (M) om te schakelen tussen kruisgepolariseerde en niet-gepolariseerde verlichting. Draai aan de hoofdknop om door het bereik van 9 polarisatie-instellingen te gaan, van kruisgepolariseerd via niet-gepolariseerd tot parallel gepolariseerd licht. De indicatorstrip (IS) geeft de huidige polarisatiestatus weer, terwijl "X" kruisgepolariseerd markeert, "O" staat voor niet-gepolariseerd en "=" staat voor parallel polarisatie.

PigmentBoost®

Tik terwijl wit licht actief is op (PB) om naast wit licht ook de oranje PigmentBoost-verlichting te activeren. De indicator-LED naast de PB-knop (PB) gaat branden. Tik nogmaals om te deactiveren.

UV-modus:

Om fluorescerende structuren te visualiseren, tik u op de UV-knop (UV) om LED's met een golflengte van 365 nm te activeren. De indicatie-LED naast de UV-knop (UV) gaat branden. Tik nogmaals op de knop om terug te keren naar de eerder geselecteerde witlichtmodus.

Zaklamp

Om grotere huidgebieden of lichaamsholten te verlichten, tik u op de zaklampknop (T) om een ultraheldere witte niet-gepolariseerde LED te activeren. Draai aan de hoofdschakelaar (M) om de helderheid van de zaklamp aan te passen.

Dermoscopische helderheidsaanpassing

Om de helderheid van de witte dermoscopische LED's aan te passen, houdt u de zaklampknop (T) ingedrukt en draait u tegelijkertijd aan de hoofdschakelaar (M). Houd in de UV- of PigmentBoost-modus de UV-knop (of PB) ingedrukt en draai aan de hoofdschakelaar om de respectieve helderheid aan te passen. De indicatorbalk (IB) geeft het huidige helderheidsniveau weer tijdens de aanpassing.

Oclair

Voor een optimale weergave bevestigt u het meegeleverde oclair (EP) op de accessoirering (ER).

Smartphone-dermoscopie

Voor dermoscopie met een smartphone of tablet, bevestigt u de MagnetConnect-klemadapter (MCC) stevig concentrisch uitgelijnd over de hoofdcamera van uw mobiele apparaat. Bevestig uw DL5 aan de MCC-ring. Trek de afstandhouder (S) uit tot de "0"-positie en veeg de glazen contactplaat (CP) schoon voordat u foto's maakt.

De contactplaat verwijderen

Draai de glazen contactplaat (CP) tegen de klok in om hem los te maken, draai hem met de klok mee om hem weer te bevestigen.

Heerser

De liniaal (R) is magnetisch aan het handvat bevestigd. Druk in het midden van de liniaal en verwijder deze om huidlaesies te meten.

IceCap®

Ter ondersteuning van uw maatregelen voor infectiebestrijding, klikt u een van de meegeleverde wegwerp IceCaps (IC) op de geïnstalleerde voorplaat (CP).

Batterij en opladen

LET OP: Dit apparaat maakt gebruik van een speciale 3,7 V 670 mAh lithium-ionbatterij, die alleen kan worden gekocht bij DermLite of bij een erkende DermLite-dealer. Gebruik onder geen enkele omstandigheid een andere batterij dan degene die voor dit apparaat is ontworpen.

Na honderden keren gebruik zal de batterij verslechteren, wat kan resulteren in verminderde capaciteit en/of uitbreiding van de lithium-ioncel. Houd de tekenen van een slechte batterij in de gaten, zoals een verminderde levensduur van de batterij, onverwachte uitschakelingen, grillig gedrag of plotseling stroomverlies. Als u dit constateert, stop dan met het gebruik van het apparaat en laad de batterij niet op. Vervang de batterij en gooi het origineel weg in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

Dit apparaat is uitgerust met een laadindicator (CI) met vier niveaus. Als het toestel is ingeschakeld en volledig is opgeladen, lichten alle vier LED's op. Als het accuniveau minder dan 75% bedraagt, lichten drie LED's op. Als de accu voor meer dan de helft leeg is, branden er twee LED's. Een enkele LED duikt op een resterende accucapaciteit van minder dan 25%.

Om uw apparaat op te laden, sluit u de meegeleverde USB-C naar USB-kabel aan op de laadpoort (PP) en een

(5V) USB-poort die voldoet aan IEC 60950-1.

De laadindicator (CI) knippert om het laden aan te geven. Het aantal knipperende LED's komt overeen met het laadniveau.

Als de accu volledig is opgeladen, lichten de vier indicatie-LED's op. Als het volledig is opgeladen, werkt het apparaat ongeveer 3-8 uur, afhankelijk van het gebruikte helderheidsniveau.

Na jaren van gebruik wilt u mogelijk de accu vervangen. Deze is enkel beschikbaar bij DermLite of een geautoriseerde dealer van DermLite.

Na honderden keren gebruik zal de batterij verslechteren, wat resulteert in een verminderde capaciteit en/of uitbreiding van de lithium-ioncel. Controleer op tekenen van een slechte batterij, zoals een kortere levensduur van de batterij, onverwachte afsluitingen, grillig gedrag of plotseling stroomverlies. Als u dit constateert, stop dan met het gebruik van het apparaat en laad de batterij niet op.

Vervang de batterij en gooi het origineel weg in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Om de batterij (B) te vervangen, trekt u de schijf (D) los door deze bij de inkeping in de vingermagel vast te pakken, draait u de schroef van het batterijdeksel (CS) los met behulp van het gereedschap dat bij elke DL5-vervangingsbatterij wordt geleverd, en verwijdert u het batterijdeksel (BC). Koppel de kleine witte batterijstekker (BP) los en verwijder de batterij (B). Plaats een nieuwe batterij, sluit de batterijstekker opnieuw aan, maak het batterijdeksel (BC) opnieuw vast, zet het vast met de dekselschroef (CS) en druk de draaiknop (D) naar binnen totdat deze op zijn plaats klikt.

Oplaadbasis

Om uw DL5 op te laden met behulp van het oplaadstation, sluit u het kleinere uiteinde (USBC) van de meegeleverde USB-kabel aan op de voedingspoort (PO) aan de achterkant van het oplaadstation (CB) en het grotere uiteinde (USB) op een willekeurige IEC 60950-1 of IEC62368-1-compatibele (5V) USB-oplader. Plaats uw DL5 in het oplaadstation, met de contactplaat (CP) naar het oplaadstation gericht. Het oplaadstation kan ook worden gebruikt voor het opbergen van IceCap.

Probleemoplossingen

Kijk op www.derm-lite.com voor de meest actuele informatie over probleemoplossingen. Als uw apparaat onderhoud nodig heeft, gaat u naar www.derm-lite.com/service of neem contact op met uw lokale DermLite-dealer.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING: Wijzigingen aan deze apparatuur zijn niet toegestaan.

Uw apparaat is ontworpen voor een probleemloze werking. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Voorafgaand aan gebruik bij een patiënt, kan de buitenkant van uw apparaat (behalve de optische onderdelen) worden schoongeveegd met isopropylalcohol (70% vol.). De lens moet worden behandeld als hoogwaardige fotografische apparatuur en moet worden gereinigd met standaard lensreinigingsapparatuur en beschermd tegen schadelijke chemicaliën. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of dompel het apparaat niet onder in vloeistof. Niet autoclavieren.

Garantie: 5 jaar op onderdelen en arbeid. De batterij heeft een garantie van 1 jaar.

Verwijdering

Dit apparaat bevat elektronica en een lithium-ionbatterij die moet worden gescheiden voor verwijdering en mag niet worden weggegooid met het gewone huisvuil. Neem de plaatselijke voorschriften voor afvalverwijdering in acht.

Deze set bevat:

DermLite DL5 (16 witte LED's, 4 UV-LED's, 4 Pigment-Boost-LED's, 1 witte Torch-LED, 32 mm lenssysteem met 10x vergroting, variabel polarisatiesysteem, intrekbare afstandhouder, verwijderbare frontplaat met 10 mm dradenkruis, stalen liniaal), leren riemtui, USB-oplaadkabel, oplaadstation, oclair, MCC-adapter voor mobiele apparaten, plastic riemholster (H), 5 IceCaps, microvezel-doek.

Technische beschrijving

Ga naar www.derm-lite.com/technical/ of neem contact op met uw lokale DermLite-dealer.

Instrukcje

Przeznaczenie

To urządzenie jest przeznaczone do celów medycznych do oświetlania powierzchni ciała. Służy do nieinwazyjnego badania wzrokowego nienaruszonej skóry.

Ten zasilany bateryjnie produkt jest przeznaczony do badania zewnętrznego wyłącznie w profesjonalnych zakładach opieki zdrowotnej przez lekarzy.

Przed użyciem sprawdź poprawność działania urządzenia! Nie używaj urządzenia, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub jeśli urządzenie działa w sposób niezgodny z opisem w niniejszej instrukcji obsługi.

UWAGA: Nie patrz bezpośrednio w światło LED. Podczas badań pacjenci muszą zamknąć oczy.

W przypadku poważnego incydentu związanego z korzystaniem z tego urządzenia, należy natychmiast powiadomić DermLite oraz, jeśli wymagają tego lokalne przepisy, krajowy urząd zdrowia.

UWAGA: Nie należy używać urządzenia w obszarach zagrożonych pożarem lub wybuchem (np. W środowisku bogatym w tlen).

Uwaga: Nie patrz bezpośrednio na światło UV.

OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera magnez. Nie należy używać w pobliżu rozruszników serca lub innych wrażliwych magnetycznie urządzeń lub przedmiotów.

OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym chlorku metylenu i sześciowartościowego chromu, o których w stanie Kalifornia wiadomo, że powodują raka lub wpływają szkodliwie na rozrodczość. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Zgodność elektromagnetyczna

To urządzenie jest zgodne z wymogami dotyczącymi poziomu EMC w zakresie emisji i odporności normy IEC 60601-1-2: 2014. Charakterystyka emisji tego urządzenia sprawia, że jest on odpowiedni do użytku w środowisku profesjonalnej opieki zdrowotnej, a także w środowisku mieszkalnym (CISPR 11 klasa B). To urządzenie zapewnia odpowiednią ochronę usługi łączności radiowej. W rzadkich przypadkach zakłócania usługi łączności radiowej użytkownik może potrzebować środków łagodzących, takich jak przeniesienie lub zmiana orientacji sprzętu.

OSTRZEŻENIE: Należy unikać używania tego sprzętu w sąsiedztwie lub ustawiania go na stole z innym sprzętem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie. Jeśli takie użycie jest konieczne, należy obserwować ten sprzęt i inne urządzenia, aby sprawdzić, czy działają normalnie.

OSTRZEŻENIE: Korzystanie z akcesoriów innych niż dostarczone przez producenta tego urządzenia może spowodować zwiększenie emisji elektromagnetycznej lub obniżenie odporności elektromagnetycznej tego urządzenia i nieprawidłowe działanie.

OSTRZEŻENIE: Przenośnych nadajników RF należy używać nie bliżej niż 30 cm (12 cali) od dowolnej części urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia działania tego sprzętu. Nie używaj tego urządzenia podczas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) ani w środowisku MRI.

WAŻNE: Przed pierwszym użyciem należy naładować wewnętrzny akumulator litowo-jonowy. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Bateria i ładowanie”.

DermLite DL5 to kompatybilny ze smartfonem dermatoskop kieszonekowy z 10-krotnym powiększeniem do wizualizacji struktur skóry za pomocą zmiennego światła spolaryzowanego i oświetlenia UV.

Trzymaj DermLite DL5, z diodami LED skierowanymi w kierunku badanej zmiany, około 12 mm nad skórą. Naciśnij wyłącznik główny (M), aby włączyć urządzenie w trybie polaryzacji krzyżowej. Spójrz przez obiektyw i przybliż lub oddal urządzenie od skóry, aby ustawić ostrość obrazu. W przypadku dermoskopii z kontaktem ze skórą, obróć pokrętkę ostrości (FD), aby wysunąć element dystansowy (S) i zogniskować obraz. Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik główny (M) przez około 1 sekundę, aby wyłączyć urządzenie. Aby oszczędzać energię, urządzenie wyłącza się automatycznie po 3 minutach.

Zmienna polaryzacja

Dotknij głównego przycisku (M), aby przełączać się między oświetleniem spolaryzowanym i niespolaryzowanym. Obróć główny przycisk, aby poruszać się w zakresie 9 ustawień polaryzacji, od światła spolaryzowanego krzyżowo przez niespolaryzowane do światła spolaryzowanego równoległe. Pasek wskaźnika (IS) odzwierciedla aktualny stan polaryzacji, podczas gdy „X” oznacza polaryzację krzyżową, „0” oznacza polaryzację niespolaryzowaną, a „=” oznacza polaryzację równoległą.

PigmentBoost®

Gdy białe światło jest aktywne, dotknij (PB), aby aktywować pomarańczowe oświetlenie PigmentBoost oprócz białego światła. Wskaźnik LED obok przycisku PB (PB) zaświeci się. Stuknij ponownie, aby dezaktywować.

Tryb UV

Aby zwizualizować struktury fluorescencyjne, naciśnij przycisk UV (UV), aby aktywować diody LED o długości fali 365 nm. Zaświeci się wskaźnik LED obok przycisku UV (UV). Ponownie dotknij przycisku, aby powrócić do poprzednio wybranego trybu światła białego.

Lataрка

Aby oświetlić większe obszary skóry lub jamy ciała, naciśnij przycisk larkarki (T), aby aktywować ultrajasną białą niespolaryzowaną diodę LED. Przekręć główny wyłącznik (M), aby wyregulować jasność larkarki.

Dermoskopowa regulacja jasności

Aby wyregulować jasność białych dermoskopowych diod LED, przytrzymaj przycisk larkarki (T) i jednocześnie przekręć główny wyłącznik (M). W trybie UV lub PigmentBoost naciśnij i przytrzymaj przycisk UV (lub PB) i przekręć główny przełącznik, aby dostosować odpowiednią jasność. Pasek wskaźnika (IB) odzwierciedla aktualny poziom jasności podczas regulacji.

Okular

Aby zapewnić optymalne widzenie, przymocuj dołączony okular magnetyczny (EP) do pierścienia akcesoriów (ER).

Dermoskopia smartfonowa

W przypadku dermoskopii za pomocą smartfona lub tabletu, bezpiecznie przymocuj adapter zaciskowy MagnetiConnect (MCC) koncentryczny do aparatu głównego urządzenia mobilnego. Podłącz DL5 do pierścienia MCC. Przy wykonaniu zdjęć wysuń przekładkę (S) do pozycji „0” i wytrzyj do czysta szklaną płytkę stykową (CP).

Zdejmowanie płytki kontaktowej

Obróć szklaną płytkę stykową (CP) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją odłączyć, obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ponownie ją zamocować.

Linijka

Linijka (R) jest magnetycznie przymocowana do uchwytu. Naciśnij środek linijki i zdejmij ją, aby zmierzyć zmiany skórne.

IceCap®: Aby wesprzeć środki kontroli infekcji, zatrzasknij jeden z dołączonych jednorazowych IceCaps (IC) nad stałowym panelem przednim (CP). Aby usunąć i zutylizować, po prostu wyciągnij go.

Bateria i ładowanie

PRZESTROGA: To urządzenie wykorzystuje specjalną baterię litowo-jonową 3,7 V 670 mAh, którą można kupić wyłącznie w sklepie DermLite lub u autoryzowanego sprzedawcy DermLite. W żadnym wypadku nie należy używać innego akumulatora niż ten przeznaczony dla tego urządzenia.

Po setkach zastosowań stan baterii ulegnie pogorszeniu, co może skutkować zmniejszeniem pojemności i/lub wzrostem ogniw litowo-jonowych. Monitoruj oznaki zużycia baterii, które mogą obejmować zmniejszoną żywotność baterii, nieoczekiwane wyłączenia, nieregularne zachowanie lub nagłą utratę zasilania. W przypadku zaobserwowania należy zaprzestać korzystania z urządzenia i nie ładować akumulatora. Wymień baterię i zutylizuj oryginał zgodnie z lokalnymi przepisami. To urządzenie jest wyposażone w czteropiętrowy wskaźnik ładowania (CI). Gdy urządzenie jest włączone i w pełni naładowane, zapalają się wszystkie cztery diody LED. Gdy pozostało mniej niż 75% żywotności baterii, świecą trzy diody LED. Jeśli rozładuje się ponad połowa baterii, zapalą się dwie diody LED, a jedna dioda LED wskazuje, że pozostało mniej niż 25% pojemności baterii. Aby naładować urządzenie, podłącz dostarczony kabel USB-C

do USB do portu ładowania (PP) i dowolnego portu USB zgodnego z IEC 60950-1 (5 V). Wskaźnik ładowania (CI) pulsuje, wskazując ładowanie, przy czym liczba pulsujących diod LED odpowiada poziomowi naładowania. Po zakończeniu ładowania zapalają się wszystkie cztery wskaźniki LED. Po latach użytkowania możesz chcieć wymienić baterię, która jest dostępna tylko bezpośrednio w DermLite lub u autoryzowanego sprzedawcy DermLite. Po setkach zastosowań stan baterii ulegnie pogorszeniu, co spowoduje zmniejszenie jej pojemności i/lub rozbudowę ogniw litowo-jonowych. Monitoruj oznaki zużycia baterii, takie jak skrócona żywotność baterii, nieoczekiwane wyłączenia, nieregularne zachowanie lub nagła utrata zasilania. W przypadku zaobserwowania należy zaprzestać korzystania z urządzenia i nie ładować akumulatora. Wymień baterię i zutylizuj oryginał zgodnie z lokalnymi przepisami. Aby wymienić baterię (B), zdejmij pokrętkę (D), chwytając ją za nacięcie paznokcia, odkręć śrubę pokrywającą baterii (CS) za pomocą narzędzia dostarczonego z każdą wymienną baterią DL5 i zdejmij pokrywę baterii (BC). Odłącz małą białą wtyczkę akumulatora (BP) i wyjmij akumulator (B). Włóż nową baterię, podłącz ponownie wtyczkę baterii, załóż pokrywę baterii (BC), zabezpiecz ją śrubą pokrywającą (CS) i wciśnij pokrętkę (D), aż zatrzasknie się na swoim miejscu.

Baza ładowania

Aby naładować DL5 za pomocą podstawy ładującej, podłącz mniejszy koniec (USBC) dostarczonego kabla USB do portu zasilania (PO) z tyłu podstawy ładującej (CB), a większy koniec (USB) do dowolnego złącza IEC 60950-1 lub ładowarka USB zgodna z IEC62368-1 (5 V). Umieść DL5 w stacji ładującej płytką stykową (CP) skierowaną w stronę stacji ładującej. Podstawa ładująca może być również używana do przechowywania IceCap.

Rozwiązywanie problemów: Sprawdź www.derm-lite.com, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje dotyczące rozwiązywania problemów. Jeśli Twoje urządzenie wymaga serwisowania, odwiedź www.derm-lite.com/service lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą DermLite.

Opieka i utrzymanie

OSTRZEŻENIE: Żadna modyfikacja tego sprzętu nie jest dozwolona.

Twoje urządzenie jest zaprojektowane do bezproblemowego działania. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.

Przed użyciem na pacjencie zewnętrzną stronę urządzenia (z wyjątkiem części optycznych) można wytrzeć do czysta alkoholem izopropylowym (70% obj.). Obiektyw należy traktować jako wysokiej jakości sprzęt fotograficzny i należy go czyścić standardowym sprzętem do czyszczenia obiektywów oraz chronić przed szkodliwymi chemikaliami. Nie używaj szorstkich środków czyszczących ani nie zanurzaj urządzenia w cieczy. Nie autoklawowac.

Gwarancja: 5 lat na części i robociznę. Bateria jest objęta gwarancją przez 1 rok.

Utylizacja: To urządzenie zawiera elektronikę i akumulator litowo-jonowy, które należy wydzielić w celu utylizacji i nie można ich wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących usuwania.

Ten zestaw zawiera: DermLite DL5 (16 białych diod LED, 4 diody UV LED, 4 diody PigmentBoost LED, 1 biała dioda LED Torch, system soczewek 32 mm z 10-krotnym powiększeniem, system zmiennej polaryzacji, wysuwana przekładka, zdejmowana płyta czołowa z siatką 10 mm, stalowa linijka), skórzany pokrowiec na pasek, Kabel ładujący USB, podstawka ładująca, okular, adapter do urządzenia mobilnego MCC, plastikowy futerał na pasek (H), 5 nasadek IceCap, ściereczka z mikrofibry.

Opis techniczny: odwiedź www.derm-lite.com/technical lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą DermLite.

Instruções

Uso Pretendido

Este dispositivo destina-se a fins médicos para iluminar as superfícies do corpo. É usado para exame visual não invasivo da pele intacta.

Este produto operado por bateria foi projetado para exame externo somente em instalações profissionais de saúde por profissionais médicos.

Verifique o correto funcionamento do dispositivo antes de usar! Não use o dispositivo se houver sinais visíveis de danos, mau funcionamento ou se o dispositivo funcionar de maneira não consistente com o que está descrito nestas instruções de uso.

CUIDADO: Não olhe diretamente para a luz do LED. Os pacientes devem fechar os olhos durante os exames.

No caso de um incidente grave com o uso deste dispositivo, notifique o DermLite imediatamente e, se exigido pela legislação local, sua autoridade nacional de saúde.

CUIDADO: não use o dispositivo em áreas de risco de incêndio ou explosão (por exemplo, ambiente rico em oxigênio).

Cuidado: Não olhe diretamente para a luz UV.

AVISO: este dispositivo contém ímãs. Não o utilize na proximidade de pacemakers ou outros dispositivos ou objetos magneticamente sensíveis.

AVISO: Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo cloro de metileno e cromo hexavalente, que são conhecidos no Estado da Califórnia por causar câncer ou toxicidade reprodutiva. Para obter mais informações, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Compatibilidade eletromagnética

Este dispositivo está em conformidade com os requisitos de nível de EMC e imunidade da norma IEC 60601-1-2: 2014. As características de emissão deste equipamento o tornam adequado para uso em ambientes profissionais de saúde, bem como em ambientes residenciais (CISPR 11 Classe B). Este equipamento oferece proteção adequada ao serviço de comunicação por rádio. No raro evento de interferência no serviço de radiocomunicação, o usuário pode precisar tomar medidas de mitigação, como realocar ou reorientar o equipamento. **AVISO:** O uso deste equipamento adjacente ou empilhado com outro equipamento deve ser evitado, pois pode resultar em operação inadequada. Se tal uso for necessário, este equipamento e o outro equipamento devem ser observados para verificar se estão funcionando normalmente. **AVISO:** O uso de acessórios diferentes dos fornecidos pelo fabricante deste equipamento pode resultar em aumento das emissões eletromagnéticas ou diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento e resultar em operação inadequada.

AVISO: Os transmissores portáteis de RF não devem ser usados a menos de 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte do dispositivo. Caso contrário, poderá resultar em degradação do desempenho deste equipamento.

Não use este dispositivo durante a ressonância magnética (MRI) ou em um ambiente de MRI.

IMPORTANTE: Antes da utilização inicial, carregue a bateria de íons de lítio interna. Consultar "Bateria e Carregamento" para obter detalhes.

DermLite DL5 é um dermatoscópio de bolso compatível com smartphone com ampliação de 10x para visualizar estruturas da pele usando luz polarizada variável e iluminação UV.

Segure seu DermLite DL5, com os LEDs voltados na direção da lesão a ser examinada, aproximadamente 12 mm acima da pele. Pressione o interruptor principal (M) para ligar o dispositivo no modo de polarização cruzada. Olhe através da lente e aproxime o anel do dispositivo da pele para focar a imagem. Para dermatoscopia com contato com a pele, gire o Disco de Foco (FD) para estender o Espaçador (S) e focar a imagem. Pressione e segure o interruptor principal (M) por cerca de 1 segundo para desligar o dispositivo. Para economizar energia, a unidade desliga automaticamente após 3 minutos.

Polarização variável

Toque no botão principal (M) para alternar entre a iluminação com polarização cruzada e não polarizada. Gire o botão principal para percorrer a faixa de 9 configurações de polarização, de polarizada cruzada via não polarizada a luz polarizada paralela. A faixa indicadora (IS) reflete o status de polarização atual, enquanto "X" marca polarização cruzada, "0" representa não polarizado e "=" significa polarização paralela.

PigmentBoost®

Enquanto a luz branca estiver ativa, toque em (PB) para ativar a iluminação PigmentBoost de cor laranja além da luz branca. O LED indicador próximo ao botão PB (PB) acenderá. Toque novamente para desativar.

Modo UV

Para visualizar estruturas fluorescentes, toque no botão UV (UV) para ativar os LEDs com comprimento de onda de 365 nm. O LED indicador ao lado do botão UV (UV) acenderá. Toque no botão novamente para retornar ao modo de luz branca selecionado anteriormente.

Lanterna

Para iluminar áreas maiores da pele ou cavidades do corpo, toque no botão da lanterna (T) para ativar um LED não polarizado branco ultrabrilhante. Gire o interruptor principal (M) para ajustar o brilho da lanterna.

Ajuste de brilho dermatoscópico

Para ajustar o brilho dos LEDs dermatoscópicos brancos, mantenha pressionado o botão da lanterna (T) e gire simultaneamente o interruptor principal (M). Enquanto estiver no modo UV ou PigmentBoost, pressione e segure o botão UV (ou PB) e gire o interruptor principal para ajustar o respectivo brilho. A barra indicadora (IB) reflete o nível de brilho atual durante o ajuste.

Ocular

Para uma visualização ideal, fixe a ocular (EP) incluída no anel acessório (ER).

Dermatoscopia para smartphone

Para dermatoscopia usando um smartphone ou tablet, aperte firmemente o adaptador de braçadeira MagnetConnect (MCC) alinhado concentricamente sobre a câmera principal do seu dispositivo móvel. Conecte seu DL5 ao anel MCC. Antes de tirar as imagens, estenda o espaçador (S) para a posição "0" e limpe a placa de contato de vidro (CP).

Removendo a Placa de Contato

Gire a placa de contato de vidro (CP) no sentido anti-horário para soltar, gire-a no sentido horário para recolocar.

governante

A régua (R) é fixada magneticamente ao cabo. Pressione para baixo no meio da régua e remova-a para medir as lesões na pele.

IceCap®

Para apoiar as suas medidas de controlo de infeção, encaixe um dos IceCaps (IC) descartáveis incluídos no painel frontal (PF) instalado.

Bateria e carregamento

CUIDADO: Este dispositivo usa uma bateria especial de íon de lítio de 3,7 V 670mAh, que só pode ser adquirida na DermLite ou em um revendedor autorizado da DermLite. Em nenhuma circunstância use outra bateria diferente daquela projetada para esta unidade.

Após centenas de utilizações, a bateria irá deteriorar-se, o que pode resultar na redução da capacidade e/ou na expansão da célula de íons de lítio. Monitore sinais de bateria deteriorada, que podem incluir redução da vida útil da bateria, desligamentos inesperados, comportamento errático ou perda repentina de energia. Se observado, interrompa o uso do dispositivo e não carregue a bateria. Substitua a bateria e descarte a original de acordo com os regulamentos locais.

Este aparelho está equipado com um Indicador de Carga (CI) de quatro níveis. Quando a unidade está ligada e totalmente carregada, todos os quatro LED acendem. Quando a carga da bateria for inferior a 75%, acendem três LED. Se mais de metade da bateria estiver descarregada, acendem dois LED, enquanto um único LED indica que a capacidade da bateria é inferior a 25%.

Para carregar o seu aparelho, ligue o cabo USB-C para USB fornecido à Porta de Carregamento (PP) e a qualquer porta USB (5V) em conformidade com a IEC 60950-1.

O Indicador de Carga (IC) pulsa para indicar que está a carregar, sendo o nível de carga indicado pelo número de LED a pulsar. Quando o carregamento estiver concluído, todos os quatro indicadores LED acendem. Com a carga completa, o aparelho pode funcionar durante cerca de 3 a 8 horas, dependendo do nível de luminosidade utilizado.

Após anos de utilização, pode querer substituir a bateria, que só se encontra disponível na DermLite ou num revendedor DermLite autorizado.

Após centenas de utilizações, a bateria irá deteriorar-se, resultando na redução da capacidade e/ou na expansão da célula de íons de lítio. Monitore sinais de bateria deteriorada, como vida útil reduzida, desligamentos inesperados, comportamento errático ou perda repentina de energia. Se observado, interrompa o uso do dispositivo e não carregue a bateria. Substitua a bateria e descarte a original de acordo com os regulamentos locais. Para trocar a bateria (B), puxe o botão (D) agarrando-o pelo entalhe da unha, desparafuse o parafuso da tampa da bateria (CS) usando a ferramenta fornecida com cada bateria de reposição DL5 e remova a tampa da bateria (BC). Desconecte o pequeno plugue branco da bateria (BP) e remova a bateria (B). Insira uma bateria nova, reconecte o plugue da bateria, recoloque a tampa da bateria (BC), prenda-a com o parafuso da tampa (CS) e empurre o botão (D) até que ele se encaixe no lugar.

Base de carregamento

Para carregar seu DL5 usando a base de carregamento, conecte a extremidade menor (USBC) do cabo USB fornecido à porta de alimentação (PO) na parte traseira da base de carregamento (CB) e a extremidade maior (USB) a qualquer IEC 60950-1 ou Carregador USB compatível com IEC62368-1 (5V). Coloque seu DL5 na base de carregamento, com a placa de contato (CP) voltada para a base de carregamento. A base de carregamento também pode ser usada para armazenamento IceCap.

Resolução de problemas

Consulte www.dermite.com para obter as informações mais recentes sobre a resolução de problemas. Se o seu dispositivo precisar de manutenção, consulte www.dermite.com/service ou entre em contacto com o seu agente local da DermLite.

Cuidado e manutenção

AVISO: Nenhuma modificação deste equipamento é permitida. Seu dispositivo foi projetado para operação sem problemas. Os reparos devem ser feitos apenas por pessoal qualificado.

Antes de usar em um paciente, o exterior do seu dispositivo (exceto as partes ópticas) pode ser limpo com álcool isopropílico (70% vol.). A lente deve ser tratada como equipamento fotográfico de alta qualidade e deve ser limpa com equipamento de limpeza de lente padrão e protegida de produtos químicos nocivos. Não use produtos de limpeza abrasivos nem mergulhe o dispositivo em líquidos. Não autoclave.

Garantia: 5 anos para peças e mão de obra. A bateria tem garantia de 1 ano.

Eliminação

Este dispositivo contém componentes eletrônicos e uma bateria de íons de lítio que devem ser separados para eliminação e não podem ser eliminados no lixo doméstico. Por favor, respeite os regulamentos locais sobre eliminação.

Este conjunto inclui:

DermLite DL5 (16 LEDs brancos, 4 LEDs UV, 4 LEDs PigmentBoost, 1 LED Torch branco, sistema de lentes de 32 mm com ampliação de 10x, sistema de polarização variável, espaçador retrátil, placa frontal removível com retículo de 10 mm, régua de aço), estojo em couro, Cabo de carregamento USB, base de carregamento, ocular, adaptador de dispositivo móvel MCC, coldre de cinto de plástico (H), 5 IceCaps, pano de microfibra.

Descrição Técnica

Para a descrição técnica, visite www.dermite.com/technical/ ou entre em contacto com o agente local DermLite. Em conformidade com a RDC 67:2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a DermLite notificará imediatamente o Departamento de Produtos Médicos da Blymed e outros distribuidores no Brasil quando uma Reclamação Reportável (envolvendo eventos adversos) for reportada à FDA nos termos do Título 21 do Código de Regulamentos Federais (CFR), Parte 803 ou 804, ou dos requisitos de vigilância de outras jurisdições.

Instrucțiuni

Utilizarea prevăzută

Acest dispozitiv este destinat scopurilor medicale pentru iluminarea suprafețelor corpului. Este utilizat pentru examinarea vizuală neinvazivă a pielii intacte.

Acest produs cu baterie este conceput pentru examinări externe numai în cadrul unităților medicale profesionale de către profesioniștii medicali.

Verificați funcționarea corectă a dispozitivului înainte de utilizare!

Nu utilizați dispozitivul dacă există semne vizibile de deteriorare, defecțiune sau dacă dispozitivul funcționează într-o manieră care nu este conformă cu ceea ce este descris în aceste instrucțiuni de utilizare.

ATENȚIE: Nu priviți direct pe lumina LED. Pacienții trebuie să închidă ochii în timpul examinărilor.

În cazul unui incident grav cu utilizarea acestui dispozitiv, anunțați imediat DermLite și, dacă este necesar de reglementările locale, autoritatea dumneavoastră națională de sănătate.

ATENȚIE: Nu folosiți dispozitivul în foc sau în zona de risc exploziv (de exemplu, mediu bogat în oxigen).

ATENȚIE: nu priviți direct la lumina UV.

AVERTIZARE: Acest produs conține magneți. Nu folosiți în apropiere de stimulatoare cardiace sau alte dispozitive sau obiecte sensibile la magnetică.

AVERTISMENT: Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv clorură de metilen și crom hexavalent, care sunt cunoscute de statul California pentru a provoca cancer sau toxicitate asupra funcției de reproducere. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Compatibilitate electromagnetica

Acest dispozitiv respectă cerințele privind emisiile EMC și nivelul imunității din standardul IEC 60601-1-2: 2014. Caracteristicile de emisie ale acestui echipament îl fac potrivit pentru utilizarea în mediul profesional de asistență medicală, precum și în mediul rezidențial (Clasa B CISPR 11). Acest echipament oferă o protecție adecvată serviciului de comunicații radio. În cazul rarelor interferențe cu serviciul de comunicații radio, utilizatorul ar putea fi nevoit să ia măsuri de atenuare, precum mutarea sau reorientarea echipamentelor. **AVERTIZARE:** Folosirea acestui echipament adiacent sau stivuit cu alte echipamente trebuie evitată, deoarece ar putea duce la o funcționare necorespunzătoare. Dacă o astfel de utilizare este necesară, acest echipament și celelalte echipamente ar trebui să fie respectate pentru a verifica dacă funcționează normal.

AVERTIZARE: Folosirea altor accesorii decât cele furnizate de producătorul acestui echipament poate duce la creșterea emisiilor electromagnetice sau la scăderea imunității electromagnetice a acestui echipament și poate duce la o funcționare necorespunzătoare.

AVERTIZARE: Transmițătorii RF portabili trebuie folosiți nu mai aproape de 30 cm (12 inci) de orice parte a dispozitivului. În caz contrar, ar putea rezulta degradarea performanței acestui echipament.

Nu utilizați acest dispozitiv în timpul imagistică prin rezonanță magnetică (IRM) sau într-un mediu RMN.

IMPORTANT: Înainte de utilizarea inițială, vă rugăm să încărcați bateria internă cu ioni de litiu. Consultați „Baterie și încărcare” pentru detalii.

DermLite DL5 este un dermatoscop de buzunar compatibil cu smartphone-uri cu mărire de 10x pentru vizualizarea structurilor pielii folosind lumină polarizată variabilă și iluminare UV.

Țineți DermLite DL5, cu LED-urile îndreptate în direcția leziunii de examinat, la aproximativ 12 mm deasupra pielii. Apăsăți întrerupătorul principal (M) pentru a porni dispozitivul în modul polarizat încrucișat. Priviți prin obiectiv și mutați dispozitivul mai aproape sau mai departe de piele pentru a focaliza imaginea. Pentru dermatoscopia cu contact cu pielea, rotiți cadranul de focalizare (FD) pentru a extinde distanțierul (S) și focalizați imaginea. Apăsăți și mențineți apăsat întrerupătorul principal (M) timp de aproximativ 1 secundă pentru a opri dispozitivul. Pentru a economisi energie, unitatea se oprește automat după 3 minute.

Polarizare variabilă

Atingeți butonul principal (M) pentru a comuta între iluminarea polarizată încrucișată și iluminarea nepolarizată. Rotiți butonul principal pentru a vă deplasa prin gama de 9 setări de polarizare, de la polarizare încrucișată la lumină nepolarizată până la polarizare paralelă. Banda indicatoare (IS) reflectă starea curentă de polarizare, în timp ce „X” marchează polarizat încrucișat, „0” reprezintă nepolarizat și „=” reprezintă polarizare paralelă.

PigmentBoost®

În timp ce lumina albă este activă, atingeți (PB) pentru a activa iluminarea PigmentBoost de culoare portocalie pe lângă lumina albă. LED-ul indicator de lângă butonul PB (PB) se va aprinde. Atingeți din nou pentru a dezactiva.

Modul UV

Pentru a vizualiza structurile fluorescente, atingeți butonul UV (UV) pentru a activa LED-urile cu o lungime de undă de 365 nm. LED-ul indicator de lângă butonul UV (UV) se va aprinde. Atingeți butonul din nou pentru a reveni la modul de lumină albă selectat anterior.

Lanternă

Pentru a ilumina zone mai mari ale pielii sau cavitățile corpului, atingeți butonul lanternei (T) pentru a activa un LED alb ultra-luminos nepolarizat. Rotiți comutatorul principal (M) pentru a regla luminozitatea lanternei.

Ajustare dermatoscopică a luminozității

Pentru a regla luminozitatea LED-urilor dermatoscopice albe, țineți apăsat butonul lanternei (T) și rotiți simultan întrerupătorul principal (M). În modul UV sau Pigment-Boost, țineți apăsat butonul UV (sau PB) și rotiți comutatorul principal pentru a regla luminozitatea respectivă. Bara indicatoare (IB) reflectă nivelul actual de luminozitate în timpul ajustării.

Ocular

Pentru o vizualizare optimă, fixați ocularul magnetic inclus (EP) la inelul accesoriu (ER).

Dermoscopie pe smartphone

Pentru dermoscopie folosind un smartphone sau o tabletă, fixați în siguranță adaptorul de clemă MagnetiConnect (MCC) aliniat concentric peste camera principală a dispozitivului dvs. mobil. Atașați DL5 la inelul MCC. Înainte de a face imagini, extindeți distanțierul (S) în poziția „0” și ștergeți placa de contact din sticlă (CP).

Scoaterea plăcii de contact

Rotiți placa de contact din sticlă (CP) în sens invers acelor de ceasornic pentru a o detașa, rotiți-o în sensul acelor de ceasornic pentru a reatașa.

Rigla

Rigla (R) este atașată magnetic de mâner. Apăsăți în mijlocul riglei și îndepărtați-o pentru a măsura leziunile pielii.

IceCap®: Pentru a sprijini măsurile de control al infecției,

trageți una dintre cele IceCaps (IC) de unică folosință incluse pe placa de față instalată (CP). Pentru a scoate și a elimina, pur și simplu scoateți-l.

Baterie și încărcare

ATENȚIE: Acest dispozitiv folosește o baterie specială litiu-ion de 3,7 V 670 mAh, care poate fi achiziționată numai de la DermLite sau de la un dealer autorizat DermLite. Nu utilizați în niciun caz o altă baterie decât cea concepută pentru această unitate.

După sute de utilizări, bateria se va deteriora, ceea ce poate duce la o capacitate redusă și/sau la extinderea celulei cu litiu-ion. Monitorizați semnele unei baterii deteriorate, care pot include durata de viață redusă a bateriei, opriri neașteptate, comportament neregulat sau pierdere bruscă de energie. Dacă observați, opriți utilizarea dispozitivului și nu încărcați bateria. Înlocuiți bateria și aruncați originalul în conformitate cu reglementările locale. Acest dispozitiv este echipat cu un indicator de încărcare (CI) la patru niveluri. Când unitatea este pornită și încărcată complet, toate cele patru leduri se aprind. Când rămâne mai puțin de 75% din durata de viață a bateriei, trei LED-uri sunt iluminate. Dacă mai mult de jumătate din baterie este evacuată, două LED-uri sunt pornite, în timp ce un singur LED indică faptul că rămâne mai puțin de 25% din capacitatea bateriei. Pentru a încărca dispozitivul, conectați cablul USB-C furnizat la portul de încărcare (PP) și orice port USB compatibil cu IEC 60950-1 (5V). Indicatorul de încărcare (CI) pulsează pentru a indica

încărcarea, numărul LED-urilor pulsante corespunzând nivelului de încărcare. Când încărcarea este completă, toate cele 4 LED-uri indicatoare se aprind. După ani de utilizare, este posibil să doriți să repuneți bateria, care este disponibilă doar direct de la DermLite sau de la un dealer DermLite autorizat.

După sute de utilizări, bateria se va deteriora, rezultând o capacitate redusă și/sau extinderea celulei cu litiu-ion. Monitorizați semnele de deteriorare a bateriei, cum ar fi durata de viață redusă a bateriei, opriri neașteptate, comportament neregulat sau pierdere bruscă de energie. Dacă observați, opriți utilizarea dispozitivului și nu încărcați bateria. Înlocuiți bateria și aruncați originalul în conformitate cu reglementările locale. Pentru a schimba bateria (B), trageți cadranul (D) apucându-l de creștătura unghiei, desurubați surubul capucului bateriei (CS) folosind unealta furnizată cu fiecare baterie de schimb DL5 și scoateți capucul bateriei (BC). Deconectați ștecherul mic alb al bateriei (BP) și scoateți bateria (B). Introduceți o baterie nouă, reconectați ștecherul bateriei, reatașați capucul bateriei (BC), fixați-l cu șurubul capucului (CS) și împingeți cadranul (D) până când se fixează în poziție.

Baza de încărcare

Pentru a încărca DL5 folosind baza de încărcare, atașați capătul mai mic (USBC) al cablului USB furnizat la portul de alimentare (PO) din spatele bazei de încărcare (CB), iar capătul mai mare (USB) la orice IEC 60950. -1 sau Încărcător USB compatibil IEC62368-1 (5V). Așezați DL5 în baza de încărcare, cu placa de contact (CP) orientată spre baza de încărcare. Baza de încărcare poate fi folosită și pentru depozitarea IceCap.

Depanare: Vă rugăm să verificați www.dermLite.com pentru cele mai actuale informații de depanare. Dacă dispozitivul dvs. necesită service, accesați www.dermLite.com/service sau contactați distribuitorul local DermLite.

Îngrijire și întreținere

AVERTIZARE: Nu este permisă nici o modificare a acestui echipament. Dispozitivul dvs. este proiectat pentru o funcționare fără probleme. Reparațiile se fac numai de către personalul de service calificat.

Înainte de utilizare la un pacient, exteriorul dispozitivului (cu excepția părților optice) poate fi șters curat cu alcool izopropilic (70% vol.). Obiectivul trebuie tratat ca un echipament fotografic de înaltă calitate și trebuie curățat cu echipamente standard de curățare a lentilelor și protejat de substanțele chimice dăunătoare. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi și nu scufundați dispozitivul în lichid. Nu vă autoclavează.

Garanție: 5 ani pentru piese și forță de muncă. Bateria este garantată timp de 1 an.

Eliminare: Acest dispozitiv conține echipamente electronice și o baterie de ioni de litiu care trebuie separate pentru eliminare și care nu pot fi eliminate cu deșeurile menajere generale. Vă rugăm să respectați reglementările locale de eliminare.

Acest set include:

DermLite DL5 (16 LED-uri albe, 4 LED-uri UV, 4 LED-uri PigmentBoost, 1 LED Torch alb, sistem de lentile de 32 mm cu mărire de 10x, sistem de polarizare variabilă, distanțier retractabil, placa frontală detașabilă cu reticulă de 10 mm, riglă de oțel), carcasă de curea din piele, Cablu de încărcare USB, bază de încărcare, ocular, adaptor pentru dispozitivul mobil MCC, toc din plastic pentru centură (H), 5 IceCaps, cârpă din microfibră.

Descriere tehnică: Accesați www.dermLite.com/technical sau contactați distribuitorul local DermLite.

Navodila

Predvidena uporaba

Ta naprava je namenjena za medicinske namene za osvetlitev telesnih površin. Uporablja se za neinvazivni vizualni pregled nedotaknjene kože.

Ta izdelek, ki deluje na baterije, je zasnovan za zunanji pregled v zdravstvenih ustanovah, ki ga izvajajo zdravstveni delavci.

Pred uporabo preverite pravilno delovanje naprave! Naprave ne uporabljajte, če so vidni znaki poškodb, nepravilnega delovanja ali če naprava deluje na način, ki ni v skladu z opisom v teh navodilih za uporabo.

POZOR: Ne glejte direktno v LED lučko. Bolniki morajo med pregledi zapreti oči.

V primeru resnega incidenta z uporabo te naprave takoj obvestite DermLite in, če to zahtevajo lokalni predpisi, vaš nacionalni zdravstveni organ.

POZOR: Naprave ne uporabljajte v nevarnem ali eksplozivnem območju (npr. V okolju, bogatem s kisikom).

Pozor: Ne glejte direktno v UV svetlobo.

OPOZORILO: Ta izdelek vsebuje magnetne. Ne uporabljajte v bližini spodbujevalnikov ali drugih magnetno občutljivih naprav ali predmetov.

OPOZORILO: Ta izdelek vas lahko izpostavi kemikalijam, vključno z metilen kloridom in šestvalentnim kromom, za katere država Kalifornija ve, da povzročajo raka ali strupenost za razmnoževanje. Za več informacij obiščite www.P65Warnings.ca.gov.

Elektromagnetna združljivost

Ta naprava ustreza zahtevam EMC za emisije in imuniteto standarda IEC 60601-1-2: 2014. Emisijske značilnosti te opreme omogočajo uporabo v profesionalnem zdravstvenem in stanovanjskem okolju (CISPR 11, razred B). Ta oprema nudi ustrezno zaščito radijskim komunikacijskim storitvam. V redkih primerih motenja radijske komunikacijske storitve bo uporabnik morda moral sprejeti omilitvene ukrepe, na primer premestitev ali preusmeritev opreme. **OPOZORILO:** Izogibajte se uporabi te opreme, ki je v bližini ali zloženo z drugo opremo, ker lahko pride do nepravilnega delovanja. Če je taka uporaba potrebna, je treba to opremo in drugo opremo opazovati, da preverita, ali normalno delujeta.

OPOZORILO: Uporaba dodatkov, razen tistih, ki jih je zagotovil proizvajalec te opreme, lahko povzroči povečane elektromagnetne emisije ali zmanjšano elektromagnetno odpornost te opreme in povzroči nepravilno delovanje. **OPOZORILO:** Prenosne radiofrekvenčne oddajnike ne smete uporabljati na nižjih 30 cm od katerega koli dela naprave. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja zmogljivosti te opreme.

Te naprave ne uporabljajte med slikanjem z magnetno resonanco (MRI) ali v okolju MRI.

POMEMBNO: Pred prvo uporabo napolnite notranjo litij-ionsko baterijo. Za podrobnosti glejte »Baterija in polnjenje«.

DermLite DL5 je žepni dermatoskop, združljiv s pametnim telefonom, z 10-kratno povečavo za vizualizacijo kožnih struktur z uporabo spremenljive polarizirane svetlobe in UV osvetlitve.

DermLite DL5 držite približno 12 mm nad kožo tako, da so LED diode usmerjene v smeri lezije, ki jo želite pregledati. Pritisnite glavno stikalo (M), da vklopite napravo v navzkrižno polariziranem načinu. Poglejte skozi lečo in premaknite napravo bližje ali dlje od kože, da izostrite sliko. Za dermatoskopijo s stikom s kožo zavrtite gumb za ostrenje (FD), da razširite distančnik (S) in izostrite sliko. Pritisnite in držite glavno stikalo (M) približno 1 sekundo, da izklopite napravo. Zaradi varčevanja z energijo se enota samodejno izklopi po 3 minutah.

Spremenljiva polarizacija

Tapnite glavni gumb (M), da preklopite med navzkrižno polarizirano in nepolarizirano osvetlitvijo. Z obračanjem glavnega gumba se pomikate med 9 nastavitvami polarizacije, od navzkrižno polarizirane prek nepolarizirane do vzporedno polarizirane svetlobe. Indikatorski trak (IS) odraža trenutno stanje polarizacije, medtem ko »X« označuje navzkrižno polarizirano, »0« predstavlja nepolarizirano, »=« pa vzporedno polarizacijo.

PigmentBoost®

Medtem ko je bela svetloba aktivna, tapnite (PB), da aktivirate poleg bele svetlobe tudi oranžno osvetlitev PigmentBoost. Indikator LED poleg gumba PB (PB) bo zasvetil. Znova tapnite za deaktivacijo.

UV način

Za vizualizacijo fluorescenčnih struktur se dotaknite gumba UV (UV), da aktivirate LED z valovno dolžino 365 nm. Indikator LED poleg gumba UV (UV) bo zasvetil. Ponovno tapnite gumb, da se vrnete na predhodno izbrani način bele svetlobe.

Svetilka

Za osvetlitev večjih površin kože ali telesnih votlin tapnite gumb svetilke (T), da aktivirate izjemno svetlo belo nepolarizirano LED. Obrnite glavno stikalo (M), da prilagodite svetlost svetilke.

Dermoskopska nastavitve svetlosti

Če želite prilagoditi svetlost belih dermoskopskih LED, držite gumb svetilke (T) in hkrati obrnite glavno stikalo (M). Ko ste v načinu UV ali PigmentBoost, pritisnite in držite gumb UV (ali PB) in obrnite glavno stikalo, da prilagodite ustrezno svetlost. Indikatorska vrstica (IB) odraža trenutno raven svetlosti med prilagajanjem.

Okular

Za optimalno gledanje pritrđite priloženi okular (EP) na obroček za dodatno opremo (ER).

Dermoskopija s pametnim telefonom

Za dermatoskopijo s pametnim telefonom ali tablico varno pritrđite adapter za objemko MagnetConnect (MCC), koncentrično poravnani na glavno kamero vaše mobilne naprave. Pritrdite svoj DL5 na obroček MCC. Pred fotografiranjem razširite distančnik (S) v položaj "0" in obrišite stekleno kontaktno ploščo (CP).

Odstranjevanje kontaktnih plošč

Obrnite stekleno kontaktno ploščo (CP) v nasprotni smeri urinega kazalca, da jo odstranite, in jo obrnite v desno, da jo ponovno pritrđite.

Ravnilo

Ravnilo (R) je magnetno pritrđeno na ročaj. Pritisnite na sredino ravnila in ga odstranite, da izmerite kožne lezije.

IceCap®: Da bi podprli svoje ukrepe za nadzor okužbe, priklopite enega od priloženih IceCaps za enkratno uporabo (IC) čez nameščeno prednjo ploščo (CP). Če ga želite odstraniti in odstraniti, ga preprosto potegnite.

Baterija in polnjenje

POZOR: Ta naprava uporablja posebno 3,7 V 670 mAh litij-ionsko baterijo, ki jo lahko kupite samo pri DermLite ali pri pooblaščenem prodajalcu DermLite. V nobenem primeru ne uporabljajte druge baterije razen tiste, ki je namenjena za to enoto.

Po več sto uporabah se bo baterija poslabšala, kar lahko povzroči zmanjšano zmogljivost in/ali razširitev litij-ionskih celic. Spremljajte znake izrabljene baterije, ki lahko vključujejo krajšo življenjsko dobo baterije, nepričakovane zaustavitve, nepravilno delovanje ali nenadno izgubo energije. Če opazite, prenehajte uporabljati napravo in ne polnite baterije. Zamenjajte baterijo in zavrzite original v skladu z lokalnimi predpisi.

Ta naprava je opremljena s štiristopenjskim indikatorjem polnjenja (CI). Ko je enota vklopljena in popolnoma napolnjena, svetijo vse štiri LED. Ko ostane manj kot 75% življenjske dobe baterije, svetijo tri LED. Če je več kot polovica akumulatorja izpraznjena, svetita dve LED-lučki, ena sama LED-lučka pa kaže, da ostane manj kot 25% kapacitete baterije. Če želite napolniti svojo napravo, priključite priloženi USB-C s kablom USB na vrata za polnjenje (PP) in na katera koli USB vrata, združljiva s standardom IEC 60950-1. Indikator polnjenja (CI) utripa, kar kaže na polnjenje, pri čemer število utripajočih LED diod ustreza ravni napoljenosti. Ko je polnjenje končano, svetijo vse štiri indikatorske LED. Po letih uporabe boste morda želeli ponovno namestiti baterijo, ki je na voljo samo neposredno pri DermLite ali pooblaščenem prodajalcu DermLite.

Po več sto uporabah se bo baterija poslabšala, kar bo povzročilo zmanjšano zmogljivost in/ali razširitev litij-ionskih celic. Spremljajte znake izrabljene baterije, kot so skrajšana življenjska doba baterije, nepričakovane zaustavitve, nepravilno vedenje ali nenadna izguba energije. Če opazite, prenehajte uporabljati napravo in ne polnite baterije. Zamenjajte baterijo in zavrzite original v skladu z

lokalnimi predpisi. Če želite zamenjati baterijo (B), potegnite gumb (D), tako da ga primete za zarezo za noht, odvijte vijak pokrova baterije (CS) z orodjem, ki je priloženo vsaki nadomestni bateriji DL5, in odstranite pokrov baterije (BC). Odklopite majhen beli baterijski vtič (BP) in odstranite baterijo (B). Vstavite novo baterijo, ponovno priključite baterijski vtič, ponovno pritrđite pokrov baterije (BC), ga pritrđite z vijakom pokrova (CS) in potisnite gumb (D), dokler se ne zaskoči.

Polnilna baza

Če želite svoj DL5 polniti s polnilno bazo, priključite manjši (USBC) konec priloženega kabla USB v napajalna vrata (PO) na zadnji strani polnilne baze (CB), večji (USB) konec pa na kateri koli IEC 60950 -1 oz Polnilnik USB, skladen z IEC62368-1 (5 V). Postavite DL5 v polnilno bazo, tako da je kontaktna ploščica (CP) obrnjena proti polnilni bazi. Polnilna baza se lahko uporablja tudi za shranjevanje IceCap.

Odpravljanje težav: Najnovejše informacije o odpravljanju napak poiščite na www.derm-lite.com. Če vaša naprava zahteva servisiranje, obiščite www.derm-lite.com/service ali se obrnite na lokalnega prodajalca DermLite.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO: Spremembe te opreme niso dovoljene. Vaša naprava je zasnovana za nemoteno delovanje. Popravila lahko opravi samo usposobljeno servisno osebje.

Pred uporabo na pacientu lahko zunanost naprave (razen optičnih delov) obrišete z izopropilnim alkoholom (70 vol. %). Objektiv je treba obravnavati kot kakovostno fotografsko opremo in ga očistiti s standardno opremo za čiščenje leč ter zaščititi pred škodljivimi kemikalijami. Ne uporabljajte abrazivnih čistil in ne potopite naprave v tekočino. Ne avtoklavirajte.

Garancija: 5 let za dele in delo. Za baterijo velja 1 leto.

Odstranjevanje: Ta naprava vsebuje elektroniko in litij-ionsko baterijo, ki jih je treba ločiti za odstranjevanje in jih ne smete odvreči skupaj s splošnimi gospodinjstskimi odpadki. Upoštevajte lokalne predpise o odstranjevanju.

Ta komplet vključuje:

DermLite DL5 (16 belih LED, 4 UV LED, 4 PigmentBoost LED, 1 bela Torch LED, 32 mm sistem leč z 10-kratno povečavo, sistem spremenljive polarizacije, izvlečni distančnik, odstranljiva prednja ploščica z 10 mm namerilnim križem, jekleno ravnilo), usnjena torbica za pas, Polnilni kabel USB, polnilna baza, okular, MCC adapter za mobilne naprave, plastična torbica za pas (H), 5 IceCaps, krpa iz mikrovlaknen.

Tehnični opis: Obiščite spletno mesto www.derm-lite.com/ tehniki ali se obrnite na lokalnega prodajalca DermLite.

Inštrukcie

Zamýšľané použitie

Toto zariadenie je určené na lekárske účely na osvetlenie povrchov tela. Používa sa na neinvazívne vizuálne vyšetrenie neporušenej kože.

Tento výrobok napájaný z batérií je určený na externé vyšetrenie iba v rámci zdravotníckych zariadení zdravotníckych pracovníkov.

Pred použitím skontrolujte správnu činnosť zariadenia! Zariadenie nepoužívajte, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia, poruchy alebo ak zariadenie funguje spôsobom, ktorý nie je v súlade s tým, čo je popísané v tomto návode na použitie.

UPOZORNENIE: Nepozerajte sa priamo do svetla LED. Počas vyšetrení musia pacienti zavrieť oči.

V prípade vážneho incidentu pri používaní tohto zariadenia, okamžite informujte DermLite a, ak to vyžadujú miestne predpisy, váš národný zdravotný úrad.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte zariadenie v oblasti s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu (napr. V prostredí bohatom na kyslík).

Upozornenie: Nepozerajte sa priamo do UV svetla.

VAROVANIE: Tento produkt obsahuje magnety. Nepoužívajte v blízkosti kardiostimulátorov alebo iných magneticky citlivých zariadení alebo predmetov.

UPOZORNENIE: Tento výrobok vás môže vystaviť chemikáliám vrátane metylénchloridu a šesťmocného chrómu, o ktorých je v štáte Kalifornia známe, že spôsobujú rakovinu alebo reprodukčnú toxicitu. Viac informácií nájdete na www.P65Warnings.ca.gov.

Elektromagnetická kompatibilita

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám na úroveň emisií EMC a odolnosti podľa normy IEC 60601-1-2: 2014. Vďaka emisným charakteristikám je toto zariadenie vhodné na použitie v profesionálnom zdravotnom prostredí, ako aj v obytnom prostredí (CISPR 11 trieda B). Toto zariadenie poskytuje primeranú ochranu pre rádiokomunikačné služby. V zriedkavých prípadoch rozhodnutia rádiokomunikačných služieb môže byť potrebné, aby užívateľ prijal opatrenia na zmiernenie, ako je premiestnenie alebo presmerovanie zariadenia. **VÝSTRAHA:** Vyhnete sa používaniu tohto zariadenia v susedstve alebo naskladanom s iným zariadením, pretože by to mohlo mať za následok nesprávnu prevádzku. Ak je takéto použitie potrebné, toto zariadenie a ďalšie vybavenie by sa mali dodržiavať, aby sa overilo, či fungujú normálne. **VÝSTRAHA:** Použitie iného príslušenstva ako je uvedené výrobcom tohto zariadenia by mohlo mať za následok zvýšenie elektromagnetických emisií alebo zníženie elektromagnetickej imunity tohto zariadenia a viesť k nesprávnej prevádzke.

VAROVANIE: Prenosné RF vysielače by sa nemali používať bližšie ako 30 cm (12 palcov) od ktorejkoľvek časti zariadenia. Inak by mohlo dôjsť k zhoršeniu výkonu tohto zariadenia.

Toto zariadenie nepoužívajte počas zobrazovania magnetickej rezonanciou (MRI) alebo v prostredí MRI.

DÔLEŽITÉ: Pred prvým použitím nabite internú lítium-iónovú batériu. Podrobnosti nájdete v časti „Batéria a nabíjanie“.

DermLite DL5 je vreckový dermatoskop kompatibilný so smartfónom s 10-násobným zväčšením na vizualizáciu kožných štruktúr pomocou variabilného polarizovaného svetla a UV osvetlenia.

Držte svoj DermLite DL5 s LED diódami nasmerovanými v smere vyšetrovanej lézie, približne 12 mm nad kožou. Stlačením hlavného vypínača (M) zapnete zariadenie v režime krížovej polarizácie. Pozerajte sa cez objektív a posuňte zariadenie bližšie alebo ďalej od pokožky, aby ste zaostrili obraz. Pri dermoskopii s kontaktom s pokožkou otáčajte otočným voličom zaostrenia (FD), aby ste vysunuli medzikus (S) a zaostrili obraz. Zariadenie vypnete stlačením a podržaním hlavného vypínača (M) na približne 1 sekundu. Aby sa šetrila energia, jednotka sa po 3 minútach automaticky vypne.

Variabilná polarizácia

Klepnutím na hlavné tlačidlo (M) môžete prepínať medzi krížovo polarizovaným a nepolarizovaným osvetlením. Otáčaním hlavného tlačidla sa pohybuje v rozsahu 9

nastavení polarizácie, od krížovo polarizovaného cez nepolarizované až po paralelne polarizované svetlo. Indikátorový prúžok (IS) odráža aktuálny stav polarizácie, zatiaľ čo „X“ znamená krížovo polarizované, „0“ znamená nepolarizované a „=“ znamená paralelnú polarizáciu.

PigmentBoost®

Keď je aktívne biele svetlo, klepnutím na (PB) aktivujete okrem bieleho svetla aj oranžové osvetlenie PigmentBoost. Indikátor LED vedľa tlačidla PB (PB) sa rozsvieti. Opätovným klepnutím deaktivujete.

UV režim

Ak chcete vizualizovať fluorescenčné štruktúry, klepnutím na tlačidlo UV (UV) aktivujete LED diódy s vlnovou dĺžkou 365 nm. Indikátor LED vedľa tlačidla UV (UV) sa rozsvieti. Opätovným klepnutím na tlačidlo sa vrátite do predtým zvoleného režimu bieleho svetla.

Baterka

Ak chcete osvetliť väčšie oblasti pokožky alebo telesné dutiny, klepnite na tlačidlo baterky (T), čím aktivujete ultrajasnú bielu nepolarizovanú LED. Otáčaním hlavného vypínača (M) nastavte jas baterky.

Dermoskopické nastavenie jasu

Ak chcete nastaviť jas bielych dermoskopických LED diód, podržte tlačidlo baterky (T) a súčasne otočte hlavný vypínač (M). V režime UV alebo PigmentBoost stlačte a podržte tlačidlo UV (alebo PB) a otáčaním hlavného vypínača nastavte príslušný jas. Lišta indikátora (IB) zobrazuje aktuálnu úroveň jasu počas nastavovania.

Okulár

Pre optimálne sledovanie pripevnite priložený magnetický okulár (EP) na prsteneц príslušenstva (ER).

Dermoskopia smartfónu

Pri dermoskopii pomocou smartfónu alebo tabletu bezpečne upevnite upínací adaptér MagnetiConnect (MCC) koncentricky zarovnaný na hlavný fotoaparát vášho mobilného zariadenia. Pripojte svoj DL5 k krúžku MCC. Pred snímaním záberov vysuňte rozperu (S) do polohy „0“ a utrite sklenenú kontaktnú dosku (CP).

Odstránenie kontaktnej dosky

Otočte sklenenú kontaktnú dosku (CP) proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju odpojili, otáčaním v smere hodinových ručičiek ju znova pripievate.

Pravítko

Pravítko (R) je magneticky pripievané k rukoväti. Zatlačte na stred pravítka a odstráňte ho, aby ste zmerali kožné lézie.

IceCap®: Aby ste podporili vaše opatrenia na kontrolu infekcie, zacvaknite jeden z priložených jednorazových ľadových máp (IC) na nainštalovaný čelný panel (CP). Ak ju chcete odstrániť a zlikvidovať, jednoducho ju vytiahnite.

Batéria a nabíjanie

UPOZORNENIE: Toto zariadenie používa špeciálnu lítium-iónovú batériu 3,7 V 670 mAh, ktorú je možné zakúpiť iba od spoločnosti DermLite alebo od autorizovaného predajcu DermLite. Za žiadnych okolností nepoužívajte inú batériu ako tú, ktorá je určená pre túto jednotku.

Po stovkách použití sa batéria znehodnotí, čo môže mať za následok zníženie kapacity a/alebo rozšírenie lítium-iónových článkov. Sledujte známky opotrebovania batérie, ktoré môže zahŕňať zníženie životnosti batérie, neočakávané vypnutie, nepravidelné správanie alebo náhlu stratu energie. Ak si to všimnete, prestaňte zariadenie používať a nenabíjajte batériu. Vymeňte batériu a originál zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Toto zariadenie je vybavené štvorúrovňovým indikátorom nabíjania (CI). Keď je jednotka zapnutá a úplne nabitá, rozsvietia sa všetky štyri LED diódy. Ak zostane menej ako 75% výdrže batérie, rozsvietia sa tri kontrolky LED. Ak je vybitá viac ako polovica batérie, rozsvietia sa dve kontrolky LED, zatiaľ čo jedna kontrolka LED signalizuje, že zostáva menej ako 25% kapacity batérie. Na nabitie zariadenia pripojte dodaný kábel USB-C k USB k portu nabíjania (PP) a ku každému portu USB kompatibilnému s normou IEC 60950-1 (5V). Indikátor nabíjania (CI) pulzuje, aby indikoval nabíjanie, s počtom pulzujúcich LED, ktoré zodpovedajú úrovni nabitia. Po dokončení nabíjania sa rozsvietia všetky štyri kontrolky. Po rokoch používania možno budete chcieť znova vložiť batériu, ktorá je k dispozícii iba priamo od DermLite alebo od autorizovaného predajcu DermLite.

Po stovkách použití sa batéria znehodnotí, čo bude mať za následok zníženie kapacity a/alebo rozšírenie lítium-iónových článkov. Sledujte známky opotrebovania batérie, ako je zníženie životnosti batérie, neočakávané vypnutie, nepravidelné správanie alebo náhlu strata energie. Ak si to všimnete, prestaňte zariadenie používať a nenabíjajte batériu. Vymeňte batériu a originál zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak chcete vymeniť batériu (B), stiahnite koliesko (D) tak, že ho uchopíte za zárez pre necht, odskrutkujte skrutku krytu batérie (CS) pomocou nástroja dodávaného s každou náhradnou batériou DL5 a odstráňte kryt batérie (BC). Odpojte malú bielu zástrčku batérie (BP) a vyberte batériu (B). Vložte novú batériu, znova zapojte zástrčku batérie, znova nasadte kryt batérie (BC), zaisťte ho skrutkou krytu (CS) a zatlačte ovládač (D), kým nezapadne na miesto.

Nabíjacia základňa

Ak chcete nabíjať DL5 pomocou nabíjacej základne, pripojte menší (USBC) koniec dodaného USB kábla k napájaciemu portu (PO) na zadnej strane nabíjacej základne (CB) a väčší (USB) koniec k ľubovoľnej IEC 60950-1 alebo USB nabíjačka (5V) v súlade s IEC62368-1. Umiestnite svoj DL5 do nabíjacej základne tak, aby kontaktná doska (CP) smerovala k nabíjacej základni. Nabíjajúcu základňu možno použiť aj na uskladnenie IceCap.

Riešenie problémov: Najnovšie informácie o riešení problémov nájdete na stránke www.dermlite.com. Ak vaše zariadenie vyžaduje servis, navštívte stránku www.dermlite.com/service alebo sa obráťte na miestneho predajcu DermLite.

Starostlivosť a údržba

VAROVANIE: Nie je povolená žiadna úprava tohto zariadenia.

Vaše zariadenie je navrhnuté na bezproblémovú prevádzku. Opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný servisný personál.

Pred použitím na pacientovi môže byť povrch vášho prístroja (okrem optických častí) očistený izopropylalkoholom (70% obj.). S objektívom by sa malo zaobchádzať ako s fotografickým zariadením vysokej kvality a malo by sa čistiť štandardným zariadením na čistenie šošoviek a chrániť pred škodlivými chemikáliami. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani neponárajte zariadenie do tekutiny. Nečakujte v autokláve.

Záruka: 5 rokov na diely a prácu. Na batériu sa poskytujú záruka na 1 rok.

Likvidácia: Tento prístroj obsahuje elektroniku a lítium-iónovú batériu, ktorá sa musí separovať na likvidáciu a nesmie sa likvidovať s bežným domovým odpadom. Dodržiavajte miestne predpisy o likvidácii.

Táto sada obsahuje:

DermLite DL5 (16 bielych LED, 4 UV LED, 4 PigmentBoost LED, 1 biela baterka LED, 32 mm systém šošoviek s 10-násobným zväčšením, variabilný polarizačný systém, zasúvateľná rozperka, odnímateľná predná doska s 10 mm zámerým krížom, oceľové pravítko), kožené puzdro na opasok, USB nabíjací kábel, nabíjacia základňa, okulár, adaptér mobilného zariadenia MCC, plastové puzdro na opasok (H), 5 IceCaps, utierka z mikrovlákna.

Technický popis: Navštívte www.dermlite.com/technical alebo sa obráťte na miestneho predajcu DermLite.

Ohjeet

Käyttötarkoitus

Tämä laite on tarkoitettu lääkinällisiin tarkoituksiin kehon pintojen valaisemiseksi. Sitä käytetään ehjän ihon ei-invasiiviseen visuaaliseen tutkimiseen.

Tämä akkukäyttöinen tuote on suunniteltu vain lääketieteellisen ammattilaisten suorittamaan ulkopuoliselle tutkimukselle.

Tarkista laitteen oikea toiminta ennen käyttöä!

Älä käytä laitetta, jos siinä on näkyviä merkkejä vauriosta, toimintahäiriöstä tai laite toimii tavalla, joka ei vastaa tässä käyttöohjeessa kuvattua.

HUOMIO: Älä katso suoraan LED-valoon. Potilaiden on suljettava silmänsä tutkimuksen ajaksi.

Jos kyseessä on vakava vaaratilanne tämän laitteen käytössä, ilmoita siitä välittömästi DermLiteille ja, jos paikalliset määräykset sitä vaativat, kansalliselle terveysviranomaisellesi.

VAROITUS: Älä käytä laitetta tulipalovaara- tai räjähdysalttiilla alueella (esim. happirikas ympäristö).

Varoitus: Älä katso suoraan UV-valoon.

VAARA: Tämä laite sisältää magneetteja. Älä käytä sydämentahdistimien tai muiden magneettisesti herkkien laitteiden tai esineiden lähellä.

VAROITUS: Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, mukaan lukien metyleenikloridi ja kuusiarvoinen kromi, joiden Kalifornian osavaltion tiedetään aiheuttavan syöpää tai lisääntymistoksisuutta. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Elektromagneettinen yhteensopivuus

Tämä laite täyttää standardin IEC 60601-1-2: 2014 EMC-päästö- ja immuuteettitasovaatimukset. Tämän laitteen päästöominaisuudet tekevät siitä sopivan käytettäväksi ammatillisessa terveydenhoitoympäristössä sekä asuinympäristössä (CISPR 11 luokka B). Tämä laite tarjoaa riittävän suojan radioviestintäpalveluille. Jos radioviestintäpalveluun kohdistuu häiriöitä, käyttäjä voi joutua toteuttamaan lieventäviä toimenpiteitä, kuten siirtämään laitteita tai suuntaamaan niitä uudelleen. **VAROITUS:** Tämän laitteen käyttöä muiden laitteiden vieressä tai pinottua niiden kanssa tulee välttää, koska se voi johtaa virheelliseen toimintaan. Jos tällainen käyttö on välttämätöntä, tätä laitetta ja muita varusteita tulee tarkkailla varmistaakseen, että ne toimivat normaalisti. **VAROITUS:** Muiden kuin tämän laitteen valmistajan toimittamien lisävarusteiden käyttö voi lisätä laitteen sähkömagneettisia päästöjä tai vähentää sähkömagneettista häiriönsietoa ja johtaa vääriin toimintaan. **VAROITUS:** Kannettavia RF-lähettimiä ei saa käyttää lähempänä kuin 30 cm (12 tuumaa) laitteen mihinkään kohtaan. Muuten tämän laitteen suorituskyky saattaa heikentyä. Älä käytä tätä laitetta magneettikuvauksen (MRI) aikana tai MRI-ympäristössä.

TÄRKEÄÄ: Ennen ensimmäistä käyttöä lataa sisäinen litiumioniakku. Katso tarkemmat tiedot kohdasta "Akku ja lataaminen".

DermLite DL5 on älypuhelimien kanssa yhteensopiva taskudermatoskooppi, jossa on 10-kertainen suurennos ihon rakenteiden visuaaliseen vaihtelevalla polarisoidulla valolla ja UV-valolla.

Pida DermLite DL5:tä noin 12 mm ihon yläpuolella niin, että LED-valot on suunnattu tutkittavan leesioon suuntaan. Paina pääkytkintä (M) kytkeäksesi laitteen päälle ristipolarisoidussa tilassa. Katso linssin läpi ja tarkenna kuva siirtämällä laitetta lähemmäs tai kauemmas ihosta. Iloksetuksessa tapahtuvaa dermoskopiaa varten kierrä tarkennuspyörää (FD) laajentaaksesi välikettä (S) ja tarkenna kuva. Paina ja pidä painettuna pääkytkintä (M) noin 1 sekunnin ajan sammuttaaksesi laitteen. Virran säätämiseksi laite sammuu automaattisesti 3 minuutin kuluttua.

Muuttuva polarisaatio

Napauta pääpainiketta (M) vaihtaaksesi ristipolarisoidun ja polarisoimattoman valaistuksen välillä. Käännä pääpainiketta siirtäaksesi 9 polarisaatioasetuksen välillä ristipolarisoidusta polarisoimattomaan rinnakkaispolarisoi- tuun valoon. Ilmaisinnauha (IS) heijastaa nykyistä polarisaatioilaa, kun taas "X" tarkoittaa ristipolarisaatiota, "0" tarkoittaa polarisoimatonta ja "=" tarkoittaa rinnakkaispolarisaatiota.

PigmentBoost®

Kun valkoinen valo on aktiivinen, napauta (PB) aktivoitaksesi oranssinvärisen PigmentBoost-valon valkoisen valon lisäksi. PB-painikkeen (PB) vieressä oleva merkkivalo syttyy. Poista käytöstä napauttamalla uudelleen.

UV-tila

Voit visualisoida fluoresoivia rakenteita napauttamalla UV-painiketta (UV) aktivoitaksesi LEDit, joiden aallonpituus on 365 nm. UV-painikkeen (UV) vieressä oleva merkkivalo syttyy. Napauta painiketta uudelleen palatakse- si aiemmin valittuun valkoisen valon tilaan.

Taskulamppu

Voit valaista suurempia ihoalueita tai kehon onteloita napauttamalla taskulamppupainiketta (T) aktivoitaksesi erittäin kirkkaan valkoisen polarisoimattoman LEDin. Käännä pääkytkintä (M) säätääksesi taskulampun kirkkautta.

Dermoskooppinen kirkkauden säätö

Säädä valkoisten dermoskooppisten LEDien kirkkautta pitämällä taskulampun painiketta (T) painettuna ja kääntämällä samanaikaisesti pääkytkintä (M). UV- tai PigmentBoost-tilassa pidä UV- (tai PB) -painiketta painettuna ja säädä kirkkautta kääntämällä pääkytkintä. Ilmaisinpalkki (IB) heijastaa nykyistä kirkkaustasoa säädön aikana.

Okulaari

Parhaan katselun takaamiseksi kiinnitä mukana toimitettu okulaari (EP) lisävarusterenkaaseen (ER).

Älypuhelimien dermoskopia

Jos haluat tehdä dermoskopiaa älypuhelimella tai tabletilla, kiinnitä MagnetiConnect-puristinsovitin (MCC) tukevasti samankeskisesti mobiililaitteesi pääkameran päälle. Kiinnitä DL5 MCC-renkaaseen. Ennen kuvien ottamista ojenna välikappale (S) "0"-asentoon ja pyyhi lasikontaktilevy (CP) puhtaaksi.

Kosketuslevyn irrotus

Käännä lasikontaktilevyä (CP) vastapäivään irrottaaksesi ja käännä myötäpäivään kiinnittäaksesi se takaisin.

Viivotin

Viivoin (R) on kiinnitetty magneettisesti kahvaan. Paina viivaimen keskeltä alas ja poista se mitataksesi ihovaurioita.

IceCap®

Auta ehkäisemään infektoita napsauttamalla mukana toimitettu kertakäyttöinen IceCap-kansi (IC) asennetun kuvapinnan (CP) päälle.

Akku ja lataus

VAROITUS: Tämä laite käyttää erityistä 3,7 V 670 mAh litiumioniakkuja, jonka voi ostaa vain DermLiteiltä tai valtuutetulta DermLite-jälleenmyyjältä. Älä missään tapauksessa käytä muuta kuin tähän laitteeseen suunniteltua akkua.

Satojen käyttökertojen jälkeen akku heikkenee, mikä voi johtaa kapasiteetin vähenemiseen ja/tai litiumionien laajenemiseen. Tarkkaile merkkejä heikentyneestä akusta, joita voivat olla akun lyheneminen, odottamattomat sammutukset, epäsäännöllinen käyttäytyminen tai äkillinen virrankatkos. Jos huomaat sen, lopeta laitteen käyttö äläkä lataa akkua. Vaihda akku ja hävitä alkuperäinen paikallisten määräysten mukaisesti.

Tässä laitteessa on nelitasoinen latauksen ilmainen (CI). Akun ollessa ladattu täyteen, kaikki neljä LED-merkkivaloa palavat laitteen ollessa kytkettynä päälle. Kun akun varausta on jäljellä alle 75 prosenttia, kolme LED-merkkivaloa palaa. Kun akun varauksesta on kulunut yli puolet, kaksi LED-merkkivaloa palaa. Yksi LED-valo ilmaisee, että alle 25 prosenttia akun täydestä varauksesta on jäljellä. Lataa laite kytkemällä mukana toimitettu USB-C – USB -kaapeli latausporttiin (PP) ja standardin IEC 60950-1 mukaiseen USB-porttiin (5 V). Latauksen ilmainen (CI) vilkkuu lataamisen merkiksi. Vilkkuvien LED-valojen määrä ilmaisee lataustason. Kun lataus on valmis, kaikki neljä LED-merkkivaloa palavat. Täyteen ladattuna laitteen käyttöaika on noin 3–8 tuntia käytetystä kirkkaustasosta riippuen. Vuosien käytön jälkeen saattaa olla tarpeen vaihtaa akku. Akkuja on saatavilla vain DermLiteiltä tai valtuutetulta DermLite-jälleenmyyjältä.

Satojen käyttökertojen jälkeen akku heikkenee, mikä johtaa

kapasiteetin vähenemiseen ja/tai litiumionien laajenemiseen. Tarkkaile akun heikentymisen merkkejä, kuten akun lyhenemistä, odottamattomia sammutuksia, epäsäännöllistä toimintaa tai äkillistä tehonmenetystä. Jos huomaat sen, lopeta laitteen käyttö äläkä lataa akkua. Vaihda akku ja hävitä alkuperäinen paikallisten määräysten mukaisesti. Vaihda paristo (B) vetämällä irti valitsin (D) tarttumalla siihen kynnen lovesta, irrota akun kannen ruuvi (CS) kunkin DL5-vaihtopariston mukana toimitetulla työkalulla ja irrota akun kansi (BC). Irrota pieni valkoinen akun pistoke (BP) ja irrota akku (B). Aseta uusi akku, kytke akun pistoke takaisin, kiinnitä akun kansi (BC), kiinnitä se kannen ruuvilla (CS) ja työnnä valitsinta (D) sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Latauslusta

Jos haluat ladata DL5:n latauslustan avulla, liitä mukana toimitetun USB-kaapelin pienempi (USBC) pää latauslustan (CB) takana olevaan virtaporttiin (PO) ja suurempi (USB) pää mihin tahansa IEC 60950 -standardiin. -1 tai IEC62368-1-yhteensopiva (5V) USB-laturi. Aseta DL5 latauslustaan niin, että kontaktilevy (CP) on latauslustaa kohti. Latauslustaa voidaan käyttää myös IceCap-säilytys-

Vianmääritys

Katso uusimmat vianmääritystiedot osoitteesta www.dermlite.com. Jos laitteesi vaatii huoltoa, käy osoitteessa www.dermlite.com/service tai ota yhteyttä paikalliseen DermLite-jälleenmyyjään.

Hoito ja ylläpito

VAROITUS: Tämän laitteen muutoksia ei sallita. Laitteesi on suunniteltu häiriöttömään käyttöön. Korjauksia saa suorittaa vain pätevät huoltohenkilöstö.

Ennen käyttöä potilaalla laitteen ulkopinta (paitsi optiset osat) voidaan pyyhkiä puhtaiksi isopropyylialkoholilla (70 tilavuusprosenttia). Linssiä on käsiteltävä korkealaatuisena valokuvauksenvälineenä, ja se on puhdistettava tavallisella linssinpuhdistuslaitteella ja suojattava haitallisilta kemikaaleilta. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai upota laitetta nesteeseen. Älä autoklaavoi.

Takuu: 5 vuotta osille ja töille. Akun takuu on yksi vuosi.

Hävittäminen

Tämä laite sisältää elektroniikkaa ja litiumioniakun, jotka on lajiteltava hävittämistä varten. Niitä ei saa hävittää talousjätteen mukana. Noudata paikallisia jätteenkäsittelymääräyksiä.

Tämä setti sisältää:

DermLite DL5 (16 valkoista LEDiä, 4 UV-LEDiä, 4 PigmentBoost LEDiä, 1 valkoinen taskulamppu LED, 32 mm:n linssijärjestelmä 10x suurennuksella, säädettävä polarisaatiojärjestelmä, sisäänvedettävä välikappale, irrotettava etulevy 10 mm:n ristikkolla, teräsviiva), nahkainen vyökotelo, USB-latauskaapeli, latauslusta, okulaari, MCC-mobiililaitesovitin, muovinen vyökotelo (H), 5 IceCapsiä, mikrokuutiuni.

Tekninen kuvaus

Katso osoitteesta www.dermlite.com/technical/ tai ota yhteyttä paikalliseen DermLite-jälleenmyyjään.

Instruktioner

Avsedd användning

Denna enhet är avsedd för medicinska ändamål för att belysa kroppsytor. Det används för icke-invasiv visuell undersökning av intakt hud.

Denna batteridrivna produkt är utformad för extern undersökning endast inom professionella hälso- och sjukvårdsanläggningar av läkare.

Kontrollera att enheten fungerar korrekt före användning! Använd inte enheten om det finns synliga tecken på skada, feelfunktion eller om enheten fungerar på ett sätt som inte överensstämmer med vad som beskrivs i denna bruksanvisning.

WARNING: Titta inte direkt in i LED-ljuset. Patienterna måste sluta ögonen under undersökningen.

Vid en allvarlig händelse med användning av denna enhet, meddela DermLite omedelbart och, om det krävs enligt lokala bestämmelser, din nationella hälsomyndighet.

FÖRSIKTIGT: Använd inte apparaten i utrymmen med risk för brand eller explosion (t.ex. syrerik miljö).

Varning: Titta inte direkt på UV-ljus.

WARNING: Denna produkt innehåller magneter. Använd inte i närheten av pacemaker eller andra magnetkänsliga enheter eller föremål.

WARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive metylenklorid och sexvärt krom, som är kända av staten Kalifornien för att orsaka cancer eller reproduktions-toxicitet. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Den här enheten uppfyller EMC: s utsläpps- och immunitetskrav i standarden IEC 60601-1-2: 2014. Utsläppskaraktistiken för denna utrustning gör den lämplig för användning i professionell hälsovårdsmiljö och bostadsmiljö (CISPR 11 klass B). Denna utrustning erbjuder adekvat skydd för radiokommunikationstjänster. I det sällsynta fallet av störningar i radiokommunikationstjänsten kan användaren behöva vidta begränsningsåtgärder, till exempel omflyttning eller omorientering av utrustning. **WARNING:** Användning av denna utrustning intill eller staplad med annan utrustning bör undvikas eftersom den kan leda till felaktig användning. Om sådan användning är nödvändig, bör denna utrustning och annan utrustning följas för att verifiera att de fungerar normalt.

WARNING: Användning av andra tillbehör än de som tillhandahålls av tillverkaren av denna utrustning kan leda till ökade elektromagnetiska utsläpp eller minskad elektromagnetisk immunitet för denna utrustning och leda till felaktig användning.

WARNING: Bärbara RF-sändare ska inte användas närmare än 30 cm till någon del av enheten. Annars kan försämring av prestandan för denna utrustning resultera. Använd inte denna enhet under magnetisk resonanstomografi (MRT) eller i en MRI-miljö.

VIKTIGT: Ladda det interna litiumjonbatteriet före den första användningen. Se "Batteri & laddning" för detaljer.

DermLite DL5 är ett smartphone-kompatibelt fickdermatoskop med 10x förstoring för att visualisera hudstrukturer med hjälp av variabelt polariserat ljus och UV-belysning.

Håll din DermLite DL5, med lysdioderna riktade i riktning mot skadan som ska undersökas, cirka 12 mm ovanför huden. Tryck på huvudströmbrytaren (M) för att slå på enheten i korspolariserat läge. Titta genom linsen och flytta enheten närmare eller längre bort från huden för att fokusera bilden. För dermatoskopi med hudkontakt, vrid fokusratten (FD) för att förlänga distansen (S) och fokusera bilden. Håll huvudströmbrytaren (M) intryckt i cirka 1 sekund för att stänga av enheten. För att spara ström stängs enheten av automatiskt efter 3 minuter.

Variabel polarisering

Tryck på huvudknappen (M) för att växla mellan korspolariserad och icke-polariserad belysning. Vrid på huvudknappen för att flytta genom intervallerna av 9 polarisationsinställningar, från korspolariserat via icke-polariserat till parallellpolariserat ljus. Indikatorremsan (IS) återspeglar den aktuella polarisationsstatusen, medan "X" markerar korspolariserad, "0" representerar icke-polariserad och "=" står för parallell polarisation.

PigmentBoost®

Medan vitt ljus är aktivt trycker du på (PB) för att aktivera den orangefärgade PigmentBoost-belysningen förutom vitt ljus. Indikatorlampan bredvid PB-knappen (PB) kommer att tändas. Tryck igen för att avaktivera.

UV-läge

För att visualisera fluorescerande strukturer, tryck på UV-knappen (UV) för att aktivera lysdioder med en våglängd på 365 nm. Indikatorlampan bredvid UV-knappen (UV) kommer att tändas. Tryck på knappen igen för att återgå till det tidigare valda läget för vitt ljus.

Fickklampa

För att belysa större hudområden eller kroppshåligheter, tryck på ficklampans knapp (T) för att aktivera en ultraljusstark vit icke-polariserad LED. Vrid huvudströmbrytaren (M) för att justera ficklampans ljusstyrka.

Dermoskopisk ljusstyrkajustering

För att justera ljusstyrkan på de vita dermatoskopiska lysdioderna, håll in ficklampans knapp (T) och vrid samtidigt huvudströmbrytaren (M). I UV- eller Pigment-Boost-läge, tryck och håll in UV-knappen (eller PB) och vrid huvudströmbrytaren för att justera respektive ljusstyrka. Indikatorfältet (IB) reflekterar den aktuella ljusstyrkan under justeringen.

Okular

För optimal visning, fäst det medföljande magnetiska okularet (EP) vid tillbehöringen (ER).

Smartphone dermatoskopi

För dermatoskopi med en smartphone eller surfplatta, fäst MagnetiConnect-klamadaptern (MCC) ordentligt koncentriskt inriktad över din mobila enhets huvudkamera. Fäst din DL5 till MCC-ringen. Innan du tar bilder, dra ut distansen (S) till "0"-läget och torka av glaskontaktplattan (CP).

Ta bort kontaktplattan

Vrid glaskontaktplattan (CP) moturs för att lossa, vrid den medurs för att fästa igen.

Linjal

Linjalen (R) är magnetiskt fäst på handtaget. Tryck ner i mitten av linjalerna och ta bort den för att mäta hudskador.

IceCap®

Fäst en av de medföljande engångs IceCaps (IC) över den installerade skärmen (CP) som ett led i skyddet mot infektioner.

Batteri och laddning

WARNING: Denna enhet använder ett speciellt 3,7V 670mAh litiumjonbatteri, som endast kan köpas från DermLite eller från en auktoriserad DermLite-återförsäljare. Använd inte under några omständigheter ett annat batteri än det som är designat för denna enhet.

Efter hundratals användningar kommer batteriet att försämrats, vilket kan resultera i minskad kapacitet och/eller expansion av litiumjonceller. Övervaka tecken på ett försämrat batteri som inkluderar minskad batteritid, oväntade avstängningar, oregelbundet beteende eller plötsligt strömavbrott. Om det observeras, sluta använda enheten och ladda inte batteriet. Byt ut batteriet och kassera originalet i enlighet med lokala bestämmelser. Enheten är utrustad med en fyrnivå-laddningsindikator (CI). När enheten är påslagen och fulladdad tänds alla fyra lysdioder. När mindre än 75% av batteriets livslängd återstår, tänds tre lysdioder. Om mer än hälften av batteriet är tomt är två lysdioder tända medan en enda lysdiod indikerar att mindre än 25% av batterikapaciteten återstår. Enheten laddas genom att ansluta den medföljande USB-C till USB-kabeln till laddningsporten (PP) och en IEC 60950-1-kompatibel (5V) USB-port. Laddningsindikatorn (CI) pulserar för att indikera laddning, med antalet pulserande lysdioder motsvarande laddningsnivån.

När laddningen är klar tänds alla fyra indikatorlampor. En fulladdning av enheten räcker till cirka 3-8 timmars drift, beroende på vilken ljusstyrka som används.

Efter flera års användning kanske du vill byta ut batteriet, som endast kan köpas från DermLite eller en auktoriserad DermLite-återförsäljare.

Efter hundratals användningar kommer batteriet att försämrats, vilket resulterar i minskad kapacitet och/eller expansion av litiumjonceller. Övervaka efter tecken på ett försämrat batteri som minskad batteritid, oväntade avstängningar, oregelbundet beteende eller plötsligt

strömavbrott. Om det observeras, sluta använda enheten och ladda inte batteriet. Byt ut batteriet och kassera originalet i enlighet med lokala bestämmelser. För att byta batteri (B), dra av ratten (D) genom att ta tag i den vid fingernagelskåran, skruva loss batterilocket skruv (CS) med hjälp av verktyget som medföljer varje DL5-ersättningsbatteri och ta bort batterilocket (BC). Koppla ur den lilla vita batterikontakten (BP) och ta bort batteriet (B). Sätt i ett nytt batteri, anslut batterikontakten igen, sätt tillbaka batteriluckan (BC), fäst den med lockskruven (CS) och tryck in ratten (D) tills den snäpper på plats.

Laddningsbas

För att ladda din DL5 med laddningsbasen, anslut den mindre (USBC) änden av den medföljande USB-kabeln till strömporten (PO) på baksidan av laddningsbasen (CB) och den större (USB) änden till valfri IEC 60950 -1 eller IEC62368-1-kompatibel (5V) USB-laddare. Placera din DL5 i laddningsbasen, med kontaktplattan (CP) vänd mot laddningsbasen. Laddningsbasen kan även användas för IceCap-förvaring.

Felsökning

Vänligen besök www.dermilite.com för uppdaterad information om felsökning. Om din enhet kräver underhåll, besök www.dermilite.com/service eller kontakta din lokala DermLite-återförsäljare.

Vård och underhåll

WARNING: Ingen modifiering av denna utrustning är tillåten.

Din enhet är utformad för problemfri drift. Reparationer får endast utföras av kvalificerad servicepersonal.

Innan du använder en patient kan utsidan av din enhet (utom de optiska delarna) torka av med isopropylalkohol (70% vol.). Linsen ska behandlas som högkvalitativ fotografisk utrustning och ska rengöras med standardlin-srengöringsutrustning och skyddas mot skadliga kemikalier. Använd inte slipande rengöringsmedel eller fördjupa enheten i vätska. Autoklavera inte.

Garanti: 5 år för delar och arbetskraft. Batteriet är garanterat i 1 år.

Avfallshantering

Denna enhet innehåller elektronik och litiumjonbatteri som måste tas ut för att avfallshandteras och får ej blandas med hushållsavfall. Vänligen beakta lokala regler för hantering av sådant avfall.

Detta set innehåller:

DermLite DL5 (16 vita lysdioder, 4 UV-lysdioder, 4 PigmentBoost-lysdioder, 1 vitt Torch-LED, 32 mm linsystem med 10x förstoring, variabelt polariseringsssystem, infällbar distans, avtagbar frontplatta med 10 mm riktmedel, ställinjal), bältesfodral i läder, USB-laddningskabel, laddningsbas, okular, MCC mobilenhetsadapter, plastbälteshölster (H), 5 IceCaps, mikrofiberduk.

Teknisk beskrivning.

Besök www.dermilite.com/technical/ eller kontakta din lokala DermLite-återförsäljare.

Talimatlar

Kullanım amacı

Bu cihaz, vücut yüzeylerini aydınlatmak için tıbbi amaçlar için tasarlanmıştır. Sağlam derinin non-invaziv görsel muayenesi için kullanılır.

Pille çalışan bu ürün, yalnızca tıp uzmanları tarafından profesyonel sağlık kuruluşlarında harici muayene için tasarlanmıştır.

Kullanmadan önce cihazın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin!
Görünür hasar veya arıza belirtileri varsa veya cihaz bu kullanım kılavuzunda açıklananlara uygun olmayan bir şekilde çalışıyorsa cihazı kullanmayın.

DİKKAT: Doğrudan LED ışığına bakmayın. Hastalar muayene sırasında gözlerini kapatmalıdır.

Bu cihazın kullanımıyla ilgili ciddi bir olay olması durumunda, derhal DermLite® ve yerel yönetmeliklerin gerektirmesi durumunda ulusal sağlık yetkilinize haber verin.

DİKKAT: Cihazı yangın veya patlayıcı riskli alanlarda (örn. Oksijen açısından zengin ortam) kullanmayın.

Dikkat: UV Işığı. Doğrudan ışığı bakmayın.

UYARI: Bu ürün mıknatıs içerir. Kalp pillerinin veya manyetik olarak hassas diğer cihazların veya öğelerin yakınında kullanmayın.

UYARI: Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere veya üreme toksisitesine neden olduğu bilinen metilen klorür ve altı değerlikli krom gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.

Elektromanyetik uyumluluk

Bu cihaz, IEC 60601-1-2: 2014 standardının EMC Emisyonları ve Bağışıklık seviyesi gerekliliklerine uygundur. Bu ekipmanın emisyon özellikleri, profesyonel sağlık bakım ortamında ve konut ortamında (CISPR 11 Sınıf B) kullanım için uygun olmasını sağlar. Bu ekipman radyo iletişim servisine yeterli koruma sağlar. Radyo iletişim servisine nadiren müdahale edilmesi durumunda, kullanıcının ekipmanın yerini değiştirmek veya yeniden yönlendirmek gibi hafifletici önlemler alması gerekebilir. **UYARI:** Bu ekipmanın başka bir cihaza bitişik veya üst üste istiflenmiş kullanımından kaçınılmalıdır çünkü yanlış çalışmaya neden olabilir. Bu tür bir kullanım gerekirse, bu ekipmanın ve diğer ekipmanın normal çalışmasını doğrulamak için gözlemlenmesi gerekir. **UYARI:** Bu ekipmanın üreticisi tarafından sağlananlar dışındaki aksesuarların kullanılması, elektromanyetik emisyonların artmasına veya bu ekipmanın elektromanyetik bağışıklığının azalmasına neden olabilir ve yanlış çalışmaya neden olabilir. **UYARI:** Taşınabilir RF vericileri cihazın herhangi bir kısmına 30 cm'den (12 inç) daha yakın kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, bu ekipmanın performansında düşüş meydana gelebilir.

UYARI: Taşınabilir RF vericileri cihazın herhangi bir kısmına 30 cm'den (12 inç) daha yakın kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, bu ekipmanın performansında düşüş meydana gelebilir. Bu cihazı manyetik rezonans görüntüleme (MRI) sırasında veya MRI ortamında kullanmayın.

ÖNEMLİ: İlk kullanımdan önce lütfen dahili lityum iyon pili şarj edin. Ayarlar için "Pil ve Şarj Etme" konusuna bakın.

DermLite DL5, değişken polarize ışık ve UV aydınlatması kullanarak cilt yapılarını görselleştirmek için 10x büyütme, akıllı telefon uyumlu bir cep dermatoskopudur.

DermLite DL5'inizi LED'ler incelenen lezyon yönünde olacak şekilde derinin yaklaşık 12 mm yukarısında tutun. Cihazı çapraz polarize moda açmak için ana düğmeye (M) basın. Objektiften bakın ve görüntüyü odaklamak için cihazı cilde yaklaşırın veya uzaklaştırın. Deri teması olan dermoskopi için, Aralayıcıyı (S) uzatmak ve görüntüyü odaklamak için Odak Kadranını (FD) döndürün. Cihazı kapatmak için ana şalteri (M) yaklaşık 1 saniye basılı tutun. Güçten tasarruf etmek için ünite 3 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Değişken Polarizasyon

Çapraz polarize ve polarize olmayan aydınlatma arasında geçiş yapmak için ana düğmeye (M) dokunun. Çapraz polarizeden polarize olmaya ve paralel polarize ışığa kadar 9 polarizasyon ayarı arasında geçiş yapmak için ana düğmeyi çevirin. Gösterge şeridi (IS) mevcut polarizasyon durumunu yansıtırken, "X" çapraz polarizasyonu, "0" polarize olmayı ve "=" paralel polarizasyonu temsil eder.

PigmentBoost®

Beyaz ışık etkinken, beyaz ışığa ek olarak turuncu renkli PigmentBoost aydınlatmasını etkinleştirmek için (PB) öğesine dokunun. PB düğmesinin (PB) yanındaki göstergeler LED'i yanacaktır. Devre dışı bırakmak için tekrar dokunun.

UV Modu

Floresan yapıları görselleştirmek için 365 nm dalga boyuna sahip LED'leri etkinleştirmek için UV düğmesine (UV) dokunun. UV düğmesinin (UV) yanındaki gösterge LED'i yanacaktır. Önceden seçilen beyaz ışık moduna dönmek için düğmeye tekrar dokunun.

El feneri

Daha büyük cilt bölgelerini veya vücut boşluklarını aydınlatmak için, ultra parlak beyaz polarize olmayan LED'i etkinleştirmek için el feneri düğmesine (T) dokunun. El feneri parlaklığını ayarlamak için ana anahtarı (M) çevirin.

Dermoskopik Parlaklık Ayarı

Beyaz dermoskopik LED'lerin parlaklığını ayarlamak için el feneri düğmesini (T) basılı tutun ve aynı anda ana anahtarı (M) çevirin. UV veya PigmentBoost modundayken UV (veya PB) düğmesine basın ve basılı tutun ve ilgili parlaklığı ayarlamak için ana anahtarı çevirin. Gösterge çubuğu (IB), ayar sırasında mevcut parlaklık seviyesini yansıtır.

mercek

Optimum görüntüleme için ürünle birlikte verilen göz merceğini (EP) aksesuar halkasına (ER) yapıştırın.

Akıllı Telefon Dermoskopi

Beyaz dermoskopik LED'leri kullanarak dermoskopi için, MagnetiConnect kelepçe adaptörünü (MCC) eş merkezli olarak cihazınızın ana kamerasına sabitleyin. DL5'inizi MCC halkasına takın. Görüntü çekmeden önce, ara parçayı (S) "0" konumuna uzatın ve cam temas plakasını (CP) silerek temizleyin.

Temas Plakasını Çıkarma

Cam temas plakasını (CP) çıkarmak için saat yönünün tersine, yeniden takmak için saat yönünde çevirin.

Cetvel

Cetvel (R) tutamağa manyetik olarak bağlanmıştır. Deri lezyonlarını ölçmek için cetvelin ortasına bastırın ve çıkarın.

IceCap®

Enfeksiyon kontrol önlemlerinin desteklemek için, birlikte verilen tek kullanımlık IceCap'lerden (IC) takılı koruyucu çerçevenin (CP) üzerine oturtun. Çıkarmak ve atmak için basitçe çekin.

Pil ve Şarj

DİKKAT: Bu cihaz, yalnızca DermLite®'tan veya yetkili bir DermLite satıcısından satın alınabilen özel bir 3,7V 670mAh lityum iyon pil kullanır. Hiçbir durumda bu ünite için tasarlanandan dışında başka bir pil kullanmayın.

Yüzlerce kullanımdan sonra pil bozulur ve bu da kapasitenin azalmasına ve/veya lityum iyon hücrenin genişlemesine neden olabilir. Pil ömrünün azalması, beklenmeyen kapanmalar, düzensiz davranış veya ani güç kaybı gibi bozulmuş pil işaretlerini izleyin. Böyle bir durum gözlemlenirse cihazı kullanmayı bırakın ve pili şarj etmeyin. Pili değiştirin ve orijinali yerel düzenlemelere uygun olarak atın.

Bu cihaz dört seviyeli bir Şarj Göstergesi (CI) ile donatılmıştır. Ünite açıldığında ve tamamen şarj olduğunda, dört LED'in tümü yanar. Pili ömrünün% 75'inden azı kaldığında, üç LED yanar. Pili yansından fazlası boşalmışsa, iki LED yanar, tek bir LED ise pil kapasitesinin% 25'inden azının kaldığını gösterir. Cihazınızı şarj etmek için, birlikte verilen USB-C - USB kablusunu Şarj Portuna (PP) ve IEC 60950-1 uyumlu (5V) USB portuna bağlayın. Şarj Göstergesi (CI) şarj seviyesini göstermek için yanıp sönen LED'lerin sayısı ile şarj seviyesini gösterir. Şarj işlemi tamamlandığında, dört gösterge LED'inin tümü yanar. Yıllar süren kullanımdan sonra, yalnızca doğrudan DermLite'den veya yetkili bir DermLite bayisinden temin edilebilen pili yeniden takmak isteyebilirsiniz.

Yüzlerce kullanımdan sonra pil bozulur kapasitenin azalmasına ve/veya lityum iyon hücrenin genişlemesine neden olur. Pil ömrünün azalması, beklenmeyen kapanmalar, düzensiz davranışlar veya ani güç kaybı gibi bozulmuş pil belirtilerini izleyin. Böyle bir durum gözlemlenirse cihazı kullanmayı bırakın ve pili şarj etmeyin. Pili değiştirin ve orijinali yerel düzenlemelere uygun olarak atın. Pili (B) değiştirmek için, kadranı (D) trnak çentiğinden

tutarak çekin, her DL5 yedek pille birlikte verilen aleti kullanarak pil kapağı vidasını (CS) sökün ve pil kapağını (BC) çıkarın. Küçük beyaz pil fişini (BP) ayırın ve pili (B) çıkarın. Yeni bir pil takın, pil fişini yeniden bağlayın, pil kapağını (BC) yeniden takın, kapak vidasıyla (CS) sabitleyin ve kadranı (D) yerine oturana kadar itin.

Şarj Tabanı

DL5'inizi şarj tabanını kullanarak şarj etmek için, birlikte verilen USB kablusunun küçük (USBC) ucunu şarj tabanının (CB) arkasındaki güç bağlantı noktasına (PO) ve büyük (USB) ucunu herhangi bir IEC 60950'ye takın. -1 veya IEC62368-1 uyumlu (5V) USB şarj cihazı. DL5'inizi, temas plakası (CP) şarj tabanına bakacak şekilde şarj tabanına yerleştirin. Şarj tabanı aynı zamanda IceCap'in saklanması için de kullanılabilir.

Sorun Giderme

En güncel sorun giderme bilgileri için lütfen dermlite.com adresini kontrol edin. Cihazınızın bakıma ihtiyacı varsa, www.dermlite.com/service adresini ziyaret edin veya yerel DermLite satıcınıza başvurun.

Bakım ve Onarım

UYARI: Bu ekipmanda değişiklik yapılmasına izin verilmez. Cihazınızın sorunsuz kullanım için tasarlanmıştır. Onarımlar sadece kalifiye servis personeli tarafından yapılacaktır.

Temizlik

Cihazınızın dış kısmı, optik parçalar hariç, bir hasta üzerinde kullanılmadan önce izopropil alkol (% 70 hacim) ile temizlenebilir. Lens yüksek kaliteli fotoğraf ekipmanı olarak görülmeli ve standart lens temizleme ekipmanı ile temizlenmeli ve zararlı kimyasallardan korunmalıdır. Ekipmanın hiçbir yerinde aşındırıcı malzeme kullanmayın veya cihazı sıvıya batırmayın. Otoklavlamayın.

Garanti: Parçalar ve işçilik için 5 yıl. Pil 1 yıl garantilidir.

Bertaraf

Bu cihaz, elden çıkarılması için ayrılması gereken ve genel ev atıkları ile birlikte atılmayacak elektronik ve lityum iyon pil içerir. Lütfen yerel atma düzenlemelerine uyun.

Bu set şunları içerir:

DermLite DL5 (16 beyaz LED, 4 UV LED, 4 PigmentBoost LED, 1 beyaz Torch LED, 10x büyütme 32 mm lens sistemi, değişken polarizasyon sistemi, geri çekilebilir ara parça, 10 mm retikül ile çıkarılabilir ön yüz, çelik cetvel), deri kemer çantası, USB şarj kablosu, şarj tabanı, mercek, MCC mobil cihaz adaptörü, plastik kemer kılıfı (H), 5 IceCaps, mikrofiber bez.

Teknik Açıklama

www.dermlite.com/technical adresini ziyaret edin veya yerel DermLite satıcınıza başvurun.

Οδηγίες

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για ιατρικούς σκοπούς για να φωτίζει τις επιφάνειες του σώματος. Χρησιμοποιείται για μη επεμβατική οπτική εξέταση ανέπαφου δέρματος.

Αυτό το προϊόν που λειτουργεί με μπαταρία έχει σχεδιαστεί για εξωτερική εξέταση μόνο σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις υγειονομικής περιθαλψής από ιατρούς.

Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της συσκευής πριν τη χρήση! Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχουν ορατά σημάδια βλάβης, δυσλειτουργίας ή εάν η συσκευή λειτουργεί με τρόπο που δεν συνάδει με αυτό που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κοιτάτε απευθείας στο φως διάδοσης φωτεινότητας (LED). Οι ασθενείς πρέπει να κλείνουν τα μάτια τους κατά την εξέταση.

Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος με τη χρήση αυτής της συσκευής, ενημερώστε αμέσως το DermLite και, εάν το απαιτούν οι τοπικοί κανονισμοί, την εθνική υγειονομική αρχή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε περιοχές που υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης (π.χ. περιβάλλον πλούσιο σε οξυγόνο)

Προσοχή: Μην κοιτάτε απευθείας το φως UV.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή περιέχει μαγνήτες. Να μην χρησιμοποιείται πλησίον βηματοδότη ή άλλων μαγνητικών ευαίσθητων συσκευών ή άλλων μαγνητικών ευαίσθητων συσκευών ή άλλων μαγνητικών ευαίσθητων συσκευών ή άλλων μαγνητικών ευαίσθητων συσκευών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, όπως μεθυλενοχλωρίδιο και εξασθενές χρώμιο, τα οποία είναι γνωστά στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο ή τοξικότητα στην αναπαραγωγή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.P65Warnings.ca.gov.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις επιπέδων εκπομπών και ανοσίας EMC του προτύπου IEC 60601-1-2: 2014. Τα χαρακτηριστικά εκπομπών αυτού του εξοπλισμού το καθιστούν κατάλληλο για χρήση σε επαγγελματικό περιβάλλον υγειονομικής περιθαλψής καθώς και σε περιβάλλον κατοικιών (CISPR 11 Class B). Αυτός ο εξοπλισμός προσφέρει επαρκή προστασία στην υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας. Σε σπάνια περίπτωση παρέμβασης στην υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας, ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει μέτρα μετριασμού, όπως μετακίνηση ή επαναπροσανατολισμό εξοπλισμού. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Θα πρέπει να αποφευχθεί η χρήση αυτού του εξοπλισμού που βρίσκεται δίπλα ή στοιβάζεται με άλλο εξοπλισμό, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ακατάλληλη λειτουργία. Εάν απαιτείται τέτοια χρήση, αυτός ο εξοπλισμός και ο άλλος εξοπλισμός πρέπει να τηρούνται για να επιβεβαιωθεί ότι λειτουργούν κανονικά. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η χρήση αέσουρα εκτός από αυτά που παρέχονται από τον κατασκευαστή αυτού του εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ασυλία αυτού του εξοπλισμού και να οδηγήσει σε ακατάλληλη λειτουργία. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Οι φορητοί τομποί RF δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε απόσταση μικρότερη των 30 cm (12 ίντσες) σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί υποβάθμιση της απόδοσης αυτού του εξοπλισμού. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI) σε περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν από την αρχική χρήση, παρακαλείστε να φορτίσετε την εσωτερική μπαταρία ιόντων λιθίου. Βλέπε «Μπαταρία και Φόρτιση» για λεπτομέρειες.

Το DermLite DL5 είναι ένα δερματοσκόπιο τσέπης συμβατό με smartphone με μεγέθυνση 10x για οπτικοποίηση των δομών του δέρματος χρησιμοποιώντας μεταβλητό πολωμένο φως και υπεριώδη φως.

Κρατήστε το DermLite DL5 σας, με τις λυχνίες LED στραμμένες προς την κατεύθυνση της βλάβης που πρόκειται να εξεταστεί, περίπου 12 mm πάνω από το δέρμα. Πιέστε τον κεντρικό διακόπτη (M) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σε λειτουργία cross-polarized. Κοπιάτε μέσα από το φακό και μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά ή μακριά από το δέρμα για να εστιάσετε την εικόνα. Για δερματοσκόπηση με επαφή με το δέρμα, περιστρέψτε τον επιλογέα εστίασης (FD) για να επεκτείνεται το διαχωριστικό (S) και να εστιάσει την εικόνα. Πιέστε και κρατήστε πατημένο τον κεντρικό διακόπτη (M) για περίπου 1 δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για εξοικονόμηση ενέργειας, η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 3 λεπτά.

Μεταβλητή πόλωση

Πατήστε το κύριο κουμπί (M) για εναλλαγή μεταξύ διασταυρούμενου και μη πολωμένου φωτισμού. Περιστρέψτε το κύριο κουμπί για να μετακινήσετε στο εύρος των 9 ρυθμίσεων πόλωσης, από διασταυρούμενη πόλωση μέσω μη πολωμένου φωτός σε παράλληλη πόλωση. Η λωρίδα ενδείξης (IS) αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση πόλωσης, ενώ το "X" επισημαίνει διασταυρούμενη πόλωση, το "0" αντιπροσωπεύει μη πολωμένο και το "=" σημαίνει παράλληλη πόλωση.

PigmentBoost®

Ενώ το λευκό φως είναι ενεργό, πατήστε (PB) για να ενεργοποιήσετε τον πορτοκαλί φωτισμό PigmentBoost εκτός από το λευκό φως. Η ενδεικτική λυχνία LED δίπλα στο κουμπί PB (PB) θα ανάψει.

Πατήστε ξανά για απενεργοποίηση.

Λειτουργία UV

Για να απεικονίσετε δομές φθορισμού, πατήστε το κουμπί UV (UV) για να ενεργοποιήσετε τα LED με μήκος κύματος 365 nm. Η ενδεικτική λυχνία LED δίπλα στο κουμπί UV (UV) θα ανάψει.

Πατήστε ξανά το κουμπί για να επιστρέψετε στην προηγούμενης επιλεγμένη λειτουργία λευκού φωτός.

Φακός

Για να φωτίσετε μεγαλύτερες περιοχές δέρματος ή κοιλότητες του σώματος, πατήστε το κουμπί του φακού (T) για να ενεργοποιήσετε ένα εξαιρετικά φωτεινό λευκό μη πολωμένο LED. Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη (M) για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του φακού.

Δερμοσκόπηση ρύθμιση φωτεινότητας

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα των λευκών δερμοσκόπιων LED, κρατήστε πατημένο το κουμπί του φακού (T) και ταυτόχρονα γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη (M). Ενώ βρίσκεται σε λειτουργία UV ή PigmentBoost, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί UV (ή PB) και γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη για να ρυθμίσετε την αντίστοιχη φωτεινότητα. Η γραμμή ενδείξης (IB) αντικατοπτρίζει το τρέχον επίπεδο φωτεινότητας κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.

Προσοφθάλμιο

Για βέλτιστη θέαση, στερεώστε τον παρεχόμενο μαγνητικό προσοφθάλμιο προσοφθάλμιο προσοφθάλμιο (EP) στον δακτύλιο αέσουρα (ER).

Δερμοσκόπηση Smartphone

Για δερματοσκόπηση με χρήση smartphone ή tablet, στερεώστε με ασφάλεια τον προσαρμογέα σφιγκτήρα MagnetConnect (MCC) ομόκεντρα ευθυγραμμισμένους πάνω από την κύρια κάμερα της κινητής συσκευής σας. Συνδέστε το DL5 στον δακτύλιο MCC. Πριν τραβήξετε φωτογραφίες, επεκτείνετε το διαχωριστικό (S) στη θέση «0» και σκουπίστε τη γυάλινη πλάκα επαφής (CP).

Αφαίρεση της πλάκας επαφής

Περιστρέψτε τη γυάλινη πλάκα επαφής (CP) αριστερόστροφα για να αποσπαστεί, περιστρέψτε τη δεξιόστροφα για να επανατοποθετηθεί.

Κυβερνήτης

Ο χάρακας (R) συνδέεται μαγνητικά στη λαβή. Πιέστε προς τα κάτω στη μέση του χάρακα και αφαιρέστε τον για να μετρήσει τις δερματικές βλάβες.

IceCap®

Για την υποστήριξη των μέτρων ελέγχου μολύνσεων, κλειδώστε ένα από τα IceCaps (IC) μιας χρήσης που περιλαμβάνονται στο πακέτο πάνω από την πλάκα σύσφιξης (CP).

Μπαταρία και φόρτιση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί μια ειδική μπαταρία ιόντων λιθίου 3,7 V 670 mAh, την οποία μπορείτε να αγοράσετε μόνο από την DermLite ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της DermLite. Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε άλλη μπαταρία εκτός από αυτή που έχει σχεδιαστεί για αυτή τη μονάδα.

Μετά από εκατοντάδες χρήσεις, η μπαταρία θα φθαρεί, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη χωρητικότητα ή/και επέκταση κυψελών ιόντων λιθίου. Παρακολουθήστε τα σημάδια μιας φθαρμένης μπαταρίας που μπορεί να περιλαμβάνουν μειωμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, απροσδόκητους τερματισμούς λειτουργίας, ακανόνιστη συμπεριφορά ή ξαφνική απώλεια ρεύματος. Εάν παρατηρήσετε, σταματήστε τη χρήση της συσκευής και μην φορτίζετε την μπαταρία. Αντικαταστήστε την μπαταρία και απορρίψτε το πρωτότυπο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια ένδειξη φόρτισης τεσσάρων επιπέδων (CI). Όταν η μονάδα είναι ανοιχτή και πλήρως φορτισμένη, ανάβουν και τα τέσσερα φωτάκια. Όταν απομένει λιγότερο από 75% της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, ανάβουν τρία LED. Αν η μπαταρία έχει εξαντληθεί σε περισσότερο από το μισό, ανάβουν τα δύο LED, ενώ ένα LED δείχνει ότι απομένει λιγότερο από το 25% της χωρητικότητας της μπαταρίας. Για την φόρτιση της συσκευής σας, συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C σε USB στην θύρα φόρτισης (PP) και σε οποιοδήποτε τυχόν συμβατή θύρα USB IEC 60950-1 (5V). Η ένδειξη φόρτισης (CI) αναβοσβήνει όταν φορτίζει, με τον αριθμό των κόκκινων λυχνιών LED να αντιστοιχεί στο αντίστοιχο επίπεδο φόρτισης. Όταν η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί, και οι τέσσερις ενδείξεις LED είναι φωτεινές. Μετά από μια πλήρη φόρτιση, η συσκευή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίπου 3-8 ώρες, ανάλογα με το επίπεδο φωτεινότητας που χρησιμοποιείται.

Επειτα από χρόνια χρήσης, μπορεί να θελήσετε να αντικαταστήσετε την μπαταρία, η οποία είναι διαθέσιμη μόνο από την DermLite ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και πωλητή της DermLite. Μετά από εκατοντάδες χρήσεις, η μπαταρία θα φθαρεί με αποτέλεσμα μειωμένη χωρητικότητα ή/και επέκταση κυψελών ιόντων λιθίου. Παρακολουθήστε για σημάδια φθαρμένης μπαταρίας, όπως μειωμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, απροσδόκητα τερματισμό λειτουργίας, ακανόνιστη συμπεριφορά ή ξαφνική απώλεια ρεύματος. Εάν παρατηρήσετε, σταματήστε τη χρήση της συσκευής και μην φορτίζετε την μπαταρία. Αντικαταστήστε την μπαταρία και απορρίψτε το πρωτότυπο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Για να αλλάξετε την μπαταρία (B), τραβήξτε τον επιλογέα (D) πιάνοντάς τον από την εγκοπή του νυχιού, ξεβιδώστε τη βίδα του καλύμματος της μπαταρίας (CS) χρησιμοποιώντας το εργαλείο που παρέχεται με κάθε μπαταρία αντικατάστασης DL5 και αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας (BC). Αποσυνδέστε το μικρό λευκό βύσμα μπαταρίας (BP) και αφαιρέστε την μπαταρία (B). Τοποθετήστε μια νέα μπαταρία, επανασυνδέστε το βύσμα της μπαταρίας, επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας (BC), στερεώστε το με

τη βίδα του καλύμματος (CS) και στρώξτε τον επιλογέα (D) προς τα μέσα μέχρι να κουνιώσει στη θέση του.

Βάση φόρτισης

Για να φορτίσετε το DL5 χρησιμοποιώντας τη βάση φόρτισης, συνδέστε το μικρότερο άκρο (USBC) του παρεχόμενου καλωδίου USB στη θύρα τροφοδοσίας (PO) στο πίσω μέρος της βάσης φόρτισης (CB) και το μεγαλύτερο άκρο (USB) σε οποιοδήποτε IEC 60950-1 ή

Φορτιστής USB (5V) συμβατός με IEC62368-1. Τοποθετήστε το DL5 στη βάση φόρτισης, με την πλάκα επαφής (CP) στραμμένη προς τη βάση φόρτισης. Η βάση φόρτισης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση IceCap.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.derm-lite.com για τις τελευταίες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων. Αν η συσκευή σας απαιτεί επισκευή, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.derm-lite.com/service ή επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο σας και πωλητή της DermLite.

Φροντίδα και συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση αυτού του εξοπλισμού.

Η συσκευή σας έχει σχεδιαστεί για απρόσκοπτη λειτουργία. Οι επισκευές γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

Πριν τη χρήση σε έναν ασθενή, το εξωτερικό της συσκευής σας (εκτός από τα οπτικά μέρη) μπορεί να καθαριστεί με ισοπροπυλική αλκοόλη (70% vol.). Ο φακός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως φωτογραφικός εξοπλισμός υψηλής ποιότητας και πρέπει να καθαρίζεται με τον συνιστώμενο καθαρισμό των φακών και να προστατεύεται από επιβλαβείς χημικές ουσίες. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα καθαρισμού ή βυθίζετε τη συσκευή σε υγρό. Μη χρησιμοποιείτε αυτόκαυστο.

Εγγύηση: 5 έτη για ανταλλακτικά και εργασία. Η μπαταρία είναι εγγυημένη για 1 έτος.

Απορριψη

Αυτή η συσκευή περιέχει ηλεκτρονικά και μια μπαταρία ιόντων λιθίου τα οποία πρέπει να διαχωρίζονται κατά την διάρκεια της απορριψής και δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα γενικά οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε όπως τηρήσετε τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης.

Αυτό το σετ περιλαμβάνει:

DermLite DL5 (16 Λευκά LED, 4 UV LED, 4 PigmentBoost LED, 1 λευκό Torch LED, σύστημα φακών 32 mm με μεγέθυνση 10x, σύστημα μεταβλητής πόλωσης, αναδιπλούμενος διαχωριστής, αφαιρούμενη πρόσοψη με πλέγμα 10 mm, χάρακας), δερματική θήκη ζώνης, Καλώδιο φόρτισης USB, Βάση φόρτισης, προσοφθάλμιο προσοφθάλμιο, προσαρμογέας κινητής συσκευής MCC, πλάστική θήκη ζώνης (H), 5 IceCaps, πανί μικρώνων.

Τεχνική Περιγραφή

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.derm-lite.com/technical/ ή επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο και πωλητή της DermLite.

ИНСТРУКЦИИ

Предполагаемое использование

Этот прибор предназначен для медицинских целей для освещения поверхностей тела. Используется для неинвазивного визуального осмотра неповрежденной кожи.

Этот продукт с батарейным питанием предназначен для внешнего осмотра только в профессиональных медицинских учреждениях медицинскими работниками.

Перед использованием проверьте корректность работы устройства!

Не используйте устройство, если имеются видимые признаки повреждения, неисправности или если устройство работает не так, как описано в данной инструкции по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ: Не смотрите прямо на светодиодный свет. Пациенты должны закрывать глаза во время обследования.

В случае серьезного инцидента с использованием этого устройства немедленно уведомите DermLite и, если этого требуют местные правила, ваш национальный орган здравоохранения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте устройство в местах пожара или взрыва (например, в среде, богатой кислородом).

Осторожно: УФ-свет. Не смотрите прямо на свет.

ВНИМАНИЕ: Этот продукт содержит магниты. Не используйте вблизи кардиостимуляторов или других чувствительных к магнитам устройств или предметов.

ВНИМАНИЕ! Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая хлористый метилен и шестивалентный хром, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак или репродуктивную токсичность. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.P65Warnings.ca.gov.

Электромагнитная совместимость

Данное устройство соответствует требованиям уровня электромагнитной совместимости и уровня помехоустойчивости стандарта МЭК 60601-1-2: 2014. Излучающие характеристики этого оборудования делают его пригодным для использования в профессиональной медицинской среде, а также в жилых помещениях (CISPR 11, класс В). Это оборудование обеспечивает адекватную защиту радиосвязи. В редких случаях возникновения помех для службы радиосвязи пользователь может потребоваться принять меры по смягчению, такие как перемещение или переориентация оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Следует избегать использования данного оборудования рядом с другим оборудованием или в сочетании с другим оборудованием, так как это может привести к неправильной работе. Если такое использование необходимо, это оборудование и другое оборудование должны быть проверены, чтобы убедиться, что они работают нормально.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Использование принадлежностей, отличных от тех, которые предоставлены производителем данного оборудования, может привести к увеличению электромагнитных излучений или снижению электромагнитной помехоустойчивости данного оборудования и неправильной эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Переносные радиочастотные передатчики следует использовать на расстоянии не менее 30 см (12 дюймов) от любой части устройства. В противном случае это может привести к снижению производительности этого оборудования.

Не используйте это устройство во время магнитно-резонансной томографии (МРТ) или в условиях МРТ.

ВАЖНО: Перед первым использованием, пожалуйста, зарядите внутреннюю литий-ионную батарею. См. «Аккумулятор и зарядка» для получения подробной информации.

DermLite DL5 — это совместимый со смартфоном карманный дерматоскоп с 10-кратным увеличением для визуализации структур кожи с использованием переменного поляризованного света и УФ-освещения.

Держите DermLite DL5 так, чтобы светодиоды были направлены в направлении исследуемого поражения, на расстоянии примерно 12 мм от кожи. Нажмите главный выключатель (M), чтобы включить устройство в кросс-поляризованном режиме. Смотрите через объектив и перемещайте устройство ближе или дальше от кожи, чтобы сфокусировать изображение. Для дерматоскопии с контактом с кожей поверните диск фокусировки (FD), чтобы выдвинуть прокладку (S) и сфокусировать изображение. Нажмите и удерживайте главный выключатель (M) около 1 секунды, чтобы выключить устройство. Для экономии энергии устройство автоматически выключается через 3 минуты.

Переменная поляризация

Коснитесь основной кнопки (M), чтобы переключиться между кросс-поляризованным и неполяризованным освещением. Поверните основную кнопку, чтобы перейти к 9 настройкам поляризации, от кросс-поляризованного через неполяризованный до параллельно-поляризованного света. Индикаторная полоса (IS) отражает текущее состояние поляризации, тогда как «X» обозначает перекрестную поляризацию, «0» обозначает отсутствие поляризации, а «» обозначает параллельную поляризацию.

ПигментБуст®

Когда белый свет активен, нажмите (PB), чтобы активировать оранжевую подсветку PigmentBoost в дополнение к белому свету. Загорится светодиодный индикатор рядом с кнопкой PB (PB). Нажмите еще раз, чтобы деактивировать.

УФ-режим

Чтобы визуализировать флуоресцирующие структуры, нажмите кнопку УФ (УФ), чтобы активировать светодиоды с длиной волны 365 нм. Загорится светодиодный индикатор рядом с кнопкой УФ (UV). Нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться к ранее выбранному режиму белого света.

Фонарик

Чтобы осветить большие участки кожи или полости тела, нажмите кнопку фонарика (Т), чтобы активировать сверхяркий белый неполяризованный светодиод. Поверните главный выключатель (M), чтобы отрегулировать яркость фонарика.

Дерматоскопическая регулировка яркости

Чтобы отрегулировать яркость белых дерматоскопических светодиодов, удерживайте кнопку фонарика (Т) и одновременно поворачивайте главный выключатель (M). В режиме UV или PigmentBoost нажмите и удерживайте кнопку UV (или PB) и поверните главный переключатель, чтобы отрегулировать соответствующую яркость. Индикаторная полоса (IB) отображает текущий уровень яркости во время регулировки.

Окуляр

Для оптимального просмотра прикрепите прилагаемый окуляр (EP) к кольцу для принадлежности (EER).

Дерматоскопия смартфона

Для дерматоскопии с помощью смартфона или планшета надежно закрепите адаптер зажима MagnetiConnect (MCC), concentрически выровняв его над основной камерой вашего мобильного устройства. Прикрепите DL5 к кольцу MCC. Перед съемкой выдвиньте распорку (S) в положение «0» и начисто протрите стеклянную контактную пластину (CP).

Снятие контактной пластины

Поверните стеклянную контактную пластину (CP) против часовой стрелки, чтобы отсоединить ее, и поверните ее по часовой стрелке, чтобы снова прикрепить.

Правитель

Линейка (R) магнитно прикреплена к ручке. Нажмите на середину линейки и снимите ее, чтобы измерить повреждения кожи.

IceSap®

Для поддержки ваших мер инфекционного контроля, наденьте один из включенных одноразовых IceSaps (IC) поверх установленной лицевой панели (CP). Чтобы снять и утилизировать, просто снимите его.

Аккумулятор и зарядка

ВНИМАНИЕ. В этом устройстве используется специальный литий-ионный аккумулятор напряжением 3,7 В, 670 мАч, который можно приобрести только у DermLite или у авторизованного дилера DermLite. Ни при каких обстоятельствах не используйте другую батарею, кроме той, которая предназначена для данного устройства.

После сотен использований аккумулятор придет в негодность, что может привести к снижению емкости и/или расширению литий-ионного элемента. Отслеживайте признаки изношенности батареи, которые могут включать сокращение срока службы батареи, неожиданные отключения, нестабильное поведение или внезапную потерю питания. Если это наблюдается, прекратите использование устройства и не заряжайте аккумулятор. Замените батарею и утилизируйте оригинал в соответствии с местными правилами.

Это устройство оснащено четырехуровневым индикатором заряда (CI). Когда устройство включено и полностью заряжено, загораются все четыре светодиода. Если срок службы батареи составляет менее 75%, горят три светодиода. Если разряжена более половины батареи, горят два светодиода, а один светодиод указывает, что осталось менее 25% емкости батареи. Для зарядки устройства подключите прилагаемый кабель USB-C к USB-порту к порту для зарядки (PP) и к любому порту USB, совместимому с IEC 60950-1 (5 В). Индикатор заряда (CI) пульсирует для индикации заряда, причем количество пульсирующих светодиодов соответствует уровню заряда. Когда зарядка завершена, горят все четыре светодиодных индикатора. После нескольких лет использования вы можете заменить батарею, которую можно приобрести только у DermLite или у официального дилера DermLite.

После сотен использований аккумулятор ухудшится, что приведет к снижению емкости и/или расширению литий-ионного элемента. Следите за признаками износа батареи, такими как сокращение срока службы батареи, неожиданные отключения, нестабильное поведение или внезапная потеря питания. Если это наблюдается, прекратите использование устройства и не заряжайте аккумулятор. Замените батарею и утилизируйте оригинал в соответствии с местными правилами. Чтобы заменить батарею (B), снимите диск (D), взявшись за него за выемку под ногтем, отвинтите винт крышки батарейного отсека (CS) с помощью инструмента, входящего в комплект каждой сменной батареи DL5, и снимите крышку батарейного отсека (BC). Отсоедините небольшую белую заглушку аккумулятора (BP) и извлеките аккумулятор (B). Вставьте новую батарею,

снова подсоедините вилку батареи, снова прикрепите крышку батарейного отсека (BC), закрепите ее винтом крышки (CS) и надавите на диск (D) до щелчка.

Зарядная база

Чтобы зарядить DL5 с помощью зарядной базы, подключите меньший конец (USBС) прилагаемого USB-кабеля к порту питания (PO) на задней стороне зарядной базы (CB), а больший конец (USB) — к любому разъему IEC 60950. -1 или Зарядное устройство USB, соответствующее стандарту IEC62368-1 (5 В). Поместите DL5 в зарядную базу так, чтобы контактная пластина (CP) была обращена к зарядной базе. Зарядную базу также можно использовать для хранения IceSap.

Устранение неисправностей

Пожалуйста, проверьте dermlite.com для самой последней информации об устранении неполадок. Если ваше устройство требует обслуживания, посетите сайт www.dermlite.com/service или обратитесь к местному дилеру DermLite.

Уход и обслуживание

ВНИМАНИЕ: Модификация данного оборудования не допускается. Ваше устройство предназначено для бесперебойной работы. Ремонт должен выполняться только квалифицированным обслуживающим персоналом.

Уборка

Внешний вид вашего устройства, за исключением оптических частей, может быть вытерт чистым изопропиловым спиртом (70 об. %) перед использованием на пациенте. Объектив следует рассматривать как высококачественное фотографическое оборудование и очищать стандартным оборудованием для чистки объективов и защищать от вредных химических веществ. Не используйте абразивные материалы на любой части оборудования и не погружайте устройство в жидкость. Не автоклавируйте.

Гарантия: 5 лет на запчасти и работы. Батарея имеет гарантию 1 год.

Утилизация

Это устройство содержит электронику и литий-ионную батарею, которые должны быть отделены для утилизации и не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Пожалуйста, соблюдайте местные правила утилизации.

В этот набор входит:

DermLite DL5 (16 белых светодиодов, 4 УФ-светодиода, 4 светодиода PigmentBoost, 1 белый светодиод Torch, система линз 32 мм с 10-кратным увеличением, система переменной поляризации, выдвижная прокладка, съемная лицевая панель с сеткой 10 мм, стальная линейка), кожаный чехол для ремня, USB-кабель для зарядки, зарядная база, окуляр, адаптер мобильного устройства MCC, микрофибровая тряпка (H), 5 колпачков IceSaps, салфетка из мягкой ткани.

Техническое описание

Посетите www.dermlite.com/technical или обратитесь к местному дилеру DermLite.

Інструкції

Передбачуване використання

Цей пристрій призначений для медичних цілей для освітлення поверхонь тіла. Застосовується для неінвазивного візуального огляду нешкодженної шкіри.

Цей виріб, що працює від акумуляторів, призначений для зовнішнього огляду медичними працівниками лише у професійних закладах охорони здоров'я.

Перед використанням перевірте правильність роботи пристрою! Не використовуйте пристрій, якщо є видимі ознаки пошкодження, несправності або якщо пристрій працює у спосіб, що не відповідає тому, що описано в цій інструкції з використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не дивіться прямо у світлодіодне світло. Під час обстеження пацієнти повинні закрити очі.

У випадку серйозного інциденту з використанням цього пристрою негайно повідомте про це DermLite та, якщо це вимагається місцевими нормами, ваш національний орган охорони здоров'я.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте пристрій у зоні пожежі чи вибухонебезпеки (наприклад, у середовищі, багатому киснем).

Увага: УФ-світло. Не дивіться прямо на світло.

УВАГА: Цей виріб містить магніти. Не використовуйте поблизу кардіостимуляторів та інших магнітно чутливих пристроїв чи предметів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей продукт може піддавати дії хімічних речовин, включаючи метилхлорид та шестивалентний хром, які, як відомо, штату Каліфорнія викликають рак або репродуктивну токсичність. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.P65Warnings.ca.gov.

Електромагнітна сумісність

Цей пристрій відповідає вимогам щодо викидів EMC та рівня імунітету стандарту IEC 60601-1-2: 2014. Характеристики викидів цього обладнання роблять його придатним для використання в професійних медичних та житлових умовах (CISPR 11 класу B). Це обладнання забезпечує належний захист радіозв'язку. У рідкісних випадках переключення для служби радіозв'язку користувачеві може знадобитися вжити заходів щодо пом'якшення ситуації, таких як переміщення або переорієнтація обладнання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Слід уникати використання цього обладнання, розташованого поруч з іншим обладнанням або складеного з ним, оскільки це може призвести до неправильної роботи. Якщо таке використання є необхідним, слід спостерігати за цим обладнанням та іншим обладнанням, щоб переконатися, що вони працюють нормально.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використання аксесуарів, крім тих, що надані виробником цього обладнання, може призвести до збільшення електромагнітних випромінювань або зниження електромагнітної стійкості цього обладнання та призвести до неправильної роботи.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Портативні радіочастотні передавачі слід використовувати не ближче 30 см (12 дюймів) до будь-якої частини пристрою. Інакше це може призвести до погіршення експлуатаційних характеристик цього обладнання. Не використовуйте цей пристрій під час магнітно-резонансної томографії (МРТ) або в середовищі МРТ.

ВАЖЛИВО: Перед початком використанням зарядіть внутрішню літій-іонну батарею. Детальніше див. У розділі «Акумулятор та зарядка».

DermLite DL5 — сумісний зі смартфоном кишеньковий дерматоскоп із 10-кратним збільшенням для візуалізації структури шкіри за допомогою змінного поляризованого світла та УФ-освітлення.

Тримайте DermLite DL5 так, щоб світлодіоди були спрямовані в напрямку ураження, яке потрібно обстежити, приблизно на 12 мм над шкірою. Натисніть головний вимикач (M), щоб увімкнути пристрій у крос-поляризований режим. Подивіться крізь об'єктив і перемістіть пристрій ближче або далі від шкіри, щоб сфокусувати зображення. Для дерматоскопії з контактом зі шкірою поверніть диск фокусування (FD), щоб витягнути прокладку (S) і сфокусувати зображення. Натисніть і утримуйте головний вимикач (M) приблизно 1 секунду, щоб вимкнути пристрій. Для економії енергії пристрій автоматично вимикається через 3 хвилини.

Змінна поляризація

Торкніться головної кнопки (M), щоб перемикається між крос-поляризованим і неполяризованим освітленням. Повертайте головну кнопку, щоб переміщуватися в діапазоні з 9 налаштувань поляризації, від крос-поляризованого через неполяризоване до паралельно-поляризованого світла. Індикаторна смужка (IS) відображає поточний стан поляризації, тоді як «X» позначає перехресну поляризацію, «0» означає неполяризовану, а «=» означає паралельну поляризацію.

PigmentBoost®

Коли біле світло активне, торкніться (PB), щоб активувати попаричеве підсвічування PigmentBoost на додаток до білого світла. Світлодіодний індикатор поруч із кнопкою PB (PB) засвітиться. Натисніть ще раз, щоб деактивувати.

УФ режим

Щоб візуалізувати флуоресценцію структури, торкніться кнопки UV (UV), щоб активувати світлодіоди з довжиною хвилі 365 нм. Світлодіодний індикатор поруч із кнопкою UV (UV) засвітиться. Натисніть кнопку ще раз, щоб повернутися до попереднього вибраного режиму білого світла.

Ліхтарик

Щоб освітлити більші ділянки шкіри або порожнини тіла, торкніться кнопки ліхтарика (T), щоб увімкнути надяскравий білий неполяризований світлодіод. Поверніть головний вимикач (M), щоб відрегулювати яскравість ліхтарика.

Дерматоскопічне регулювання яскравості

Щоб налаштувати яскравість білих дерматоскопічних світлодіодів, утримуйте кнопку ліхтарика (T) і одночасно поверніть головний вимикач (M). У режимі UV або PigmentBoost натисніть і утримуйте кнопку UV (або PB) і поверніть головний вимикач, щоб відрегулювати відповідну яскравість. Смужка індикатора (IB) відображає поточний рівень яскравості під час налаштування.

Окуляр

Для оптимального перегляду прикріпіть магнітний окуляр (EP) до кільця аксесуарів (ER).

Дерматоскопія на смартфоні

Для дерматоскопії за допомогою смартфона або планшета надійно закріпіть адаптер затискача MagnetConnect (MCC), концентрично вирівнявши його над основною камерою мобільного пристрою. Приєднайте DL5 до кільця MCC. Перед фотографуванням витягніть прокладку (S) у положення «0» і протріть скляну контактну пластину (CP).

Зняття контактної пластини

Поверніть скляну контактну пластину (CP) проти годинникової стрілки, щоб від'єднати, поверніть її за годинниковою стрілкою, щоб приєднати знову.

Лінійка

Лінійка (R) магнітно прикріплена до ручки. Натисніть на середину лінійки та зніміть її, щоб виміряти пошкодження шкіри.

IceCap®

Щоб підтримати ваші заходи боротьби з інфекцією, встановіть один із включених одноразових IceCaps (IC) на встановлену передню панель (CP). Щоб виїняти та утилізувати, просто зніміть його.

Акумулятор і зарядка

УВАГА: цей пристрій використовує спеціальний літій-іонний акумулятор 3,7 В 670 mAh, який можна придбати лише в DermLite або в авторизованого дилера DermLite. За жодних обставин не використовуйте іншу батарею, крім тієї, що призначена для цього пристрою.

Після сотень використання батарея погіршиться, що може призвести до зменшення ємності та/або розширення літій-іонного елемента. Відстежуйте ознаки пошкодження батареї, які можуть включати скорочення терміну служби батареї, несподівані вимкнення, нестабільну поведінку або раптову втрату живлення. Якщо це спостерігається, припиніть використання пристрою та не заряджайте акумулятор. Замініть батарею та утилізуйте оригінал відповідно до місцевих норм. Цей пристрій оснащений чотирирівневим індикатором заряду (CI). Коли пристрій увімкнено і повністю заряджено, загоряються всі чотири світлодіоди. Коли залишається менше 75% часу автономної роботи, загоряються три світлодіоди. Якщо більше половини акумулятора розряджено, два світлодіоди світяться, тоді як один світлодіод вказує, що залишається менше 25% ємності акумулятора. Щоб зарядити пристрій, підключіть USB-C до USB-кабелю, що входить до комплекту, до зарядного порту (PP) та будь-якого USB-порту, сумісного з IEC 60950-1 (5 В). Індикатор заряду (CI) імпульсує, щоб вказати зарядку, із числом пульсуючих світлодіодів, що відповідає рівню заряду. Коли зарядка завершена, усі чотири світлодіодні індикатори світяться. Після багатьох років використання, можливо, ви захочете замінити акумулятор, який доступний лише безпосередньо у DermLite або в уповноваженого дилера DermLite.

Після сотень використань батарея погіршиться, що призведе до зменшення ємності та/або розширення літій-іонних елементів. Слідкуйте за ознаками погіршення роботи батареї, такими як скорочення терміну служби батареї, несподівані вимкнення, нестабільна поведінка або раптова втрата живлення. Якщо це спостерігається, припиніть використання пристрою та не заряджайте акумулятор. Замініть батарею та утилізуйте оригінал відповідно до місцевих норм. Щоб замінити батарею (B), зніміть циферблат (D), сховивши його за паз нігтя, відкрутіть гвинт кришки батареї (CS) за допомогою інструменту, що постачається з кожною змінною батареєю DL5, і зніміть кришку батареї (BC). Від'єднайте маленький білий штекер акумулятора (BP) і вийміть акумулятор (B). Вставте нову батарею, знову під'єднайте штекер кришки, знову прикріпіть кришку батареї (BC), закріпіть її гвинтом кришки (CS) і натисніть на диск (D), доки він не стане на місце.

Зарядна база

Щоб зарядити DL5 за допомогою зарядної бази, приєднайте менший (USBC) кінець USB-кабелю, що входить до комплекту, до порту живлення (PO) на задній панелі зарядної бази (CB), а більший (USB) кінець — до будь-якого стандарту IEC 60950 -1 або

Зарядний пристрій USB, сумісний з IEC62368-1 (5 В). Помістіть DL5 у зарядну базу контактної пластинкою (CP) до зарядної бази. Зарядну базу також можна використовувати для зберігання IceCap.

Вирішення проблем

Будь ласка, перевірте www.dermLite.com, щоб отримати найсвіжішу інформацію щодо усунення несправностей. Якщо ваш пристрій потребує обслуговування, відвідайте www.dermLite.com/service або зв'яжіться з місцевим дилером DermLite.

Догляд та обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не допускається модифікація цього обладнання. Ваш пристрій розроблений для безпечної роботи. Ремонт повинен проводити тільки кваліфікований сервісний персонал.

Прибирання

Зовнішній вигляд пристрою, крім оптичних деталей, перед використанням на пацієнті можна протирати ізопропіловим спиртом (70 об. %). Об'єктив слід розглядати як високоякісне фотообладнання та чистити стандартним обладнанням для чищення об'єктів та захищати від шкідливих хімічних речовин. Не використовуйте абразивний матеріал на будь-якій частині обладнання та не занурюйте пристрій у рідину. Не автоклавуйте.

Гарантія: 5 років на деталі та робочу силу. Гарантія на батарею становить 1 рік.

Утилізація

Цей пристрій містить електроніку та літій-іонну батарею, які потрібно відокремити для утилізації та не можна викидати разом із побутовими відходами. Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил утилізації.

Цей набір включає:

DermLite DL5 (16 білих світлодіодів, 4 УФ-світлодіоди, 4 світлодіоди PigmentBoost, 1 білий світлодіод Torch, 32-міліметрова система лінз із 10-кратним збільшенням, система змінної поляризації, висувна прокладка, змінна передня панель з 10-міліметровою сіткою, сталева лінійка), шкіряний чохол для ременя, USB-кабель для зарядки, зарядна база, окуляр, адаптер для мобільного пристрою MCC, пластикова кобура для пояса (H), 5 крижанок IceCaps, серветка з мікрофібри.

Технічний опис

Відвідайте www.dermLite.com/technical або зв'яжіться з місцевим дилером DermLite.

명령

사용 목적

이 장치는 신체 표면을 비추는 의료 목적으로 설계되었습니다. 손상되지 않은 피부의 비 침습적 육안 검사에 사용됩니다.

이 배터리 작동 제법은 의료 전문가가 전문 의료 시설 내에서만 외부 검사를 수행하도록 설계되었습니다.

사용하기 전에 장치의 올바른 작동을 확인하십시오! 눈에 띄는 손상, 오작동 징후가 있거나 장치가 이 사용 지침에 설명된 것과 일치하지 않는 방식으로 작동하는 경우 장치를 사용하지 마십시오.

주의: LED 표시등을 직접 보지 마십시오. 환자는 검사 중에 눈을 감아 야합니다.

이 장치를 사용하여 심각한 사고가 발생한 경우 즉시 DermLite에 알리고 현지 규정에 따라 필요한 경우 국 가 보건 당국에 알려십시오.

주의: 화재 또는 폭발 위험 구역 (예: 산소가 많은 환경)에서 장치를 사용하지 마십시오.

주의: UV 광선. 빛을 직접 보지 마십시오.

경고: 이 제품에는 자석이 포함되어 있습니다. 심박 조율기 나 기타 자기 적으로 민감한 장치 나 물건 근처에서 사용하지 마십시오.

경고: 이 제품은 암 또는 생식 독성을 유발하는 것으로 캘리포니아 주에 알려진 메틸렌 클로라이드 및 6가 크롬을 포함한 화학 물질에 노출 될 수 있습니다. 자세한 정보는 www.P65Warnings.ca.gov를 방문하십시오.

전자기 호환성

이 장치는 표준 IEC 60601-1-2: 2014의 EMC Emissions and Immunity 레벨 요구 사항을 준수합니다. 이 장치의 방출 특성으로 인해 전문 의료 환경 및 주거 환경 (CISPR 11 Class B)에서 사용하기에 적합합니다. 이 장치는 무선 통신 서비스를 적절히 보호합니다. 드물게 무선 통신 서비스에 간섭이 발생하는 경우 사용자는 장비를 재배치하거나 방향을 바꾸는 등의 완화 조치를 취해야 합니다. 경고: 이 장비는 다른 장비와 인접하거나 쌓아 놓은 상태에서 사용하지 마십시오. 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 그러한 사용이 필요한 경우, 이 장비와 다른 장비는 정상적으로 작동하는 지 확인해야 합니다.

경고: 이 장비 제조업체에서 제공 한 액세서리 이외의 액세서리를 사용하면 전자기 방출이 증가하거나 장비의 전자기 내성이 감소하여 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

경고: 휴대용 RF 송신기는 장치의 어느 부분과도 30cm (12 인치) 이상 떨어져서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 장비의 성능이 저하 될 수 있습니다. 자기공명영상(MRI) 또는 MRI 환경에서 이 장치를 사용하지 마십시오.

중요: 처음 사용하기 전에 내부 리튬 이온 배터리를 충전하십시오. 자세한 내용은 "배터리 및 충전"을 참조하십시오.

DermLite DL5는 가변 편광과 UV 조명을 사용하여 피부 구조를 시각화하기 위한 10배 배율의 스마트폰 호환 포켓 피부경입니다.

DermLite DL5를 피부 위 약 12mm에서 검사할 병변 방향으로 향하게 하여 잡으십시오. 메인 스위치(M)를 눌러 교차 극성 모드에서 장치를 켭니다. 렌즈를 통해 보고 장치를 피부에서 가까이 또는 멀리 움직여 이미지의 초점을 맞춥니다. 피부 접촉이 있는 피부경 검사 의 경우 초점 다이얼(FD)을 돌려 스페이서(S)를 확장 하고 이미지의 초점을 맞춥니다. 메인 스위치(M)를 약 1초 동안 누르고 있으면 장치가 꺼집니다. 전원을 절약하기 위해 3분 후에 장치가 자동으로 꺼집니다.

가변 편광

메인 버튼(M)을 눌러 교차 편광과 비편광 조명 사이를 전환합니다. 메인 버튼을 돌려 교차 편광에서 무편광을 거쳐 평행 편광까지 9가지 편광 설정 범위를 이동합니다. 표시기 스트립(S)은 현재 편광 상태를 반영하는 반면 "X"는 교차 편광을 표시하고 "0"은 비편광을 나타내고 "-"는 평행 편광을 나타냅니다.

피그먼트 부스트®

백색광이 활성화된 상태에서 (PB)를 탭하면 백색광 외에 주황색 PigmentBoost 조명이 활성화됩니다. PB 버튼(PB) 옆의 표시 LED가 켜집니다. 비활성화하려면 다시 탭하세요.

UV 모드

형광 구조를 시각화하려면 UV 버튼(UV)을 눌러 파장이 365 nm인 LED를 활성화합니다. UV 버튼(UV) 옆의 표시 LED가 켜집니다. 버튼을 다시 누르면 이전에 선택한 백색광 모드로 돌아갑니다.

플래시

더 넓은 피부 영역이나 체강을 밝히려면 손전등 버튼(T)을 눌러 매우 밝은 흰색 무극성 LED를 활성화하십시오. 메인 스위치(M)를 돌려 손전등 밝기를 조정합니다.

더모스코프 밝기 조정

백색 더모스코프 LED의 밝기를 조정하려면 손전등 버튼(T)을 누른 상태에서 동시에 메인 스위치(M)를 돌립니다. UV 또는 PigmentBoost 모드에서 UV(또는 PB) 버튼을 길게 누르고 메인 스위치를 돌려 각각의 밝기를 조정합니다. 표시줄(IB)은 조정 중 현재 밝기 수준을 반영합니다.

접안 렌즈

최적의 보기를 위해 포함된 접안렌즈(EP)를 액세서리 링(ER)에 고정하십시오.

스마트폰 피부경 검사

스마트폰 또는 태블릿을 사용한 피부경 검사 의 경우 모바일 장치의 기본 카메라에 동심으로 정렬된 MagnetConnect 클램프 어댑터(MCC)를 단단히 고정합니다. DL5를 MCC 링에 연결합니다. 이미지를 촬영하기 전에 스페이서(S)를 "0" 위치로 확장하고 유리 접촉판(CP)을 깨끗하게 닦습니다.

접촉판 제거

유리 접촉판(CP)을 시계 반대 방향으로 돌려 분리하고 시계 방향으로 돌려 다시 부착합니다.

자

자 금속자(R)는 손잡이에 자석으로 부착되어 있습니다. 자의 가운데 부분을 누르고 떼어내면 피부 병변을 측정할 수 있습니다.

IceCap®

감염 관리 조치를 지원하려면 포함 된 일회용 IceCap(IC) 중 하나를 설치된 페이스 플레이트(CP)에 끼웁니다. 제거하고 폐기하려면 간단히 당기십시오.

배터리 및 충전

주의: 이 장치는 특수 3.7V 3000mAh 리튬 이온 배터리를 사용합니다. 이 배터리는 DermLite 또는 공인 DermLite 대리점에서만 구입할 수 있습니다. 어떠한 경우에도 본 장치용으로 설계된 배터리 이외의 다른 배터리를 사용하지 마십시오.

수백 번 사용하면 배터리 성능이 저하되어 용량 감소 및/또는 리튬 이온 셀 확장이 발생할 수 있습니다. 배터리 수명 감소, 예상치 못한 종료, 비정상적인 동작 또는 갑작스러운 전력 손실 등을 포함할 수 있는 성능 저하된 배터리의 징후를 모니터링합니다. 관찰된 경우 장치 사용을 중지하고 배터리를 충전하지 마십시오. 배터리를 교체하고 현지 규정에 따라 원본을 폐기하십시오.

이 장치에는 4 단계 충전 표시기(CI)가 장착되어 있습니다. 장치가 켜져 있고 완전히 충전되면 4 개의 LED가 모두 켜집니다. 배터리 수명의 75 % 미만이 남아 있으면 3 개의 LED가 켜집니다. 배터리가 절반 이상 소모되면 두 개의 LED가 켜지고 단일 LED는 배터리 용량의 25 % 미만이 남아 있음을 나타냅니다. 장치를 충전하려면 제공된 USB-C-USB 케이블을 충전 포트(PP) 및 IEC 60950-1 호환 (5V) USB 포트에 연결하십시오. 충전 표시기(CI)는 충전 레벨에 해당하는 펄스 LED 수와 함께 충전을 나타 내기 위해 필수입니다. 충전이 완료되면 4 개의 표시기 LED가 모두 켜집니다. 몇 년 동안 사용한 후에는 배터리를 교체 할 수 있습니다. 이 배터리는 DermLite 또는 공인 DermLite 대리점에서만 직접 구입할 수 있습니다.

수백 번 사용하면 배터리 성능이 저하되어 용량이 감소하거나 리튬 이온 셀이 확장됩니다. 배터리 수명 감

소, 예상치 못한 종료, 비정상적인 동작 또는 갑작스러운 정전 등 배터리 성능 저하 징후를 모니터링합니다. 관찰된 경우 장치 사용을 중지하고 배터리를 충전하지 마십시오. 배터리를 교체하고 현지 규정에 따라 원본을 폐기하십시오. 배터리(B)를 교체하려면 다이얼(D)의 손톱 홈을 잡아 당겨 빼낸 후 각 DL5 교체 배터리와 함께 제공된 도구를 사용하여 배터리 커버 나사(CS)를 풀고 배터리 커버(BC)를 제거합니다. 작은 흰색 배터리 플러그(BP)를 분리하고 배터리(B)를 제거합니다. 새 배터리를 삽입하고, 배터리 플러그를 다시 연결하고, 배터리 커버(BC)를 다시 부착하고, 커버 나사(CS)로 고정 한 다음 딸깍 소리가 날 때까지 다이얼(D)을 밀어 넣습니다.

충전대

충전대를 사용하여 DL5를 충전하려면 제공된 USB 케이블의 작은 쪽(USBC)을 충전대(CB) 뒷면의 전원 포트(PO)에 연결하고 큰 쪽(USB)을 IEC 60950 케이블에 연결하세요. -1 또는 IEC62368-1 규격(5V) USB 충전기. 접촉 플레이트(CP)가 충전 베이스를 향하도록 하여 DL5를 충전 베이스에 놓습니다. 충전 베이스는 IceCap 보관에도 사용할 수 있습니다.

문제 해결 최신 문제 해결 정보는 dermlite.com을 확인하십시오. 장치를 수리해야 하는 경우 www.dermlite.com/service를 방문하거나 해당 지역의 DermLite 대리점에 문의하십시오.

관리 및 유지 보수

경고: 이 장비의 개조는 허용되지 않습니다. 장치는 문제없이 작동하도록 설계되었습니다. 수리는 자격을 갖춘 서비스 직원 만 수행해야 합니다.

청소

광학 부품을 제외한 장치 외부는 환자에게 사용하기 전에 이소 프로필 알코올 (70 % vol.)로 깨끗하게 닦을 수 있습니다. 렌즈는 고품질 사진 장비로 취급해야 하며 표준 렌즈 청소 장비로 청소하고 유해 화학 물질로부터 보호해야 합니다. 장비의 어느 부분에도 연마재를 사용하지 마십시오. 장치를 액체에 담그지 마십시오. 고압 멸균하지 마십시오.

보증: 부품 및 인건비 5 년 배터리는 1 년간 보증됩니다.

폐기

이 장치에는 전자 제품과 리튬 이온 배터리가 포함되어 있으며 폐기 용으로 분리해야 하며 일반 가정 쓰레기와 함께 폐기해서는 안 됩니다. 현지 폐기 규정을 준수하십시오.

이 세트에는 다음이 포함됩니다.

DermLite DL5 백색 LED 16개, UV LED 4개, PigmentBoost LED 4개, 백색 터치 LED 1개, 10배 배율의 32mm 렌즈 시스템, 가변 편광 시스템, 개폐식 스페이서, 10mm 레티클이 있는 탈착식 페이스 플레이트, 강철 눈금자, 가죽 벨트 케이스, USB 충전 케이블, 충전 베이스, 아이피스, MCC 모바일 장치 어댑터, 플라스틱 벨트 홀스터(H), 아이스캡 5개, 극세사 천.

기술 설명

www.dermlite.com/technical을 방문하거나 가까운 DermLite 대리점에 문의하십시오.

説明書

使用目的

このデバイスは、体の表面を照らす医療目的を目的としています。それは無傷の皮膚の非侵襲的目視検査に使用されます。

この電池式製品は、医療専門家による専門医療施設内での外部検査用に設計されています。

使用前にデバイスが正しく動作することを確認してください。

目に見える損傷や故障の兆候がある場合、またはデバイスがこの使用説明書に記載されている内容と一致しない方法で動作する場合は、デバイスを使用しないでください。

注意：LEDライトを直接見ないでください。患者は検査中に目を閉じなければなりません。

このデバイスの使用で重大な事故が発生した場合は、DermLiteにすぐに通知し、現地の規制で必要な場合は、各国の保健当局に通知してください。

注意：火災や爆発の危険がある場所（酸素が豊富な環境など）でデバイスを使用しないでください。

注意：UVライト。光を直接見ないでください。

警告：この製品には磁石が含まれています。ペースメーカーや他の磁気に敏感なデバイスやアイテムの近くで使用しないでください。

警告：この製品は、カリフォルニア州で癌または生殖毒性を引き起こすことが知られている塩化メチレンや六価クロムなどの化学物質にさらされる可能性があります。詳細については、www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

電磁両立性

このデバイスは、標準のIEC 60601-1-2:2014のEMCエミッションおよびイミュニティレベルの要件に準拠しています。この装置のエミッション特性は、住宅環境だけでなくプロのヘルスケア環境（CISPR 11クラスB）での使用に適しています。この機器は、無線通信サービスを適切に保護します。無線通信サービスへの干渉がまれに発生した場合、ユーザーは、機器の再配置や方向変更などの緩和策を講じる必要がある場合があります。警告：この装置を他の装置に隣接して、または積み重ねて使用すると、不適切な動作を引き起こす可能性があるため、使用を避けてください。そのような使用が必要な場合は、この装置および他の装置を観察して、それらが正常に動作していることを確認する必要があります。

警告：この機器の製造元が提供するもの以外のアクセサリを使用すると、電磁放射が増加したり、この機器の電磁耐性が低下したりして、不適切な動作を引き起こす可能性があります。

警告：ポータブルRFトランスミッターは、デバイスのどの部分からも30 cm（12インチ）以上離れて使用しないでください。そうしないと、この機器のパフォーマンスが低下する可能性があります。

磁気共鳴画像法（MRI）中またはMRI環境でこのデバイスを使用しないでください。

重要：最初に使用する前に、内蔵リチウムイオンバッテリーを充電してください。詳細については、「バッテリーと充電」を参照してください。

DermLite DL5は、可変偏光とUV照明を使用して皮膚構造を視覚化するための倍率10倍のスマートフォン対応ポケットダーマトスコープです。

DermLite DL5を保持し、LEDを検査する病変の方向、皮膚から約12 mm上に向けます。メインスイッチ(M)を押して、交差偏光モードでデバイスをオンにします。レンズを通して見て、デバイスを肌に近づけたり遠ざけたりして、画像の焦点を合わせます。スキンコンタクトのあるダーモスコピーでは、フォーカスダイヤル(FD)を回してスパーサー(S)を伸ばし、画像の焦点を合わせます。メインスイッチ(M)を約1秒長押しすると電源が切れます。電力を節約するために、ユニットは3分後に自動的にオフになります。

可変偏光

メインボタン(M)をタップして、交差偏光照明と非偏光照明を切り替えます。メインボタンを回して、交差偏光から非偏光を介して平行偏光まで、9つの偏光設定の範囲を移動します。インジケータストリップ(IS)は現在の偏光状態を反映します。「X」は交差偏光、「0」は非偏光、「=」は平行偏光を表します。

ピグメントブースト®

白色光がアクティブなときに(PB)をタップすると、白色光に加えてオレンジ色のPigmentBoost照明がアクティ

ブになります。PBボタン(PB)の横にあるインジケータLEDが点灯します。無効にするには、もう一度タップします。

UVモード

蛍光構造を視覚化するには、UVボタン(UV)をタップして、365 nmの波長のLEDをアクティブにします。UVボタン(UV)の横にあるインジケータLEDが点灯します。ボタンをもう一度タップすると、以前に選択した白色光モードに戻ります。

懐中電灯

より広い皮膚領域または体腔を照らすには、懐中電灯ボタン(T)をタップして、超高輝度白色無偏光LEDを有効にします。メインスイッチ(M)を回して懐中電灯の明るさを調整します。

皮膚鏡の明るさ調整

皮膚鏡検査用白色LEDの明るさを調整するには、懐中電灯ボタン(T)を押しながらメインスイッチ(M)を回します。UVまたはPigmentBoostモードで、UV(またはPB)ボタンを押したままメインスイッチを回して、それぞれの明るさを調整します。インジケータバー(IB)は、調整中の現在の輝度レベルを反映します。

接眼レンズ

付属の磁気接眼レンズ(EP)を付属のリング(ER)に取り付けて、最適な視界を確保してください。

スマホダーモスコピー

スマートフォンまたはタブレットを使用したダーモスコピーでは、MagnetConnectクランプアダプター(MCC)をモバイルデバイスのメインカメラに同心円状にしっかりと固定します。DL5をMCCリングに取り付けます。画像を撮影する前に、スパーサー(S)を「0」の位置まで伸ばし、ガラスコンタクトプレート(CP)をきれいに拭きます。

コンタクトプレートの取り外し

ガラスコンタクトプレート(CP)を反時計回りに回して取り外し、時計回りに回して再取り付けします。

ルーラー

定規(R)はハンドルに磁石でくっついています。定規の中央を押し下げて外し、皮膚病変を測定します。

IceCap®

感染制御対策をサポートするには、付属の使い捨てIceCaps(IC)のいずれかを、取り付けられたフェースプレート(CP)にスナップします。取り外して廃棄するには、単純に取り外します。

バッテリーと充電

注意：このデバイスは特別な3.7V 3000mAhリチウムイオンバッテリーを使用しています。このバッテリーは、DermLiteまたはDermLite認定ディーラーからのみ購入できます。いかなる場合でも、本機専用のバッテリー以外は使用しないでください。

何百回も使用するとバッテリーが劣化し、容量の低下やリチウムイオン電池の膨張が起こる可能性があります。バッテリー寿命の低下、予期しないシャットダウン、不安定な動作、突然の電源喪失など、バッテリーの劣化の兆候を監視します。観察された場合は、デバイスの使用を中止し、バッテリーを充電しないでください。バッテリーを交換し、元のバッテリーは地域の規制に従って廃棄してください。このデバイスには、4レベルの充電インジケータ(CI)が装備されています。ユニットの電源を入れて完全に充電すると、4つのLEDがすべて点灯します。バッテリーの寿命が75%未満になると、3つのLEDが点灯します。バッテリーの半分以上が消耗すると、2つのLEDが点灯しますが、1つのLEDはバッテリー容量の25%未満が残っていることを示します。デバイスを充電するには、付属のUSB-C-USBケーブルを充電ポート(PP)およびIEC 60950-1準拠(5V)USBポートに接続します。充電インジケータ(CI)は、充電レベルを示すパルスLEDの数で充電を示すためにパルスします。充電が完了すると、4つのインジケータLEDがすべて点灯します。長年使用した後、バッテリーを交換することをお勧めします。このバッテリーは、DermLiteまたは正規のDermLiteディーラーから直接入手できます。

何百回も使用すると、バッテリーが劣化し、容量の低下やリチウムイオン電池の膨張が生じます。バッテリー寿命の低下、予期しないシャットダウン、不安定な動作、または突然の電源喪失など、バッテリーの劣化の兆候を監視します。観察された場合は、デバイスの使用を中止し、バッテリーを充電しないでください。バッテリーを交換し、元のバッテリーは地域の規制に従って廃棄してください。電池(B)を交換するには、ダイヤル(D)の爪の部分をつかんで引き抜き、DL5交換用電池に付属の工具を使用して電池カバーのねじ(CS)を緩め、電池カバー(BC)を取り外します。小さな白いバッテリーブラグ(BP)を外し、バッテ

リー(B)を取り外します。新しい電池を入れ、電池ブラグを差し込み、電池カバー(BC)を取り付け、カバーネジ(CS)で固定し、ダイヤル(D)をカチッと音がするまで押し込みます。

充電ベース

充電ベースを使用してDL5を充電するには、付属のUSBケーブルの小さい方(USBC)端を充電ベース(CB)の背面にある電源ポート(PO)に接続し、大きい方(USB)端を任意のIEC 60950に接続します。-1またはIEC62368-1準拠(5V)のUSB充電器。コンタクトプレート(CP)が充電ベースの方を向くように、DL5を充電ベースに置きます。充電ベースはIceCapの保管にも使用できます。

のトラブルシューティング 最新のトラブルシューティング情報については、dermlite.comを確認してください。デバイスの修理が必要な場合は、www.dermlite.com/serviceにアクセスするか、最寄りのDermLiteディーラーにお問い合わせください。

お手入れとメンテナンス

警告：この装置の改造は許可されていません。お使いのデバイスは、問題のない操作ができるように設計されています。修理は、資格のあるサービス担当者のみが行う必要があります。

クリーニング

患者に使用する前に、光学部品を除くデバイスの外側をイソプロピルアルコール(70%vol.)で拭いてください。レンズは高品質の写真機器として扱い、標準のレンズクリーニング機器でクリーニングし、有害な化学物質から保護する必要があります。装置のどの部分にも研磨材を使用したり、デバイスを液体に浸したりしないでください。オートクレーブしないでください。

保証：部品および労働に対して5年。バッテリーは1年間保証されます。

廃棄

このデバイスには、電子機器とリチウムイオン電池が含まれています。リチウムイオン電池は廃棄するために分離する必要があります。一般家庭ごとと一緒に廃棄することはできません。現地の廃棄規制を遵守してください。

このセットには以下が含まれます：
DermLite DL5 (16個の白色LED、4個のUV LED、4個のPigmentBoost LED、1個の白色トーチLED、倍率10倍の32 mmレンズシステム、可変偏光システム、格納式スパーサー、10 mm レチクル付きの取り外し可能なフェースプレート、スチール製定規)、レーザーベルトケース、USB充電ケーブル、充電ベース、アイピース、MCCモバイルデバイスアダプター、プラスチックベルトホルスター(H)、5個のIceCap、マイクロファイバークロス。

技術説明

www.dermlite.com/technicalにアクセスするか、最寄りのDermLiteディーラーにお問い合わせください。

使用说明

有可能的使用

该设备旨在用于医疗目的，以照亮身体表面。它用于完整皮肤的非侵入性视觉检查。

该电池供电产品仅设计用于医疗专业人员在专业医疗机构内进行的外部检查。

使用前检查设备操作是否正确！

如果存在明显的损坏、故障迹象，或者设备的运行方式与本使用说明中描述的不符，请勿使用该设备。

注意：请勿直视LED灯。患者在检查过程中必须闭上眼睛。

如果在使用此设备时发生严重事故，请立即通知DermLite，并在当地法规要求的情况下通知您的国家卫生部门。

注意：请勿在有火灾或爆炸危险的区域（例如，富氧环境）中使用设备。

注意：紫外线。不要直视光。

警告：本产品包含磁铁。请勿在起搏器或其他对磁性敏感的设备或物品附近使用。

警告：本产品可使您暴露于加利福尼亚州已知会引起癌症或生殖毒性的化学物质，包括二甲甲烷和六价铬。有关更多信息，请访问www.P65Warnings.ca.gov。

电磁兼容

此设备符合标准IEC 60601-1-2：2014的EMC辐射和抗扰等级要求。该设备的发射特性使其适合在专业医疗保健环境以及住宅环境中使用（CISPR 11 B类）。该设备为无线电通信服务提供了足够的保护。在极少数情况下，会干扰无线电通信服务，用户可能需要采取缓解措施，例如重新放置设备或重新定向设备。警告：应避免在与其他设备相邻或与之堆叠的情况下使用此设备，因为这可能会导致操作不当。如果有必要使用此设备，则应观察本设备和其他设备以确保它们正常运行。

警告：使用本设备制造商提供的附件以外的附件可能会导致电磁辐射增加或本设备的电磁抗扰性降低，并导致操作不当。

警告：便携式RF发射器的使用距离设备的任何部分都不应少于30厘米（12英寸）。否则，可能会导致设备性能下降。请勿在磁共振成像（MRI）期间或在MRI环境中使用此设备。

重要信息：初次使用前，请给内置锂离子电池充电。有关详细信息，请参见“电池和充电”。

DermLite DL5是一款兼容智能手机的袖珍皮肤镜，放大10倍，可使用可变偏振光和紫外线照明来观察皮肤结构。

握住您的DermLite DL5，使LED对准要检查的病变方向，在皮肤上方约12毫米处。按下主开关（M）以在交叉极化模式下打开设备。透过镜头观察并将设备移近或远离皮肤以聚焦图像。对于与皮肤接触的皮肤镜检查，旋转聚焦转盘（FD）以扩展垫片（S）并聚焦图像。按住主开关（M）约1秒钟以关闭设备。为节省电量，设备会在3分钟后自动关闭。

可变极化

点击主按钮（M）在交叉偏振和非偏振照明之间切换。转动主按钮可在9种偏振设置范围内移动，从交叉偏振光到非偏振光到平行偏振光。

指示条（IS）反映当前极化状态，“X”表示交叉极化，“0”表示非极化，“=”表示平行极化。

PigmentBoost®

当白光处于活动状态时，点击（PB）以激活除白光外的橙色PigmentBoost照明。PB按钮（PB）旁边的LED指示灯将亮起。再次点击以停用。

紫外线模式

要可视化荧光结构，请点击UV按钮（UV）以激活波长为365 nm的LED。UV按钮（UV）旁边的LED指示灯将亮起。再次点击该按钮可返回之前选择的白光模式。

手电筒

要照亮更大的皮肤区域或体腔，请点击手电筒按钮（T）以激活超亮白色非偏振LED。转动主开关（M）调节手电筒亮度。

皮肤镜亮度调节

要调整白色皮肤镜LED的亮度，请按住手电筒按钮（T）并同时转动主开关（M）。在UV或PigmentBoost模式下，按住UV（或PB）按钮并转动主开关以调节相应的亮度。指示条（IB）反映了调整期间的当前亮度级别。

目镜

为获得最佳观察效果，请将随附的目镜（EP）固定在附件环（ER）上。

智能手机皮肤镜

对于使用智能手机或平板电脑进行皮肤镜检查，将MagnetConnect夹具适配器（MCC）牢固地固定在移动设备的主摄像头中心对齐。将您的DL5连接到MCC环。拍摄图像之前，将垫片（S）延伸到“0”位置，然后将玻璃接触板（CP）擦拭干净。

卸下接触板

逆时针转动玻璃接触板（CP）以分离，顺时针转动以重新连接。

统治者

尺子（R）以磁性方式固定在手柄上。按下标尺的中间并将其取下以测量皮肤损伤。

IceCap®：

为了支持您的感染控制措施，请将随附的一次性IceCap（IC）之一卡在已安装的面板（CP）上。要卸下和处理，只需将其拉下即可。

电池和充电

注意：本设备使用特殊的3.7V 3000mAh锂离子电池，只能从DermLite或授权的DermLite经销商处购买。在任何情况下都不要使用除为本装置设计的电池以外的其他电池。

经过数百次使用后，电池会退化，这可能会导致容量降低和/或锂离子电池膨胀。监视电池老化的迹象，其中可能包括电池寿命缩短、意外关机、行为异常或突然断电。如果发现，请停止使用该设备并且不要给电池充电。更换电池并按照当地法规处理原电池。

该设备配备了四级充电指示器（CI）。当本机打开并充满电时，所有四个LED点亮。当剩余电池寿命不足75%时，三个LED会亮起。如果电池电量消耗了一半以上，则两个LED会亮起，而单个LED则表示电池剩余容量不足25%。要为设备充电，请将随附的USB-C到USB电缆连接到充电端口（PP）和任何符合IEC 60950-1的（5V）USB端口。充电指示器（CI）脉冲指示充电，脉冲LED的数量与充电

水平相对应。充电完成后，所有四个指示灯均点亮。使用多年后，您可能希望更换电池，该电池只能从DermLite或DermLite授权经销商处直接获得。

经过数百次使用后，电池会老化，导致容量降低和/或锂离子电池膨胀。监视电池老化的迹象，例如电池寿命缩短、意外关机、异常行为或突然断电。如果发现，请停止使用该设备并且不要给电池充电。更换电池并按照当地法规处理原电池。要更换电池（B），请抓住指甲凹口处的拨盘（D），将其拉出，使用每个DL5更换电池附带的工具拧下电池盖螺丝（CS），然后取下电池盖（BC）。拔出白色小电池插头（BP）并取出电池（B）。插入新电池，重新连接电池插头，重新装上电池盖（BC），用盖螺钉（CS）固定，然后推入转盘（D），直至其卡入到位。

充电底座

要使用充电底座为DL5充电，请将随附USB电缆的较小（USB-C）端连接到充电底座（CB）背面的电源端口（PO），并将较大（USB）端连接到任何IEC 60950-1或符合IEC62368-1标准（5V）USB充电器。将DL5放入充电底座，接触板（CP）朝向充电底座。充电底座还可用于IceCap存储。

故障排除

请访问dermlite.com获取最新的故障排除信息。如果您的设备需要维修，请访问www.dermlite.com/service或联系当地的DermLite经销商。

保养与维护

警告：禁止改装该设备。您的设备设计为无故障运行。只能由合格的维修人员进行维修。

清洁

在对患者使用之前，可以用异丙醇（70%体积）将设备的外部（光学部件除外）擦拭干净。镜头应被视为高质量的照相设备，应使用标准的镜头清洁设备进行清洁并保护其免受有害化学物质的侵害。请勿在设备的任何部分上使用研磨材料或将设备浸入液体中。不要高压灭菌。

保修：5年零件和人工。电池保修一年。

处置

此设备包含电子设备和锂离子电池，必须将其分开处置，不得与一般家庭垃圾一起处置。请遵守当地的处置规定。

这套包括：

DermLite DL5（16个白色LED、4个UV LED、4个PigmentBoost LED、1个白色Torch LED、32毫米放大10倍的透镜系统、可变偏振系统、可伸缩垫片、带10毫米十字线的可拆卸面板、钢尺）、皮带盒、USB充电线、充电底座、目镜、MCC移动设备适配器、塑料皮带皮套（H）、5个IceCaps、超细纤维布。

技术说明

请访问www.dermlite.com/technical或联系您当地的DermLite经销商。

**REF****SN**

Manufacturer
 Proizvođač
 Výrobce
 Fabrikant
 Hersteller
 Tootja
 Fabricante
 Fabricant
 Déantúsóir
 Proizvođač
 Fabbricante
 Ražotājs
 Gamintojas
 Gyártó
 Fabrikant
 Producent
 Fabricante
 Producător
 Proizvajalec
 Výrobca
 Valmistaja
 Tillverkare
 Üretici firma
 Κατασκευαστής
 Производитель
 производитель
 Виробник
 제조사
 メーカー
 制造商

Catalog Number
 Kataloški broj
 Katalogové číslo
 Katalognummer
 Katalognummer
 Tootjainumber
 Numero de catalogo
 Fabricant
 Uimhir Catalog
 Kataloški broj
 Numero di catalogo
 Kataloga numurs
 Katalogo numeris
 Katalógus szám
 Catalogus nummer
 Numer katalogu
 Número de catálogo
 Catalog Number
 Kataloška številka
 Katalógové číslo
 Luettelonumero
 Katalognummer
 Katalog numarası
 Αριθμός καταλόγου
 Каталоген номер
 Номер каталога
 Номер каталогу
 카탈로그 번호
 カタログ番号
 目录编号

Serial Number
 Serijski broj
 Sériové číslo
 Seriennummer
 Seriennummer
 Seerianumber
 Número de serie
 Numéro de série
 Uimhir Sraithuimhir
 Serijski broj
 Numero di serie
 Sērijas numurs
 Serijos numeris
 Sorozatszám
 Seriennummer
 Numer seryjny
 Número de série
 Serijska številka
 Sériové číslo
 Sarjanumero
 Seriennummer
 Seri numarası
 Σειριακός αριθμός
 Серийный номер
 Серийный номер
 Серійний номер
 일련 번호
 シリアルナンバー
 序列号

Date of Manufacture
 Datum proizvodnje
 Datum výroby
 Fremstilling dato
 Herstdatum
 Tootmiskuupäev
 Fecha de manufactura
 Date de fabrication
 Dáta an Déantúsaíochta
 Datum proizvodnje
 Data di produzione
 Izgatavošanas datums
 Pagaminimo data
 Gyártás dátuma
 Fabricagedatum
 Data produkci
 Data de fabricaço
 Data fabricatiei
 Datum izdelave
 Dátum výroby
 Valmistuspäivämäärä
 Tillverkningsdatum
 Üretim tarihi
 Ημερομηνία παραγωγής
 Дата на производство
 Дата производства
 Дата виготовлення
 제조 일자
 製造日
 生产日期

Refer to instruction manual
 Pogledajte uputstvo za upotrebu
 Viz návod k použití
 Se brugsanvisningen
 Gebrauchsanweisung beachten
 Vaadake kasutusjuhendit
 Consulte el manual de instrucciones
 Se référer au manuel d'instructions
 Déan tagairt don lámhleabhar treoracha
 Pogledajte priručnik s uputama
 Fare riferimento al manuale di istruzioni
 Skatiet lietošanas pamācību
 Žr. naudojimo vadovą
 Lásd a használati útmutatót
 Raadpleeg de handleiding
 Zapoznaj się z instrukcją obsługi
 Consulte o manual de instruções
 Consultati manualul de instrucțiuni
 Glejte navodila za uporabo
 Pozrite si návod na použitie
 Katso käyttöohje
 Se bruksanvisningen
 kullanim kilavuzuna bakin
 Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών
 Обърнете се към ръководството за употреба
 См. руководство по эксплуатации
 Зверніться до інструкції з експлуатації
 사용 설명서 참조
 取扱説明書参照
 参考说明书

MD

Medical Device
 Medicinski savjet
 Zdravotnické zařizení
 Medicinsk udstyr
 Medizinisches Gerät
 Meditsiiniline seade
 Dispositivo médico
 Dispositif médical
 Feiste leighis
 Medicinski uređaj
 Dispositivo medico
 Medicīniska iekārta
 Medicininis prietaisas
 Orvosi eszköz
 Medisch apparaat
 Urządzenie medyczne
 Aparelho médico
 Aparat medical
 Medicinski pripomoček
 Zdravotnicke pomôcky
 Lääketieteellinen laite
 Medicinsk utrustning
 Tibbi cihaz
 Ιατρική συσκευή
 Медицинско изделие
 Медицинский прибор
 Медичний прилад
 의학 기기
 医療機器
 医疗设备

Direct Current
 Prava struja
 Stejnoseměrný proud
 Jævnstrøm
 Gleichstrom
 Alalisvool
 Corriente continua
 Courant continu
 Sruth díreach
 Prava struja
 Corrente continua
 Līdzstrāva
 Nuolatinė srovė
 Egyenáram
 Gelijkstroom
 Prąd stały
 Corrente diretta
 Curent continuu
 Enosmerni tok
 Priamy prúd
 Tasavirta
 Likström
 Doğru akım
 Συνεχές ρεύμα
 Постоянен ток
 Постоянный ток
 Постійний струм
 직류
 直流
 直流电

Do not dispose as unsorted municipal waste
 Ne odlagati kao nesortirani komunalni otpad
 Nevyhazujte do netříděného komunálního odpadu
 Bortskaf ikke som usorteret kommunalt affald
 Nicht als unsortierter Hausmüll entsorgen
 Ärge visake sortimata olmejäätmete hulka
 No desechar como basura municipal sin clasificar
 Ne pas jeter comme déchet municipal non trié
 Ná déan diúscairt mar dhranhaíl chathrach neamhshaoifa
 Ne odlagati kao nesortirani komunalni otpad
 Non gettare tra i rifiuti urbani non differenziati
 Neatbrīvoieties no nešķīrotiem sadzīves atkritumiem
 Neišmeskite kaip nerūšiuotos komunalinės atliekos
 Ne dobja el válogatás nélküli kommunális hulladéként
 Gooi ze niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval
 Nie wyrzucaj razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi
 Não descarte como lixo municipal não classificado
 Nu aruncați ca deșeurii municipale nesortate
 Ne odlagajte med nesortirane komunalne odpadke
 Nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu
 Älä hävitä lajittelemattoman yhdyskuntajätteenä
 Kasserä inte som osorterat kommunalt avfall
 Αyrılmamış belediye atığı olarak atmayın
 Μην απορρίψετε ως αστικά απόβλητα
 Не изхвърляйте като несортирани бивови отпадъци
 Не выбрасывать в качестве несортированных бытовых отходов.
 Не викидайте як несортовані побутові відходи
 분류되지 않은 도시 폐기물로 처리하지 마십시오
 分別されていない一般廃棄物として処分しないでください
 請勿作為未分類的城市垃圾處理



Indicates the authorised representative in Switzerland
 Ovlašteni zastupnik u Švicarskoj
 Autorizovaný zástupce ve Švicarsku
 Autoriseret repræsentant i Schweiz
 Bevollmächtigter Vertreter in der Schweiz
 Volitatus esindaja Šveitsis
 Representante autorizado en Suiza
 Mandataire en Suisse
 Ionadaí údaraithe san Eilvéis
 Ovlašteni predstavnik u Švicarskoj
 Rappresentante autorizzato in Svizzera
 Pilsvarotais pārstāvis Šveicē
 Igalīotais atstovas Šveicarijē
 Meghatalmazott képviselő Svájcban
 Gemachtigde vertegenwoordiger in Zwitserland
 Autoryzowany przedstawiciel w Szwajcarii
 Representante autorizado na Suíça
 Reprezentant autorizat în Elveția
 Pooblašćeni zastopnik v Švici
 Autorizovaný zástupca vo Švajčiarsku
 Valtuutettu edustaja Sveitsissä
 Auktoriserad representant i Schweiz
 Isviçre'deki yetkili temsilci
 Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα
 Оторизирован представитель в Швейцария
 Уполномоченный представитель в Швейцарии
 Уповноважений представник у Швейцарії
 스위스 공인 대리인
 スイスの正規代理店
 在瑞士的授权代表



European authorized representative
 Evropski ovlašćeni predstavnik
 Evropský zplnomocněný zástupce
 Europæisk autoriseret repræsentant
 Europäischer Bevollmächtigter
 Euroopa volitatud esindaja
 Representante autorizado europeo
 Représentant autorisé européen
 Ionadaí údaraithe Eorpach
 Evropski ovlašćeni predstavnik
 Rappresentante autorizzato europeo
 Eiropas pilnvarotais pārstāvis
 Eiropos īgalīotais atstovas
 Európai meghatalmazott képviselő
 Europese gemachtigde vertegenwoordiger
 Europejski upoważniony przedstawiciel
 Representante autorizado europeu
 Reprezentant autorizat european
 Evropski pooblašćeni zastopnik
 Európsky splnomocnený zástupca
 Eurooppalainen valtuutettu edustaja
 Europeiska auktoriserade representant
 Avrupa yetkili temsilcisi
 Ευρωπαϊός εξουσιοδοτημένος εκπ
 Европейски упълномощен представител
 Европейский уполномоченный представитель
 Представитель
 Європейський уповноважений представник
 유럽 공인 담당자
 欧洲公認代表
 欧洲授权代表



Product complies with European Medical Device Regulation (2017/745)
 Proizvod je u skladu s Europskom uredbom o medicinskim proizvodima (2017/745)
 Produkt vyhovuje evropským předpisům o zdravotnických prostředcích (2017/745)
 Produktet er i overensstemmelse med europæisk lovgivning om medicinsk udstyr (2017/745)
 Produkt entspricht der europäischen Medizinprodukteverordnung (2017/745)
 Toode vastab Euroopa meditsiiniseadmete määrusele (2017/745)
 El producto cumple con el Reglamento Europeo de Dispositivos Médicos (2017/745)
 Le produit est conforme à la réglementation européenne sur les dispositifs médicaux (2017/745)
 Cloíonn an tairge le Rialachán Feistí Leighis na hEorpa (2017/745)
 Proizvod je u skladu s Europskom uredbom o medicinskim proizvodima (2017/745)
 Il prodotto è conforme al regolamento europeo sui dispositivi medici (2017/745)
 Produkts atbilst Eiropas medicīnisko ierīču regulai (2017/745)
 Produktas atitinka Europos medicinos prietaisų reglamentą (2017/745)
 A termék megfelel az európai orvostechnikai eszközökről szóló rendeletnek (2017/745)
 Product voldoet aan de Europese verordening voor medische hulpmiddelen (2017/745)
 Produkt zgodny z Europejskim rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych (2017/745)
 O produto está em conformidade com o Regulamento Europeu de Dispositivos Médicos (2017/745)
 Produsul respectă Regulamentul European privind dispozitivele medicale (2017/745)
 Izdelek je skladen z evropsko uredbo o medicinskih pripomočkih (2017/745)
 Výrobok vyhovuje európskym predpisom o zdravotníckych pomôckach (2017/745)
 Tuote on Euroopan lääketieteellisiä laitteita koskevan asetuksen (2017/745) mukainen
 Produkten överensstämmer med den europeiska förordningen om medicinsk utrustning (2017/745)
 Úrün, Avrupa Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (2017/745) ile uyumludur
 Το προϊόν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τις ευρωπαϊκές ιατρικές συσκευές (2017/745)
 Продуктът отговаря на европейския регламент за медицинските изделия (2017/745)
 Продукт соответствует Европейским нормам медицинского оборудования (2017/745)
 Виріб відповідає Європейському регламенту про медичні вироби (2017/745)
 제품이 유럽 의료 기기 규정 (2017/745)을 준수 함
 製品は、欧州医療機器規制 (2017/745) に準拠しています
 产品符合欧洲医疗器械法规 (2017/745)

Type B applied part
 Naneti deo tipa B
 Aplikovaná část typu B
 Type B pářort del
 Anwendungsteil Typ B
 Tüüp B rakendatud osa
 Pieza aplicada tipo B
 Pièce appliquée de type B
 Chuir Cineál B cuid i bhfeidhm
 Naneseni dio tipa B
 Parte applicata di tipo B.
 B tipa piemērotā daļa
 B tipo taikoma dalis
 B típusú alkalmazott alkatrész
 Type B toegepast onderdeel
 Część zastosowana typu B.
 Peça aplicada tipo B
 Partea aplicată de tip B
 Del B, ki se uporablja
 Aplikovaná část' typu B.
 Tuuyppi B käytetty osa
 Typ B applicerad del
 B tipi uygulanan parça
 Εφαρμοσμένο μέρος τύπου B
 Приложена част тип B
 Тип B прикладная часть
 Прикладна частина типу B
 타입 B 적용 부품
 タイプB適用部品
 B型适用零件

-20 / +50°C

500 → ← 1060hPa

Temperature limits in °C for storage and transport
Temperaturne granice u °C za skladištenje i transport
Teplotní limity ve °C pro skladování a přepravu
Temperaturgrænser i °C til opbevaring og transport
Temperaturgrenzen in °C für Lagerung und Transport
Temperatuuri piirid °C ladustamisel ja transportimisel
Límites de temperatura en °C para almacenamiento y transporte.
Limites de température en °C pour le stockage et le transport
Teorainneacha teochta °C le haghaidh stórála agus iompair
Temperaturne granice u °C za skladištenje i transport
Limiti di temperatura in °C per lo stoccaggio e il trasporto
Temperatūras ierobežojumi °C uzglabāšanai un pārvadāšanai
Laikymo ir gabenimo temperatūros ribos °C
Tárolási és szállítási hőmérsékleti korlátok °C-ban
Temperatuurlimieten in °C voor opslag en transport
Limity temperatury w °C do przechowywania i transportu
Limites de temperatura em °C para armazenamento e transporte
Limitele de temperatură în °C pentru depozitare și transport
Mejne temperature v °C za lagring och transport
Teplotné limity v °C na skladovanie a prepravu
Lämpötilarajat °C varastoinnissa ja kuljetuksessa
Temperaturgränser i °C för lagring och transport
Depolama ve taşıma için °C sıcaklık sınırları
Ορια θερμοκρασίας σε °C για αποθήκευση και μεταφορά
Температурни ограничения в °C за съхранение и транспортиране
Температурные пределы в °C для хранения и транспортировки
Межі температур у °C для зберігання та транспортування
보관 및 운송 시 °C의 온도 제한
保管および輸送のための°C単位の温度制限
儲存和运输的温度限制 (单位: °C)

Pressure limitation for storage and transport
Dozvoljeni pritisak zraka za skladištenje i transport
Přípustný tlak vzduchu pro skladování a přepravu
Tilladt lufttryk til opbevaring og transport
Zulässiger Luftdruck für Lagerung und Transport
Lubatud õhurõhk ladustamiseks ja transportamiseks
Presión de aire permitida para almacenamiento y transporte.
Pression d'air admissible pour le stockage et le transport
Brú aeir incheadaithe le haghaidh stórála agus iompair
Dopušteni tlak zraka za skladištenje i transport
Pressione dell'aria consentita per lo stoccaggio e il trasporto
Pieļaujams gaisa spiediens uzglabāšanai un pārvadāšanai
Leistinas oro slėgis sandėliavimui ir transportavimui
Tároláshoz és szállításhoz megengedett légnyomás
Toegestane luchtdruk voor opslag en transport
Dopuszczalne ciśnienie powietrza do przechowywania i transportu
Pressão de ar admissível para armazenamento e transporte
Presiunea admisă a aerului pentru depozitare și transport
Dovoljeni zračni tlak za skladištenje in prevoz
Přípustný tlak vzduchu na skladovanie a prepravu
Sallittu ilmanpaine varastointia ja kuljetusta varten
Tillåtet lufttryck för förvaring och transport
Depolama ve nakliye için basınç sınırlaması
Επιτρεπτή πίεση αέρα για αποθήκευση και μεταφορά
Допустимо налягане на въздуха за съхранение и транспортиране
Ограничение давления для хранения и транспортировки
Обмеження тиску для зберігання та транспортування
보관 및 운송에 대한 압력 제한
保管と輸送の圧力制限
儲存和运输的压力限制

45% 80%



Humidity limitation for storage and transport
Ograničenje vlage za skladištenje i transport
Omezení vlhkosti pro skladování a přepravu
Fugtighedsbegrænsning til opbevaring og transport
Feuchtigkeitsbegrenzung für Lagerung und Transport
Niiskuse piiramine ladustamisel ja transportimisel
Limitación de humedad para almacenamiento y transporte.
Limitation de l'humidité pour le stockage et le transport
Teorainn taise le haghaidh stórála agus iompair
Ograničenje vlage za skladištenje i transport
Limitazione dell'umidità per lo stoccaggio e il trasporto
Mitruma ierobežojums uzglabāšanai un pārvadāšanai
Laikymo ir gabenimo drėgmės apribojimas
Páratartalom korlátozása tárolás és szállítás esetén
Vochtighedsbeperking voor opslag en transport
Ograniczenie wilgotności podczas przechowywania i transportu
Limitação de umidade para armazenamento e transporte
Limitarea umidității pentru depozitare și transport
Omejitve vlažnosti za skladištenje in prevoz
Obmedzenie vlhkosti pri skladovaní a prepravu
Varastoinnin ja kuljetuksen kosteusrajoitus
Luftfuktighetsbegränsning för lagring och transport
Depolama ve taşıma için nem sınırlaması
Περιορισμός υγρασίας για αποθήκευση και μεταφορά
Ограничение за влажност при съхранение и транспортиране
Ограничение влажности для хранения и транспортировки
Обмеження вологості для зберігання та транспортування
보관 및 운송 시 습도 제한
保管と輸送の湿度制限
儲存和运输的湿度限制

Keep dry!
Čuvajte na suhom!
Skladujte v suchu!
Opbevares tørt!
Trocken lagern!
Hoida kuival!
Almacenar en seco!
Conserver au sec!
Storåil tirim!
Čuvajte na suhom!
Conservare in luogo asciutto!
Uzglabāt sausu!
Laikykite sausai!
Tárolja szárazon!
Droog bewaren!
Przechowywać w suchym miejscu!
Armazene a seco!
Magazin uscat!
Shranjujte na suhem!
Skladujte v suchu!
Säilytä kuivana!
Förvara torr!
Kuru tut!
Αποθηκεύστε!
Съхранявайте на сухо!
Сохраняй сухим!
Тримай сухим!
건조하게 유지하십시오!
乾いた状態に保ちます!
保持干燥!

Type BF applied part
Naneti deo tipa BF
Aplikovaná část typu BF
Type BF påført del
Anwendungsteil Typ BF
Tüüp BF rakendatud osa
Pieza aplicada tipo BF
Pièce appliquée de type BF
Chuir Cineál BF cuid i bhfeidhm
Naneseni dio tipa BF
Parte applicata di tipo BF.
BF tipa piemērotā daļa
BF tipo taikoma dalis
BF típusú alkalmazott alkatrész
Type BF toegepast onderdeel
Część zastosowana typu BF.
Peça aplicada tipo BF
Partea aplicată de tip BF
Del BF, ki se uporablja
Aplikovaná část' typu BF.
Tyypin BF käytetty osa
Typ BF applicerad del
BF tipin uygulanan parça
Εφαρμοσμένο μέρος τύπου BF
Приложена част тип BF
Тип BF прикладная часть
Прикладна частина типу BF
타입 BF 적용 부품
タイプBF適用部品
BF型適用零件

Rx Only

Caution: Federal law (USA) restricts this device to sale by, or on the order of, a licensed healthcare practitioner
Opze: Savezni zakon (SAD) ograničava prodaju ovog uređaja od strane ili po nalogu licenciranog zdravstvenog radnika.
Upozornění: Federální zákon (USA) omezuje prodej tohoto zařízení prodejcem nebo na objednávku lékaře s licenci na zdravotní péči.
Advarsel: Føderal lov (USA) begrænser denne enhed til salg af eller efter ordre fra en autoriseret sundhedslæge.
Achtung: Das Bundesgesetz (USA) beschränkt den Verkauf dieses Geräts durch oder auf Anordnung eines zugelassenen Arztes.
Ettevaatust: föderaalseadused (USA) piiravad selle seadme müümist litsentseeritud tervishoiutöötaja poolt või tema tellimusel.
Precaución: La ley federal (EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo a un profesional de la salud con licencia o por orden de este.
Attention: La loi fédérale (USA) restreint la vente de cet appareil par ou sur ordre d'un professionnel de la santé agréé.
Rabhadh: Cuireann dlí Chónaidhme (SAM) srian ar an ngléas seo le cleachtóir cúram sláinte ceadúnaithe a dhíol nó a ordú.
Opze: Savezni zakon (SAD) ograničava prodaju ovog uređaja putem ili po nalogu licenciranog zdravstvenog radnika.
Attenzione: la legge federale (USA) limita la vendita di questo dispositivo a un operatore sanitario autorizzato o su suo ordine.
Uzmanību: Federālie likumi (ASV) ierobežo šīs ierīces tirdzniecību ar licencētu veselības aprūpes darbinieku starpniecību vai pēc pasūtījuma.
Dēmesio: Federalinis įstatymas (JAV) draudžia šį prietaisą pardavinėti licencijuotam sveikatos priežiūros specialistui arba jo užsakymu.
Vigyázat: Az USA szövetségi törvénye korlátozza ezt a készüléket engedéllyel rendelkező egészségügyi szakember által vagy megrendelésére.
Let op: de federale wet (VS) beperkt dit apparaat tot verkoop door of in opdracht van een erkende zorgverlener.
Przeostoga: prawo federalne (USA) ogranicza sprzedaż tego urządzenia przez licencjonowanego pracownika opieki zdrowotnej lub na jego zlecenie.
Cuidado: A lei federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo por um profissional de saúde licenciado ou por ordem deste.
ATENȚIE: Legea federală (SUA) restricționează acest dispozitiv la vânzarea de către, sau la ordinul unui medic de sănătate autorizat.
Pozor: Zvezni zakon (ZDA) omejuje prodajo te naprave s strani ali po naročilu pooblaščenega zdravstvenega delavca.
Upozornenie: Federálne zákony (USA) obmedzujú predaj tohto zariadenia predajcom alebo na objednávku odborníka s licenciou na zdravotnú starostlivosť.
Varoitus: Yhdysvaltain liittovaltion laki rajoittaa tämän laitteen myynnin lisensoidun terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta tai tilauksesta.
Varning: Federal lag (USA) begränsar denna enhet till försäljning av eller på beställning av en licensierad sjukvårdspersonal.
Dikkat: Federal yasalar (ABD), bu cihazın lisanslı bir sağlık uzmanı tarafından veya bu sırayla satılmasını kısıtlar
Προσοχή: Το ομοσπονδιακό δίκαιο (Η.Π.Α.) περιορίζει τη συσκευή αυτή στην πώληση από ή με εντολή ειδικευμένου ιατρού.
Внимание: Федеральный закон (САШ) ограничава това устройство за продажба от или по поръчка на лицензиран медицински лекар.
Внимание: Федеральний закон (США) обмежує продаж цього пристрою ліцензованим практикуючим врачом или по его заказу.
Увага: Федеральний закон (США) обмежує продаж цього пристрою ліцензованим медичним працівником або на його замовлення.
주의: 미국 연방법에 따라 이 장치는 면허가 있는 의료 종사자가 판매하거나 그에 따라 판매하도록 제한합니다.
注意: 連邦法 (米國) は、このデバイスを認可された医療従事者による、またはその注文による販売に制限しています。
注意: 联邦法律 (美国) 限制此设备只能由有执照的医疗保健从业人员或按其订购



Caution: UV Light. Do not look directly at light.
Opze: Ne gledajte direktno u UV svjetlost.
Upozornění: Nedívejte se přímo do UV světla.
Forsigtig: Se ikke direkte på UV-lys.
Achtung: UV-Licht nicht direkt betrachten.
Ettevaatust: ärge vaadake otse ultravioletvalgust.
Precaución: No mire directamente a la luz UV.
Attention: ne regardez pas directement la lumière UV.
Rabhadh: Ná breathnaigh go díreach ar sholas UV.
Opze: Ne gledajte izravno u UV svjetlo.
Attenzione: non guardare direttamente la luce UV.
Uzmanību: neskatieties tieši uz UV gaismu.
Dēmesio: nežiūrėkite tiesiai į UV šviesą.
Vigyázat: Ne nézzen közvetlenül az UV-fényre.
Let op: Kijk niet rechtstreeks naar UV-licht.
Uwaga: Nie patrz bezpośrednio na światło UV.
Cuidado: Não olhe diretamente para a luz UV.
ATENȚIE: nu priviți direct la lumina UV.
Pozor: Ne glejte direktno v UV svetlobo.
Upozornenie: Nepozerajte sa priamo do UV svetla.
Varoitus: Älä katso suoraan UV-valoon.
Varning: Titta inte direkt på UV-ljus.
Dikkat: UV ışığı. Doğrudan ışığa bakmayın.
Προσοχή: Μην κοιτάτε απευθείας το φως UV.
Внимание: Не глядайте директно на UV светлина.
Осторожно: УФ-свет. Не смотрите прямо на свет.
Увага: УФ-світло. Не дивіться прямо на світло.
주의: UV 광선. 빛을 직접 보지 마십시오.
注意: UVライト。光を直接見ないでください。
注意: 紫外线。不要直视光。



DermLite LLC
21 Argonaut | Aliso Viejo, CA 92656 | USA
Tel. +1-949-481-6384 | Fax +1-949-240-7492
info@dermlite.com | www.dermlite.com



E. C. REP Ltd
5 Fitzwilliam Square East,
Dublin 2, D02 R744, Ireland
Tel: +353 1 2 544 944
Email: info@ecrep.ie



Responsible Person Limited
Summit House, 4-5 Mitchell Street
Edinburgh, EH6 7BD Scotland



CompLife Swiss s.a.
Via Luganetto 4
6962 Viganella (TI)

Patents/Trademarks: www.dermlite.com/patents